

ESPAÑOL (LATINOAMERICA)

**Andafacil - Silla de Ruedas Todo Terreno |
Económica Portátil | Alta Calidad**



Andafacil[®]

www.andafacil.com

MANUAL

ADVERTENCIAS

Antes de realizar cualquier operación, compruebe visualmente la integridad del dispositivo. En caso de que el producto presente anomalías, contactar inmediatamente con el distribuidor donde lo adquirió. No asumimos ninguna responsabilidad por el mal uso del dispositivo.

- La silla de ruedas debe permanecer sobre una superficie sólida antes de sentarse en el asiento.
- No exceda la capacidad máxima de peso (90 KG)
- No se suba a la silla de ruedas

DESCRIPCIÓN SILLA DE RUEDAS

Con freno de mano y diseño plegable compacto, marco estabilizador de acero, seguro y liviano. Adecuado para una amplia gama de terrenos. Reposapiés regulable en altura

MATERIAL COMPONENTES

Marco: acero al carbono
Ruedas: neumáticos macizos que absorben los golpes.
Reposabrazos: Reposabrazos texturizados antideslizantes
Asiento: Cojín de malla transpirable

PREPARANDO PARA USAR

Asegúrese de montar la silla de ruedas correctamente y, si es necesario, solicite el apoyo de un médico o enfermera para ajustar la altura adecuada al usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para garantizar su seguridad mientras usa la silla de ruedas, debe seguir la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.
2. Verifique que todas las ruedas estén apretadas antes de usar.
3. Compruebe si el freno de mano y el freno de pie funcionan correctamente.
4. Sea consciente de su entorno cuando utilice una silla de ruedas.
5. El propósito del respaldo es brindar apoyo a la espalda al sentarse. El respaldo no está diseñado para soportar todo el peso del cuerpo. Evite inclinarse mientras está sentado, ya que esto puede provocar una caída.
6. Los frenos deben estar en posición bloqueada antes de sentarse en el asiento.
7. Los frenos se utilizan para evitar que las ruedas rueden. Sin embargo, si alguien lo empuja, es posible que esto no impida que la silla de ruedas se mueva.
8. NO mover la silla de ruedas cuando la persona esté a punto de sentarse; Mantenga la silla de ruedas estable antes de sentarse.
9. HACER _ NO use una silla de ruedas sola para retroceder, bajar pendientes, subir escaleras, frenar o cruzar obstáculos grandes. Puede haber un riesgo grave de caída o lesión.
10. HACER _ NO utilice silla de ruedas para transportar objetos pesados .
11. Cuando el andador esté en una pendiente, observe si el freno de pie está activado.
12. HACER _ NO empuje la silla de ruedas cuando el freno esté puesto.
13. HACER _ NO ponga la mano en el pliegue de la silla de ruedas para evitar quedar atrapado.
14. HACER _ NO se deje caer en el asiento de la silla de ruedas, sino siéntese siempre lentamente en el asiento de forma controlada.

COMPONENTE



1. Apretón de manos firme
2. Cables de freno
3. Pararse y frenar
4. 1 ruedas traseras de 6 pulgadas
5. Ruedas delanteras de 6 pulgadas
6. Respaldo
7. Pasamanos antideslizante ABS
8. Estructura de acero al carbono
9. Parada de pie
10. Pedal _

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de la silla de ruedas	57.9 CM
Ancho del lado de la silla de ruedas	80 CM
Altura total	87.9 CM
Ancho interior del asiento	48 CM
Ancho del cojín	41.9 CM
Altura del asiento respecto al suelo	45 CM
Altura del respaldo	43.9 CM
Ancho del respaldo	45.7 CM
Altura del pasamano	65 CM
Longitud del pasamano	13,8 pulgadas
Máx. peso del usuario	90KG
Peso	11 KG
Rueda delantera	40.6 CM
rueda de oreja R	15.2 CM


MANUAL

La silla de ruedas requiere montaje antes de su uso. Por favor, siga las siguientes instrucciones:

1. Saque la silla de ruedas y sus accesorios.



MONTAR LA SILLA DE RUEDAS

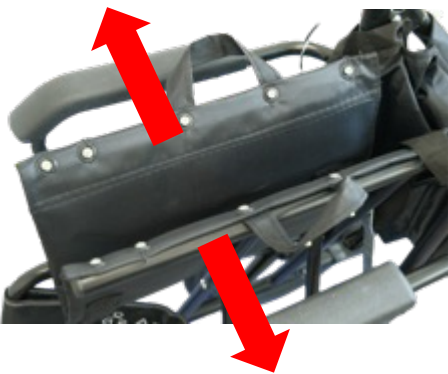

Empuje hacia afuera y presione hacia abajo para abrir la silla de ruedas, asegurándose de presionar firmemente en su lugar.



Agarre la barandilla y levántela hasta que el área verde encaje en su posición.



Coloque el cojín del asiento y las correas para los pies de acuerdo con la posición del velcro; la instalación estará completa.



Mueva los reposapiés a la posición correcta.

MANUAL

FUNCIONAMIENTO DEL FRENO DE PIE

Presione los frenos de pie izquierdo y derecho para bloquear el dispositivo en la rueda trasera, desacelerando o deteniendo la silla de ruedas.

Atención : El freno debe estar bajado en la posición bloqueada cuando esté sentado. Empuje hacia adelante para verificar previamente la cerradura.



PLEGABLE EL SILLA DE RUEDAS

Levante los pedales, pliegue el respaldo hacia atrás, cruce las manos, levante el cojín y ciérrelo lentamente, pliegue el cojín.



Presione ambos botones hacia abajo para colapsar la parte posterior.



Una vez plegado el respaldo, levante las correas laterales para plegar la silla de ruedas.

OPERANDO EL MANO FRENOS

Levante el freno de mano para reducir la velocidad o detener el andador.

Atención : asegúrese de que el freno de pie esté en la posición de freno cuando necesite utilizar la silla de ruedas.



MANTENIMIENTO

Con el tiempo, los cables de freno pueden estirarse y, si no se pueden realizar más ajustes, se deben reemplazar. Busque la ayuda de su proveedor a la hora de sustituir los cables de freno.

Se debe comprobar que las ruedas estén seguras cada vez antes de utilizar el andador. Además, verifique que los frenos funcionen correctamente y que las manijas y perillas estén seguras.

Si alguna parte del andador parece floja o insegura, suspenda su uso hasta que sea inspeccionada por un distribuidor autorizado.

A continuación, se muestra el cronograma de mantenimiento:

SEMANALMENTE

- Compruebe el freno por mal funcionamiento
- Revise todas las ruedas y las ruedas para ver si hay pernos, tuercas y perillas flojos.

PERIODICAMENTE

- Compruebe si hay desgaste en la empuñadura
- Verifique que los pernos del marco estén seguros
- Verifique que los pernos del eje delantero y trasero estén seguros
- Revisar neumáticos en busca de desgaste o grietas.

ANUAL

- Una vez al año lleve su silla de ruedas a un reparador autorizado para una revisión, limpieza, servicio y lubricación completa de todas las piezas móviles.

LIMPIEZA

Su silla de ruedas se puede limpiar con un paño o una esponja húmedos y agua tibia y jabón. Si es necesario, se pueden utilizar limpiadores de superficies antibacterianos domésticos. Se debe tener cuidado de no dejar residuos de limpieza en las empuñaduras o en el asiento, lo que podría dejarlos resbaladizos durante su uso. No utilice estropajos ni raspadores, ya que esto puede dañar los revestimientos de la superficie.

¡ADVERTENCIAS!

1. Deberá estar acompañado cuando utilice o monte una silla de ruedas por primera vez.
2. No se pare ni pise los pedales al sentarse o abandonar la silla de ruedas.
3. Utilice el freno al sentarse o bajarse de la silla de ruedas.
4. En una silla de ruedas, debe mantener el equilibrio de lado a lado con el cuerpo pegado al respaldo de la silla.
5. No incline su cuerpo fuera del automóvil para evitar que el centro de gravedad cambie y se vuelque.
6. No subas solo.
7. Cambiar de dirección al bajar una pendiente hará que la silla de ruedas se vuelva inestable.
8. No utilice sillas de ruedas en caminos con pendientes superiores a 8°.
9. No utilice ácidos, álcalis ni otras sustancias químicas corrosivas para desinfectar las sillas de ruedas.
10. Compruebe con frecuencia los distintos tornillos de fijación de la silla de ruedas. Si está flojo, ajuste la cerradura a tiempo.

Gracias por su compra. Esperamos que disfrutes de tu Silla de Ruedas Andafacil.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar www.andafacil.com/calificar



Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@andafacil.com o WhatsApp +526622389950 y te enviaremos tu regalo.