

ESPAÑOL (LATINOAMERICA)

Andadera Ortopedica de Acero para Adulto
Andafacil | Portatil, Plegable, Reforzada



Andadera Ortopedica de Acero para Adulto Andafacil | Portatil, Plegable, Reforzada

ADVERTENCIAS

Antes de realizar cualquier operación, compruebe visualmente la integridad del dispositivo. En caso de que el producto presente anomalías, contactar inmediatamente con el distribuidor donde lo adquirió. No asumimos ninguna responsabilidad por el mal uso del dispositivo.

DESCRIPCIÓN DE LA ANDADERA

El andador presenta un diseño plegable compacto, un marco estable de acero inoxidable y una altura totalmente ajustable, diseñado para ayudar a los usuarios a realizar más deportes al aire libre, ejercicio y ocio.

MATERIAL COMPONENTES

Estructura: acero inoxidable
Pasamanos: Pasamanos texturizados antideslizantes

PREPARANDO PARA USAR

La elección del tipo de ayuda y de las configuraciones necesarias para su uso debe ser realizada por personal médico y técnico cualificado, en función de la patología y condiciones del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para garantizar su seguridad al utilizar el andador, debe cumplir con la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.
2. Compruebe si el botón de ajuste de altura está seguro.
3. Asegúrese de que su andador esté en su lugar. Sea consciente de su entorno cuando utilice un andador.
4. Compruebe que las cuatro patas estén fijadas al mismo nivel.
5. NO ponga las manos en el plegado del andador para evitar quedar atrapado.



COMPONENTES



- 1. Empuñaduras
- 2. Marco
- 3. Botón plegable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	57.9 CM pulgadas
Longitud del andador	80 CM pulgadas
Altura máxima ajustada	87.9 CM
Altura mínima ajustada	48 CM
Máx. peso del usuario	90 KG
peso ocho	2.3 KG

Andadera Ortopedica de Acero para Adulto Andafacil | Portatil, Plegable, Reforzada

No es necesario montar el andador antes de su uso. Sigue las instrucciones de abajo:

1. Sácalo de la caja.



2. Ábrelo




3. Bloquear los agujeros



¿CÓMO AJUSTAR LA ALTURA?

Presione el botón para ajustar a la altura adecuada y alinear los agujeros.

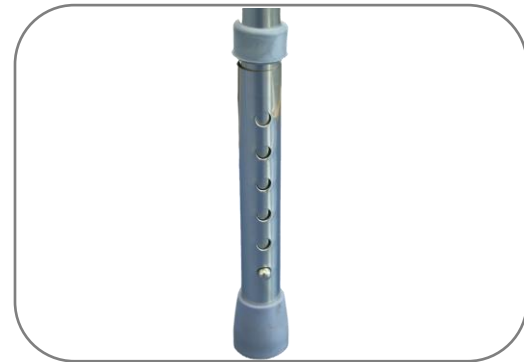

PLEGABLE EL ANDADOR

Para plegar el andador, simplemente presione el botón en el medio de la barra transversal frontal.



MANTENIMIENTO

Después de un período de tiempo, si alguna parte del andador está suelta o no está segura, deje de usarlo y llévelo a uno de nuestros centros oficiales de posventa para su inspección.

Andadera Ortopédica de Acero para Adulto Andafacil | Portatil, Plegable, Reforzada

LIMPIEZA

Su andador se puede limpiar con un paño o esponja húmedo y agua tibia y jabón. Si es necesario, se pueden utilizar limpiadores de superficies antibacterianos domésticos. Se debe tener cuidado de no dejar residuos de limpieza en las empuñaduras o en el asiento, lo que podría dejarlos resbaladizos durante su uso. No utilice estropajos ni raspadores, ya que esto puede dañar los revestimientos de la superficie.

¡ADVERTENCIAS!

1. Límite máximo de trabajo 90KG.
2. No se apoye en el andador ni levante los pies del suelo.
3. Asegúrese de que ambos putters estén ajustados a la misma altura.
4. Consulte a un profesional sanitario capacitado o a un distribuidor sanitario independiente aprobado para ajustar la altura de este producto.
5. Mantener una distancia de seguridad entre peatones y otros peatones u objetos.
6. Algunas piezas pueden causar lesiones o daños cuando entran en contacto con otros objetos.
7. No intente cambiar la alfombrilla de tu bicicleta. Si están defectuosos o necesitan ser reemplazados, comuníquese con un técnico autorizado.
8. Asegúrese de que el andador esté completamente abierto antes de usarlo.

Gracias por su compra. Esperamos que disfrute de su andador Andafacil.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar
www.andafacil.com/calificar



Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@andafacil.com o WhatsApp +526622389950 y te enviaremos tu regalo.