

ESPAÑOL (LATINOAMERICA)

ANDADOR PLEGABLE 2 EN 1 ANDAFACIL



Andafacil[®]
www.andafacil.com

ANDADOR PLEGABLE 2 EN 1 ANDAFACIL

ADVERTENCIAS

Verifique visualmente la integridad del producto antes de usarlo. Si hay alguna anomalía con el producto, comuníquese con nosotros de inmediato ya que no estaremos obligados a asumir ninguna responsabilidad por el mal uso del equipo.

- Antes de sentarse en el asiento, se debe colocar el andador sobre suelo sólido y mantener el freno de mano en posición fija.
- No exceda la capacidad máxima de peso (118 KG.)
- No te subas al andador

DESCRIPCIÓN ANDADOR

Equipado con freno, tabla para sentarse y bolsa de compras, marco estabilizador de acero, doble fila de ruedas traseras para mayor estabilidad, seguridad y peso ligero. Adecuado tanto para viajes como para uso doméstico.

MATERIAL COMPONENTES

Marco: acero al carbono
Ruedas: rueda delantera de 6", rueda trasera de 7"
Reposabrazos: Reposabrazos texturizados antideslizantes
Asiento: cojín suave y transpirable

PREPARANDO PARA USAR

Asegúrese de ensamblar el andador correctamente y, si es necesario, solicite el apoyo de un médico o enfermera para ajustar la altura adecuada para el usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para garantizar su seguridad mientras utiliza el andador, debe seguir la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.
2. Verifique que todas las ruedas estén apretadas antes de usar.
3. Compruebe si los frenos funcionan correctamente.
4. Sea consciente de su entorno cuando utilice un andador.
5. El propósito del respaldo es brindar apoyo a la espalda al sentarse. El respaldo no está diseñado para soportar todo el peso del cuerpo. Evite inclinarse mientras está sentado, ya que esto puede provocar una caída.
6. Los frenos deben estar en posición bloqueada antes de sentarse en el asiento.
7. Los frenos se utilizan para evitar que las ruedas rueden. Sin embargo, si lo empuja, es posible que no impida que el andador se mueva.
8. NO mueva el andador cuando la persona esté a punto de sentarse. Mantenga el andador estable antes de sentarse.
9. NO utilice un andador para transportar objetos pesados.
10. Cuando el andador esté en una pendiente, tenga en cuenta si el freno de pie está activado.
11. NO empuje el andador cuando el freno esté puesto.
12. NO ponga la mano en el pliegue del andador para evitar que lo pillen.
13. NO se deje caer en el asiento del andador, sino siéntese siempre lentamente en el asiento de forma controlada.

COMPONENTE



1. Freno de mano y empuñadura
2. Cables de freno
3. Asiento acolchado suave
4. Bolsa de almacenamiento
5. Rueda delantera universal de 5, 6 pulgadas
6. Ruedas traseras dobles de 6 pulgadas
7. Respaldo y empuñadura
8. Reposapiés
9. Marco de acero al carbono

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud del andador	67.8 CM
Ancho del andador	61 CM
Altura total	83.3 a 93 CM
Ancho del asiento	34.8 CM
Longitud del asiento	53.3 CM
Altura del asiento al suelo	34.8 CM
Altura del respaldo al asiento	17.8 CM
Rueda trasera	7 pulgadas
Rueda delantera	15.2 CM
Espacio de agarre	47 CM
Máx. peso del usuario	118 KG
Peso	8.3 KG

ANDADOR PLEGABLE 2 EN 1 ANDAFACIL

El andador requiere montaje antes de su uso. Por favor, siga las siguientes instrucciones:

1. Saque el armazón del andador y sus accesorios.



MONTAR EL andador



Empuje hacia abajo ambos lados de la canasta para abrir el marco de acero.



Retire el respaldo, el respaldo se puede instalar en dos direcciones, elija una de las direcciones para instalar.
Presione hacia abajo el cordón de resorte en el respaldo y presiónelo en el tubo correspondiente para completar la instalación.


Retire los tornillos de la parte verde, saque una de las empuñaduras, instálela en la bayoneta correspondiente siguiendo la línea del freno y apriete los tornillos alineando los orificios.

ANDADOR PLEGABLE 2 EN 1 ANDAFACIL

PLEGABLE EL ANDADOR

Levante suavemente las varillas a ambos lados del andador (círculo verde) y luego gire el marco principal hacia adentro para terminar de guardarlo.

Nota: ¡vacíe el contenido de la bolsa de compras al plegarla y tenga cuidado de no pellizcarse la mano!

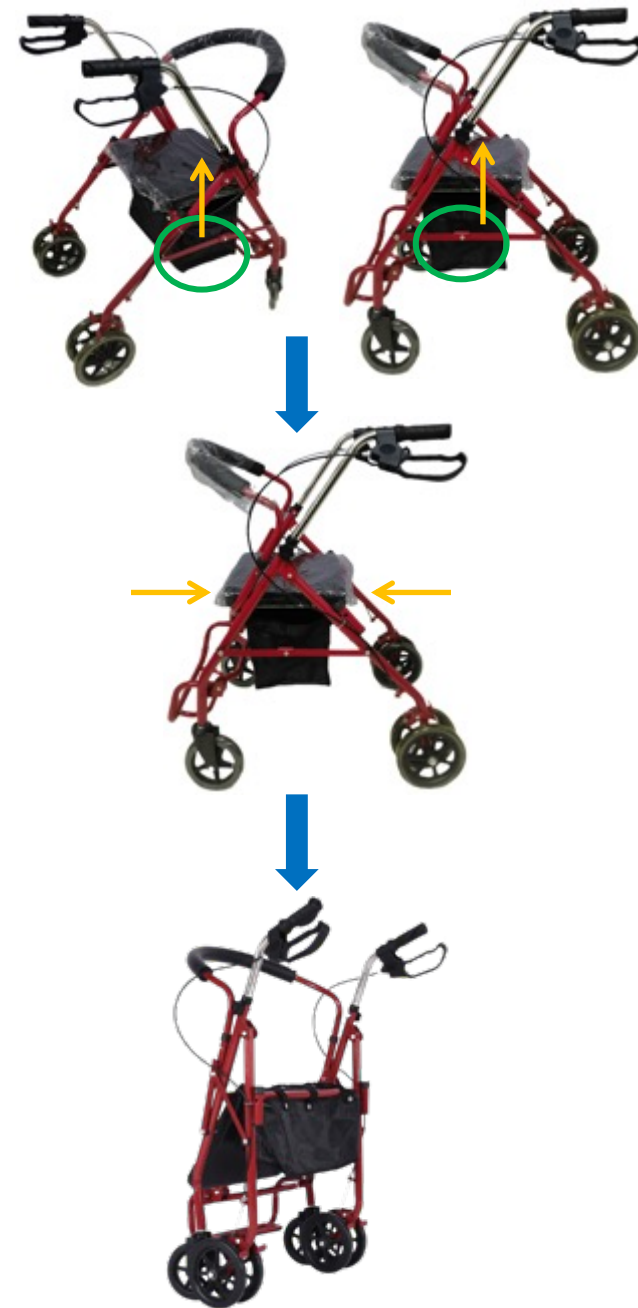

FUNCIONAMIENTO DEL FRENO DE PIE

Presione los frenos de pie izquierdo y derecho para bloquear el dispositivo en la rueda trasera, desacelerando o deteniendo el andador.

Atención: El freno debe estar bajado en la posición bloqueada cuando esté sentado. Compruebe la cerradura antes de avanzar hacia .



Presione hasta que escuche un claro chasquido de los frenos en su lugar.

MANTENIMIENTO

Después de un período de tiempo, la distancia de frenado puede aumentar y se debe reemplazar el cable si no es posible realizar más ajustes.

Al reemplazar el cable del freno, busque la ayuda de un oficial de puesta en servicio.

Se debe comprobar la firmeza de las ruedas antes de cada uso del andador .

También se debe comprobar que los frenos funcionan correctamente y que las empuñaduras y empuñaduras están firmes.

Si alguna parte del andador está suelta o no está segura, deje de usarlo y llévelo a uno de nuestros centros oficiales de posventa para su inspección.

A continuación, se muestra el cronograma de mantenimiento:

SEMANALMENTE

- Compruebe el freno por mal funcionamiento
- Revise todas las ruedas y las ruedas para ver si hay pernos, tuercas y perillas flojos.

PERIODICAMENTE

- Compruebe si hay desgaste en la empuñadura
- Verifique que los pernos del marco estén seguros
- Verifique que los pernos del eje delantero y trasero estén seguros
- Revisar neumáticos en busca de desgaste o grietas.

ANUAL

- Una vez al año lleve su andador a un reparador autorizado para una revisión completa, limpieza, servicio y lubricación de todas las piezas móviles.

LIMPIEZA

El andador se puede limpiar con un paño húmedo o una esponja y agua tibia y jabón. Si es necesario, se puede utilizar un limpiador de superficies antibacteriano doméstico. Se debe tener cuidado de no dejar residuos de limpieza en las manijas o el asiento, ya que esto puede hacerlo resbaladizo durante el uso. No utilice almohadillas de limpieza ni raspadores, ya que esto puede dañar el revestimiento de la superficie.

¡ADVERTENCIAS!

1. Deberá estar acompañado cuando utilice o se siente en un andador por primera vez.
2. No se pare ni pise los pedales al sentarse o al bajarse del andador.
3. Utilice el freno fijo al sentarse o bajarse del andador .
4. En un andador, debe mantener el equilibrio de lado a lado con el cuerpo cerca del respaldo de la silla.
5. No incline su cuerpo fuera del automóvil para evitar que el centro de gravedad cambie y se vuelque.
6. No subas solo.
7. Cambiar de dirección al ir cuesta abajo rápidamente hará que el andador se vuelva inestable.
8. No utilice ácidos, álcalis ni otras sustancias químicas corrosivas para desinfectar el andador .
9. Compruebe con frecuencia los distintos tornillos de fijación del andador . Si está flojo, ajuste la cerradura a tiempo.



Gracias por su compra. Esperamos que disfrute de su andador Andafacil.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar
www.andafacil.com/calificar



Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@andafacil.com o WhatsApp +526622389950 y te enviaremos tu regalo.