

ESPAÑOL (LATINOAMERICA)

SILLA COMODO ANDAFACIL



Andafacil[®]

www.andafacil.com

ESPAÑOL (LATINOAMERICA)

SILLA COMODO ANDAFACIL



COMPONENTE

1. Cómodo reposabrazos
2. Empuñadura
3. Asiento acolchado con cómoda
4. Pata ajustable de 4 velocidades
- 5 . Freno de pie estático
6. Reposapiés
7. Cubo de inodoro
8. Cojín extraíble
9. Respaldo extraíble

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño	38,2*36,2*10,2 pulgadas
Ancho del asiento	26,7 pulgadas
Profundidad del asiento	35,4-47,2 pulgadas
Altura del cojín del asiento	38,2-65 pulgadas
Asiento a la calabaza	28,3 pulgadas
Peso	7,2 kg
Máx. peso del usuario	150 kg

ADVERTENCIAS

Verifique visualmente la integridad del producto antes de usarlo. Si hay alguna anomalía con el producto, comuníquese con nosotros de inmediato ya que no estaremos obligados a asumir ninguna responsabilidad por el mal uso del equipo.

- Antes de sentarse en el asiento, la silla con inodoro debe colocarse sobre suelo sólido .
- No exceda la capacidad máxima de peso (330 libras).
- No se pare sobre la silla del inodoro

DESCRIPCIÓN Silla cómoda

cómoda con función 3 en 1, con función silla de ducha, silla de ruedas, orinal. Diseño de reposapiés antiinclinación hacia adelante, diseño de respaldo extraíble, soporte de carga súper fuerte conveniente para todo tipo de personas.

MATERIAL

COMPONENTES
Marco : aleación de aluminio
Empuñadura: PVC
Asiento:PU

PREPARANDO PARA USAR

Asegúrese de que todas las piezas del sillón con inodoro estén intactas y, si es necesario, ajuste la altura adecuada para el usuario con la ayuda de un familiar o una enfermera especializada.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para garantizar su seguridad mientras utiliza la silla con inodoro, debe seguir la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.
2. Verifique que todas las ruedas estén apretadas antes de usar.
3. Sea consciente de su entorno cuando utilice una silla con inodoro.
4. El propósito del respaldo es brindar apoyo a la espalda al sentarse. El respaldo no está diseñado para soportar todo el peso del cuerpo. Evite inclinarse mientras está sentado, ya que esto puede provocar una caída.
5. NO mueva la silla con inodoro cuando la persona esté a punto de sentarse. Mantenga estable la silla con inodoro antes de sentarse.
6. NO use una silla con inodoro para transportar artículos pesados.
7. NO ponga la mano en el pliegue de la silla con inodoro para evitar que la pillen.
8. NO se permita caer en el asiento de la silla con inodoro, siéntese siempre lentamente en el asiento de manera controlada.

SILLA COMODO ANDAFACIL

La silla con inodoro debe extenderse antes de su uso. Por favor, siga las siguientes instrucciones:

1. Saque el marco de la silla cómoda y sus accesorios. Debido a los diferentes accesorios, es posible que obtenga un cojín diferente, pero el método de instalación es el mismo.

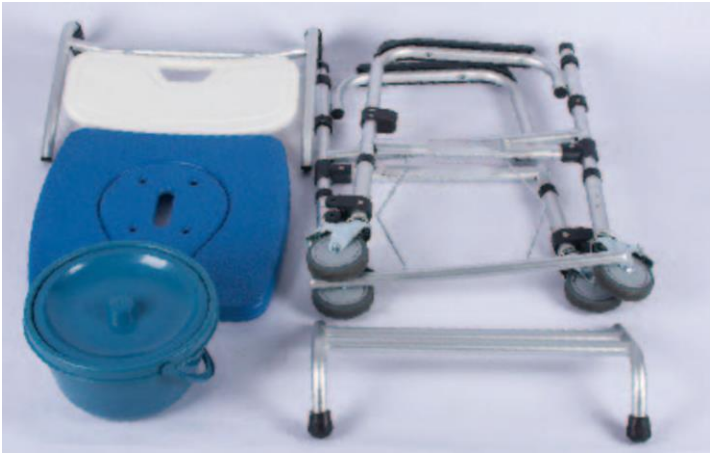

MONTAR LA silla cómoda




Ampliar el marco principal plegado



Encaja el tubo portaequipajes del asiento, teniendo cuidado de que las canicas encajen bien



Inserte el respaldo, preste atención a la tarjeta de mármol apretada, el reposabrazos es extraíble

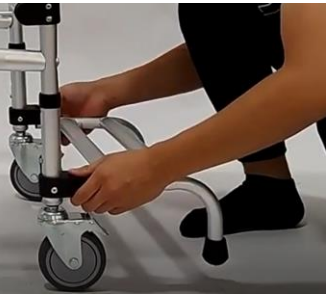

Tome el pedal y alinéelo con la ranura negra en el tubo del pie, colóquelo y encájelo en su lugar.



Bloquee los tornillos con la pequeña herramienta incluida.



Pon el cubo encima.



La parte posterior del cojín tiene ranuras para encajar en el tubo transversal posterior y encajar para rematar el acabado.

SILLA COMODO ANDAFACIL

MANTENIMIENTO

Después de un período de tiempo, si alguna pieza de la silla con inodoro está suelta o no está segura, deje de usarla y llévela a uno de nuestros centros oficiales de posventa para su inspección.

A continuación se muestra el cronograma de mantenimiento:

SEMANALMENTE

- Revise todo el marco y la rueda para ver si hay pernos, tuercas y perillas flojos.

PERIODICAMENTE

- Compruebe si hay desgaste en la empuñadura
- Verifique que los pernos del marco estén seguros
- Asegúrese de que no haya grietas en la tabla para sentarse.

ANUAL

Una vez al año, lleve su silla con inodoro a un reparador autorizado para una revisión completa, limpieza, servicio y lubricación de todas las piezas móviles.

LIMPIEZA

La silla con inodoro se puede limpiar con un paño húmedo o una esponja y agua tibia y jabón. Si es necesario, se puede utilizar un limpiador de superficies antibacteriano doméstico. Se debe tener cuidado de no dejar residuos de limpieza en las manijas o el asiento, ya que esto puede hacerlo resbaladizo durante el uso. No utilice almohadillas de limpieza ni raspadores, ya que esto puede dañar el revestimiento de la

¡ADVERTENCIAS!

1. Debe estar acompañado cuando utilice la silla con inodoro por primera vez.
2. No se pare ni pise el marco de la silla con inodoro.
3. No apoye su cuerpo en la silla para evitar que el centro de gravedad cambie y se vuelque.
4. No subas.
5. No utilice ácidos, álcalis ni otras sustancias químicas corrosivas para desinfectar el sillón con inodoro.
6. Compruebe con frecuencia los distintos tornillos de fijación del sillón con inodoro. Si está flojo, ajuste la cerradura a tiempo.



Se puede utilizar como refuerzo para el asiento del inodoro.



Reposapiés antivuelco para evitar caídas hacia delante al levantarse.



Plegar el reposapiés facilita que el usuario se siente o se pare

Gracias por su compra.
Esperamos que disfrutes de tu Silla Cómoda Andafacil.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar

www.andafacil.com/review

Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@andafacil.com o WhatsApp +526622389950 y te enviaremos tu regalo.

