

ESPAÑOL (MÉXICO)

**ANDAFACIL® SILLA DE RUEDAS CON
COMÓDO**



ANDAFACIL®

www.andafacil.com

ESPAÑOL (MÉXICO)

ANDAFACIL® SILLA DE RUEDAS CON COMÓDO

ADVERTENCIAS

Antes de realizar cualquier operación, compruebe visualmente la integridad del dispositivo. Si el producto presenta alguna anomalía, contacte inmediatamente con el distribuidor donde lo adquirió. No nos responsabilizamos del mal uso del dispositivo.

- La silla de ruedas debe permanecer sobre una superficie sólida antes de sentarse en el asiento.
- No exceda la capacidad máxima de peso (200 lbs)
- No se suba a la silla de ruedas

DESCRIPCIÓN SILLA DE RUEDAS

Con freno de mano y diseño plegable compacto, marco estabilizador de acero, seguro y ligero. Apto para una amplia variedad de terrenos. Reposapiés de altura ajustable.

MATERIAL COMPONENTES

Marco: acero al carbono
Ruedas: neumáticos sólidos que absorben los impactos
Apoyabrazos: Apoyabrazos texturizados antideslizantes
Asiento: Cojín de malla transpirable

PREPARACIÓN PARA USO

Asegúrese de montar correctamente la silla de ruedas y, si es necesario, solicite la ayuda de un médico o enfermero para ajustar la altura adecuada para el usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para garantizar su seguridad mientras utiliza la silla de ruedas, debe seguir la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.
2. Compruebe que todas las ruedas estén bien apretadas antes de usar.
3. Compruebe si el freno de mano y el freno de estacionamiento funcionan correctamente.
4. Sea consciente de su entorno cuando utilice una silla de ruedas.
5. El respaldo proporciona soporte para la espalda al sentarse. No está diseñado para soportar todo el peso corporal. Evite inclinarse mientras está sentado, ya que podría caerse.
6. Los frenos deben estar en posición bloqueada antes de sentarse en el asiento.
7. Los frenos se utilizan para evitar que las ruedas giren. Sin embargo, si alguien los empuja, es posible que no impidan el movimiento de la silla de ruedas.
8. NO mueva la silla de ruedas cuando la persona esté a punto de sentarse; mantenga la silla de ruedas estable antes de sentarse.
9. HACER NO utilice la silla de ruedas solo para retroceder, bajar pendientes, subir escaleras, bordillos ni cruzar obstáculos grandes. Existe un grave riesgo de caídas o lesiones.
10. HACER NO utilizar silla de ruedas para transportar objetos pesados .
11. Cuando la silla de ruedas esté en una pendiente, observe si el freno de estacionamiento está activado.
12. HACER NO empuje la silla de ruedas cuando el freno esté puesto.
13. HACER NO coloque la mano sobre el pliegue de la silla de ruedas para evitar quedar atrapado.
14. HACER NO se deje caer en el asiento de la silla de ruedas, sino siéntese siempre lentamente en el asiento de manera controlada.

COMPONENTES



1. Agarre
2. Freno
3. Freno
4. Ruedas traseras de
5. Ruedas delanteras de
6. Orinal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Característica	Medida
Ancho de la silla de ruedas	65 cm (25,6 pulgadas)
Longitud de la silla de ruedas	102 cm (40,1 pulgadas)
Altura total	84 cm (33 pulgadas)
Ancho interior del asiento	47 cm (18,5 pulgadas)
Altura del asiento desde el suelo	45 cm (17,7 pulgadas)
Peso máximo del usuario	90,7 kg (200 libras)
Rueda delantera	61 cm (24 pulgadas)
Rueda trasera	18 cm (7 pulgadas)

La silla de ruedas requiere ensamblaje antes de su uso. Siga las instrucciones a continuación:

1. Sacar la silla de ruedas



MONTAR LA SILLA DE RUEDAS

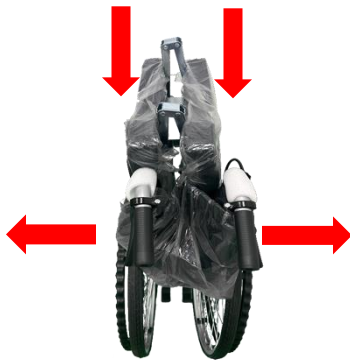

Tire del mango hacia afuera y presione el asiento hacia abajo, teniendo cuidado de no pillarse la mano.



Instalación completada



Gastar la silla de ruedas



Tome el cojín adicional y fíjelo con velcro a la parte posterior. Los cojines del asiento se fijan de la misma manera.



Empuja el orinal debajo del asiento



Saque el accesorio de asiento extraíble y colóquelo en el asiento.

ANDAFACIL® SILLA DE RUEDAS CON CÓMODO

FRENO DE ESTACIONAMIENTO EN FUNCIONAMIENTO

Presione los frenos de estacionamiento izquierdo y derecho para bloquear el dispositivo en la rueda trasera, reduciendo o deteniendo la silla de ruedas.

Atención : El freno debe estar accionado hasta la posición de bloqueo al sentarse. Empuje hacia adelante para comprobar el bloqueo.



PLEGABLE EL SILLA DE RUEDAS

Levante los pedales, retire el cojín del asiento y el cojín del respaldo. Retire el orinal y el accesorio del asiento, y levante ambos lados.



OPERANTE EL MANO FRENOS

Tire del freno de mano para reducir la velocidad o detener la silla de ruedas.

Atención : Asegúrese de que el freno de mano esté en la posición de freno cuando necesite utilizar la silla de ruedas.



MANTENIMIENTO

Con el tiempo, los cables de freno pueden estirarse y, si no se pueden realizar más ajustes, se deben reemplazar. Busque la ayuda de su vendedor cuando reemplace los cables de freno. Es necesario comprobar que las ruedas estén bien sujetas cada vez antes de utilizar la silla de ruedas.

Además, verifique que los frenos funcionen correctamente y que las manijas y perillas manuales estén seguras.

Si alguna parte de la silla de ruedas parece suelta o insegura, suspenda su uso hasta que sea inspeccionada por un distribuidor autorizado.

A continuación se muestra el programa de mantenimiento:

SEMANALMENTE

- Comprobar si el freno funciona mal
- Revise todas las ruedas y pivotes para ver si hay pernos, tuercas y perillas sueltos.

PERIÓDICAMENTE

- Compruebe si la empuñadura está desgastada
- Compruebe que los pernos del marco estén bien fijados
- Compruebe que los pernos del eje delantero y trasero estén bien fijados
- Compruebe si los neumáticos tienen desgaste o grietas.

ANUAL

- Una vez al año, lleve su silla de ruedas a un reparador autorizado para una revisión completa, limpieza, servicio y lubricación de todas las partes móviles.

LIMPIEZA

Su silla de ruedas puede limpiarse con un paño o esponja húmedos y agua tibia con jabón. Si es necesario, puede usar limpiadores de superficies antibacterianos domésticos. Tenga cuidado de no dejar residuos de limpieza en las empuñaduras ni el asiento, ya que podrían resbalarse al usarlos. No utilice estropajos ni raspadores, ya que pueden dañar los revestimientos de las superficies.

¡ADVERTENCIAS!

1. Debe estar acompañado cuando utilice o monte una silla de ruedas por primera vez.
2. No se suba ni pise los pedales al sentarse o levantarse de la silla de ruedas.
3. Utilice el freno al sentarse o levantarse de la silla de ruedas.
4. En una silla de ruedas, usted debe mantener el equilibrio de un lado a otro con el cuerpo cerca del respaldo de la silla.
5. No incline su cuerpo fuera del vehículo para evitar que el centro de gravedad cambie y vuelque.
6. No escale solo.
7. Cambiar de dirección al descender hará que la silla de ruedas sea inestable.
8. No utilice sillas de ruedas en carreteras con pendientes superiores a 8°.
9. No utilice ácidos, álcalis ni otras sustancias químicas corrosivas para desinfectar las sillas de ruedas.
10. Revise con frecuencia los tornillos de fijación de la silla de ruedas. Si están flojos, ajuste el bloqueo a tiempo.

Gracias por su compra. Esperamos que disfrute de su silla de ruedas Andafacil.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar www.andafacil.com/review



Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@andafacil.com o al WhatsApp +526622389950 y te enviaremos tu regalo.



ANDAFACIL®

www.andafacil.com