



Andafacil® – StandUp Pro – Silla
de Ruedas Eléctrica | Plegable,
Reclinable y con Función para
Pararse



MANUAL DE USUARIO

MANUAL DE USUARIO

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto. El uso inadecuado puede provocar lesiones personales, lesiones a terceros o accidentes de tráfico. Tahe Company no se responsabiliza de dichos incidentes.

1. Este manual incluye los métodos de funcionamiento y montaje del vehículo así como las normas de garantía.
2. Coloque este manual en un lugar apropiado en el vehículo.
3. Si otras personas van a utilizar este vehículo, asegúrese de proporcionarles este folleto como referencia y pídeles que lo lean atentamente.
4. Este manual solo cubre las piezas comunes de cada modelo. Debido a mejoras de calidad o cambios de diseño, las instrucciones e ilustraciones del manual de operación de este folleto pueden diferir ligeramente de las piezas reales. Nuestra empresa se reserva el derecho a realizar modificaciones. Por favor, comprenda y consulte el vehículo real. Para obtener videos de instalación o instrucciones de operación más detallados para cada modelo, escanee el código o contacte con el personal de posventa.

2.Composición estructural

El vehículo se compone principalmente del bastidor, el sistema de control, el asiento, el reposabrazos, el motor y la batería.

3. Seguridad de Uso

Cualquier vehículo puede causar daños si se usa incorrectamente. Conducir sin experiencia puede poner en peligro su seguridad personal y afectar la de los demás. Respete las leyes y normas de tránsito y utilice su medio de transporte de forma responsable.

1. La batería debe estar instalada firmemente en la posición designada antes de usarla. Si se cae, podría perder el control del vehículo.
2. No apague el controlador en ningún momento a menos que los pasajeros abandonen el vehículo. Apagarlo podría provocar la pérdida de control del vehículo.
3. Antes de acostumbrarse a conducir, practique familiarizarse con el vehículo en un lugar abierto y seguro.
4. Al salir, viaje siempre con un acompañante.
5. Evite caminar sobre pendientes pronunciadas, terrenos inclinados, escalones altos, zanjas, etc. El ángulo de la pendiente transitable debe ser inferior a 10 grados y tenga especial cuidado al controlarlo.
6. Inserte los tubos redondos de ambos lados del asiento en las ranuras en forma de U antes de subirse.
7. Mantenga sus manos siempre en el área de control del vehículo para controlarlo.
8. No pise los pedales del vehículo para moverlo.
9. No retire las ruedas antivuelco para conducir. De lo contrario, existe riesgo de vuelco.
10. No circule por el carril reservado para vehículos motorizados.
11. Al estacionar en una pendiente, utilice el freno de mano de estacionamiento.
12. Al usar neumáticos, mantenga la presión especificada. Una presión anormal puede causar inestabilidad en la conducción o una pérdida excesiva de potencia.

.

MANUAL DE USUARIO

13. No apague la energía en la pendiente para evitar perder los frenos en ausencia de energía.
14. El acompañante deberá prestar atención a que los pies del usuario estén apoyados de forma segura sobre los pedales.
15. Si necesita reparar o modificar el producto, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de nuestra empresa. No realice modificaciones de forma privada.
16. No coloque el vehículo en un lugar húmedo para evitar la oxidación y otras situaciones como la humedad que afecten a los componentes electrónicos.

4. Método de uso

1. Como se muestra en la Figura 1, levante los apoyabrazos de ambos lados del automóvil y deje que el paciente suba desde el costado del automóvil.



2. Tras confirmar que el panel de control esté encendido (como se muestra en la Figura 2), pulse el botón de elevación de piernas ① para activar la función. En ese momento, empuje el joystick continuamente hacia adelante para levantar el reposapiernas (Figura 3) y, viceversa, empuje el joystick continuamente hacia atrás para bajarlo. Pulse el botón de elevación de piernas ① de nuevo para desactivar la función. De igual forma, pulse el botón de reclinación ② para activar la función de reclinación. En ese momento, empuje el joystick continuamente hacia atrás para reclinarse (Figura 3) y, viceversa, empuje el joystick continuamente hacia adelante para levantar el respaldo. Mantenga pulsado el botón de reinicio ③ mientras levanta o reclina el asiento para que vuelva a su posición original.

Atención: Cuando la función de elevación de piernas o acostada está activada y no se realiza ninguna operación durante un período corto de tiempo, se apagará automáticamente.

Advertencia: No agite vigorosamente cuando esté acostado y no utilice la función acostado mientras se mueve.


MANUAL DE USUARIO



3. Después de confirmar que el panel de control está siempre encendido, al sostener el joystick universal (Figura 4), empujar el joystick hacia adelante (la amplitud de empuje determina la velocidad), tirar del joystick hacia atrás es invertir, e inclinar hacia la izquierda y la derecha corresponde a la dirección.



4. Con el asiento completamente reiniciado, mantenga presionado el botón de la función de pie en el panel de control (como se muestra en la Figura 5) para activar la función. En este punto, mueva el joystick hacia adelante para ponerse de pie (como se muestra en la Figura 6) y viceversa para sentarse. De igual manera, mantenga presionado el botón de reinicio para reiniciar el asiento. **Advertencia: No lo agite con fuerza mientras está de pie ni utilice la función de pie mientras se mueve. Si desea moverse estando de pie, asegúrese de que la rueda delantera esté en contacto con el suelo; de lo contrario, existe el riesgo de inclinarse hacia adelante.**

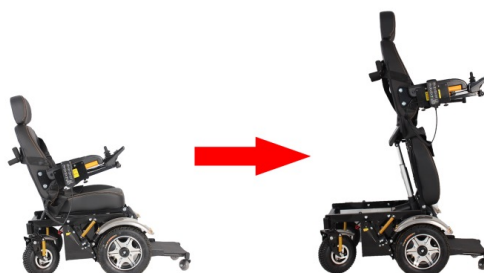

MANUAL DE USUARIO

5. El método de funcionamiento del mango del controlador (Figura 7) es básicamente el mismo que el del controlador del automóvil. Después de desbloquear el interruptor, mantenga presionado el botón de elevación de piernas para levantar gradualmente el soporte de piernas hasta el ángulo deseado; si necesita acostarse completamente, mantenga presionado el botón de acostarse hasta que el asiento alcance una posición horizontal. Durante el proceso de elevación o acostarse, mantenga presionado el botón de elevación de piernas curvadas o del respaldo para restablecer el soporte de piernas o el respaldo, y presione el botón de reinicio para restaurar el asiento a su posición inicial. Después de asegurarse de que el asiento esté completamente restablecido, mantenga presionado el botón de función de pie para activar el modo de pie y suéltelo para detenerlo; de igual manera, mantenga presionado el botón de reinicio o se siente para restablecer rápidamente la posición de sentado estándar.

Atención: Si no se presiona el botón de bloqueo para desbloquear, el mango del controlador no se puede usar; después de desbloquear el mango del controlador, se bloqueará automáticamente después de un periodo de tiempo .



MANUAL DE USUARIO

Introducción a la operación

1 . Conecte el cable de alimentación a la toma de la batería y enciéndalo. Los que tienen conectores rojos y los rojos

Conecte en direcciones opuestas (como se muestra en la Figura 1) e inserte la base del enchufe cuadrado de tres clavijas verticales y el enchufe cuadrado de tres clavijas verticales en direcciones opuestas (como se muestra en la Figura 2). ¡Está estrictamente prohibido insertar a la fuerza el enchufe rojo en la toma de tres clavijas!



Figura 1



Figura 2

2. Para el controlador de joystick universal, encienda la alimentación y opere el joystick con la mano izquierda o derecha para mover el patinete hacia adelante, hacia atrás y girar. Empuje el joystick hacia adelante para avanzar, tire de él hacia atrás para retroceder, tire de él hacia la izquierda para girar a la izquierda y tire de él hacia la derecha para girar a la derecha. Para frenar, puede tirar del joystick en la dirección opuesta.

3. Para los nuevos usuarios, configure primero la velocidad en el modo más bajo y luego familiarícese con todas las operaciones.

4. En vehículos con dirección asistida, active el interruptor de encendido, controle la velocidad girando la palanca del acelerador y cambie a marcha atrás al dar marcha atrás. La dirección a izquierda y derecha se controla girando el manillar. Para frenar, accione la palanca del freno.

5. En vehículos con funciones de parada y inclinación eléctricas, debe presionar el botón de reinicio hasta que el vehículo se detenga y luego presionar la función de parada para pararse. En posición de parada, el sistema prohíbe las funciones de inclinación y estiramiento de piernas. Está estrictamente prohibido pararse en pendientes.



MANUAL DE USUARIO

6. Carga

Paso 1: Verifique si el puerto de carga está bloqueado.

Paso 2: Inserte el enchufe del cargador en el orificio redondo o en el conector de tres orificios debajo del controlador.

Paso 3: Algunos enchufes tienen cabezas cuadradas y deben insertarse en el zócalo triangular cuadrado de la carrocería del vehículo.

Paso 4: El proceso de carga completo puede tardar entre 6 y 10 horas.

7. Instalación y funcionamiento: Puede escanear el código QR en la carrocería del vehículo o los siguientes códigos QR para visualizarlos.

Advertencia

1. Durante la carga, manténgalo alejado de las llamas, ya que pueden provocar que la batería se incendie o explote.
2. Durante la carga, asegúrese de que no haya sustancias inflamables o explosivas alrededor del cargador y la batería.
3. Para las baterías de litio, manténgalas libres de sustancias inflamables y explosivas durante la carga y el almacenamiento.
4. No cargue cuando tenga las manos mojadas o el enchufe esté húmedo para evitar descargas eléctricas.

6. Consejos para el uso de la batería

1. Las baterías que se recargan con frecuencia ofrecen un rendimiento confiable y una larga vida útil. Procure mantener las baterías completamente cargadas en todo momento. Se recomienda descargarlas regularmente. Cargarlas o almacenarlas con frecuencia sin cargarlas completamente puede causar daños permanentes a la batería, lo que puede provocar un funcionamiento inestable y una menor vida útil.
2. Si no usa su vehículo de movilidad con frecuencia, debe recargarlo cada 15 días para mantener la batería activa. No deje la batería descargada durante un período prolongado.
3. Al cargar la batería, si el cargador no cambia la luz indicadora o si la batería se calienta, detenga la carga inmediatamente y comuníquese con el vendedor o el departamento de posventa.
4. Las baterías son consumibles y, tras ciclos de carga y descarga, su capacidad disminuye gradualmente, lo que reduce la autonomía de los vehículos. Esto es normal, y cuando la capacidad de la batería cae por debajo del 60 % de su capacidad nominal, se considera una falla de la batería.
5. Las baterías de plomo-ácido totalmente selladas y sin mantenimiento están diseñadas específicamente para vehículos de movilidad y otros vehículos móviles. En general, son seguras, ecológicas y respetuosas con el medio ambiente.

MANUAL DE USUARIO

7. Mantenimiento y autoinspección

I. Es necesario realizar inspecciones periódicas y reforzar los tornillos de fijación del vehículo:

Después de que el vehículo haya estado en uso durante algún tiempo, su compacidad puede deteriorarse, generalmente debido a tornillos flojos.

1. Si escuchas ruidos provenientes de los pedales o estos se siguen cayendo al pisarlos, debes revisar los tornillos que fijan los pedales.
2. Al plegar el vehículo y nota que no se pliega con suavidad o es difícil plegarlo, verifique los tornillos del marco de soporte.
3. Al empujar la llanta de la rueda trasera y escuchas ruidos, verifica si los tornillos que fijan el cubo de la rueda están flojos.
4. Si un lado del cojín del asiento no puede permanecer equilibrado o es muy difícil empujarlo, verifique los tornillos de fijación correspondientes.

Consejos de mantenimiento diario para vehículos

II. Reemplace regularmente los neumáticos cuando su presión sea demasiado baja o estén excesivamente desgastados.

Los neumáticos son el componente más sometido a estrés de un vehículo. Por lo tanto, deben cuidarse con frecuencia. En especial, en el caso de los neumáticos neumáticos, es necesario revisar la presión regularmente para garantizar que sea adecuada. Si un neumático se daña, puede reemplazarse en una tienda de bicicletas. En el caso de los neumáticos sólidos de poliuretano, el momento de reemplazo debe determinarse según el grado de desgaste.

Además, los radios de los vehículos con ruedas grandes pueden necesitar ajustes regulares. Para ajustar o reemplazar los refuerzos, acuda a una tienda especializada o a un taller de reparación de bicicletas.

III. Limpie y reemplace periódicamente los cojinetes:

Los rodamientos son cruciales para el funcionamiento normal del vehículo y también son componentes muy resistentes. Mientras el vehículo esté en marcha, los rodamientos se desgastan constantemente. El uso prolongado o la exposición frecuente a la lluvia pueden oxidarlos y agrietarlos fácilmente, impidiendo su uso. Será muy difícil empujarlos, y no reemplazarlos durante mucho tiempo dañará el eje, lo cual no vale la pena.

IV. Mantenimiento y cuidado del cojín del respaldo del coche

El material del cojín del respaldo del coche es un aspecto que los consumidores suelen pasar por alto. Generalmente, el material del cojín de los coches de baja calidad empieza a presentar una sensación de abolladura después de dos o tres meses de uso. El cojín del respaldo se abolla. Estos coches pueden causar daños secundarios a largo plazo, como deformidades de la columna. Por lo tanto, al comprar un coche, es importante prestar atención a este aspecto. Además, si el cojín del respaldo presenta una sensación de abolladura, debe reemplazarse de inmediato.

MANUAL DE USUARIO

8. Contenido de la garantía

- 1) El motor, la batería y el controlador tienen una garantía de un año. No se proporcionará servicio posventa si se presentan problemas de calidad debido a factores humanos, como la entrada de agua, una falla prolongada de la carga de la batería que provoque la alimentación de la misma, o un cortocircuito de la batería debido a un cableado privado.
- 2) Los neumáticos tienen una garantía de tres meses como consumibles. Excepto los neumáticos pinchados.
- 3) Los cargadores, controladores de velocidad, interruptores multifuncionales y otros componentes son piezas vulnerables y están cubiertos por una garantía de tres meses. No cubre daños humanos o ingreso de agua, que no están dentro del alcance de la garantía.
- 4) Daños logísticos de transporte inevitables, como colisiones y daños durante el transporte. No se realizarán devoluciones por problemas de calidad (le enviaremos las piezas de repuesto lo antes posible).

Para detalles completos de la política de garantía favor de visitar www.andafacil.com

Gracias por su compra. Esperamos que disfrute de su producto.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte



Visite la página o escanee el código QR para comenzar

www.andafacil.com/review