



Manual de usuario

Le explicamos cómo armar, usar y cuidar su andadera, paso a paso.

TU NUEVO PRODUCTO

Andadera Vertical Andafacil® para Adultos

SKU: ADF-2021-1X



Lea este manual antes del primer uso y consérvelo.

Movilidad sin límites

Le damos la bienvenida



¡Hola! Soy **Don Andy**, de la familia ANDAFACIL. Lo acompaño en este manual: cuando vea mi cara, es un consejo mío para que disfrute su andadera.

Gracias por elegir ANDAFACIL. Este manual le explica, paso a paso, cómo armar, usar y cuidar su andadera. Léalo con calma antes del primer uso y téngalo a la mano. Si alguien le ayuda, compártale también este manual.

140 kg

capacidad

13 kg

peso

133–146

cm agarraderas

4

llantas con aire

¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp



Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualadf20211x



Contenido

Revise la caja	3	Primeros pasos	4
Su seguridad primero	5	Conozca su andadera	6
Armado	7	Cómo usarla	9
Plegar, guardar y viajar	10	Cuidado y mantenimiento	11
Especificaciones	12	Garantía, devoluciones y soporte	13

1

Revise la caja

Antes de armar, revise que venga todo:

- | | |
|---|--|
| ☐ Marco de la andadera con asiento y respaldo | ☐ 2 soportes de brazos |
| ☐ 4 llantas con sus tornillos de liberación rápida | ☐ Agarraderas de apoyo para pararse |
| ☐ 2 agarraderas con freno | ☐ Bolsa de compras |
| | ☐ Sujetador de bastón |
| | ☐ Este manual |



CONSEJO DE DON ANDY

Si falta algo o llegó dañado, avísenos dentro de los primeros 7 días por WhatsApp o con un reporte de soporte.

Las fotos de este manual pueden variar un poco respecto a su andadera por mejoras del producto.

Tres tipos de avisos en este manual



ADVERTENCIA

Puede causar una lesión o un daño grave.



ATENCIÓN

Cuida su producto y que funcione bien.



CONSEJO DE DON ANDY

Le ayuda a aprovechar mejor su producto.

2


Primeros pasos

Lo esencial para empezar. Los detalles de cada paso vienen en los capítulos siguientes.



1 Coloque las llantas

Con los tornillos de liberación rápida.

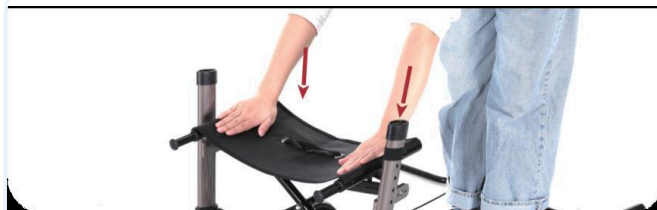

2 Despléguela

Ábrala y revise que las llantas queden derechas.



3 Ajuste la altura

Agarraderas y brazos se ajustan con botones.

4

4 Freno para sentarse

Empuje el freno al frente hasta el «clic».



Véalo en video: 1 minuto

Escanee el código con la cámara de su celular y vea a Alex explicar lo esencial de su andadera.

s.andafacil.com/videoadf20211xv2



Lea estas indicaciones antes de usar su andadera por primera vez. Si alguien le ayuda, compártaselas también.



ADVERTENCIA

Antes de sentarse, ponga los frenos en modo estacionario. Siéntese despacio, apoyándose en los brazos: no se deje caer en el asiento.

- No pase de la capacidad máxima: 140 kg.
- Úsela solo cuando esté completamente extendida y con los botones de altura firmes.
- Revise que las 4 llantas estén bien colocadas y tengan aire suficiente.
- No camine hacia atrás con ella ni la use en escaleras.
- No se pare sobre la andadera.
- No la use como silla de ruedas ni se siente en ella en pendientes.
- No use el asiento para cargar objetos pesados.
- No la empuje con los frenos activados.
- Mantenga distancia con otras personas al caminar.



ADVERTENCIA

Los frenos sirven para controlar la velocidad al caminar; no detienen la andadera al 100 %. Camine a un paso que pueda controlar.



ATENCIÓN

El respaldo le ayuda al sentarse, pero no está hecho para cargar todo el peso de su cuerpo.



ATENCIÓN

No meta las manos en la zona donde la andadera se dobla: al plegarla puede lastimarse los dedos.

Antes de cada uso, revise que esté en buen estado. Si nota algo dañado, no la use y escríbanos. No intente cambiar usted las llantas ni los frenos: ANDAFACIL le ayuda con las refacciones.

4

Conozca su andadera

Su andadera vertical ANDAFACIL es de aluminio y le ayuda a caminar erguido: el peso descansa en sus antebrazos, no en la espalda ni en las muñecas. No hay que levantarla a cada paso: se desliza y usted la controla con los frenos de mano.



Andadera Vertical Andafacil®

- Agarraderas con frenos de mano y ajuste de altura con botones.
- Soportes de brazos (antebrazos), también ajustables.
- Agarraderas de apoyo al frente, para pararse y sentarse.
- Asiento con respaldo para descansar.
- Bolsa de compras y sujetador de bastón.
- Llantas de caucho con aire: delanteras de 30.5 cm y traseras de 25.4 cm.
- Pedal de apoyo para pasar obstáculos.
- Tornillos de liberación rápida en las llantas.

5 Armado

Su andadera se arma antes del primer uso. Saque todas las piezas de la caja y siga estos pasos. Si lo necesita, pida apoyo a su médico o enfermera para elegir la altura adecuada.

1

Llantas delanteras

Quite el tornillo de liberación rápida, coloque las llantas delanteras y vuelva a poner el tornillo.



2

Llantas traseras

Quite los tornillos de liberación rápida y coloque las llantas traseras de la misma forma.



3

Despliegue la andadera

Ábrala por completo y revise que las llantas queden en la posición correcta.



4

Agarraderas

Meta las 2 agarraderas al frente de los tubos de la andadera. Use los botones para ajustar la altura.



5

Soportes de brazos

Inserte los soportes de brazos en la posición indicada.



6

Agarraderas de apoyo

Inserte las agarraderas de apoyo al frente de la andadera.



7

Bolsa de compras

Cuelgue la bolsa en los tubos al frente del asiento.



CONSEJO DE DON ANDY

Antes de caminar, empuje con firmeza cada agarradera y cada soporte: si el botón quedó bien en su orificio, no se mueven.

Ajuste los soportes de brazos



- 1 Apriete el botón a lo largo del brazo de la andadera.
- 2 Deslice el soporte de brazo hacia arriba o hacia abajo.
- 3 Suelte el botón y revise que quedó firme. La altura correcta: camina derecho, con los hombros relajados.

Los frenos

1

Para bajar la velocidad o frenar


Apriete la palanca del freno.



2

Freno estacionario

Empuje el freno hacia adelante hasta escuchar un «clic». Así la andadera queda frenada.

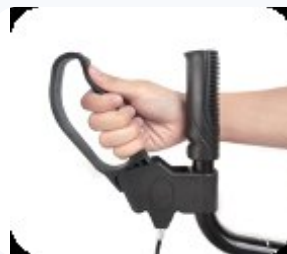

Para sentarse a descansar

- Ponga los frenos en modo estacionario.
- Use las agarraderas de apoyo y los brazos para bajar despacio hasta el asiento.
- Para seguir caminando, levántese con apoyo y quite el freno estacionario.
- Las primeras veces, practique en casa, en un piso plano, hasta sentirse con confianza.

7

Plegar, guardar y viajar

1 Jale el listón del asiento

1

Tire del listón que está encima del asiento: la andadera se dobla.



2 Doble las llantas

2

Quite los tornillos de liberación rápida y doble las llantas.



i

ATENCIÓN

Al doblarla, mantenga las manos lejos de las uniones.

SE PUEDE DOBLAR
PARA LLEVAR EN
COCHES

82CM
DE
ALTURA



50CM
DE ANCHO

57CM
DE LARGO

Plegada mide unos 82 x 57 x 50 cm

Cuándo	Qué revisar
Cada semana	Que los frenos funcionen bien y que las llantas estén firmes.
De vez en cuando	Las agarraderas, que los tornillos estén apretados, que las llantas sigan ajustadas y con aire.

Frenos

Con el tiempo, los frenos pueden necesitar ajuste. Si siente flojos los cables, ajústelos igual que los frenos de una bicicleta. Frenos y agarraderas deben estar bien ajustados siempre.

Limpieza

Límpiala con un trapo húmedo. Si hace falta, use un limpiador desinfectante. Séquela por completo antes de volver a usarla.



CONSEJO DE DON ANDY

Si una llanta pierde aire seguido o el freno no detiene bien la andadera, escríbanos por WhatsApp y le ayudamos.

Característica	Valor
Tipo	Andadera vertical plegable con soporte de antebrazos
Capacidad máxima	140 kg
Peso	13 kg
Estatura recomendada	1.40 a 2.00 m
Altura de agarraderas	133 a 146 cm (ajustable con botones)
Distancia entre agarraderas	50 cm
Medidas (ancho × fondo)	62 × 80 cm
Plegada (alto × largo × ancho)	82 × 57 × 50 cm
Asiento	25 × 46 cm · altura al piso 59 cm
Llantas	Delanteras 30.5 cm (12") giratorias · traseras 25.4 cm (10") · caucho con aire
Frenos	De mano, de doble función: al caminar y estacionario
Materiales	Armazón de aluminio · agarraderas de poliuretano · asiento de nylon y poliéster
Color	Plateado con negro

Bajo uso y mantenimiento normales, ANDAFACIL le ofrece **90 días de garantía** desde la fecha de compra contra **defectos de fabricación**. Conserve su factura o comprobante: lo necesitaremos para cualquier revisión.

Si registra su compra dentro de los 3 días después de recibirla, suma **30 días más** (120 días en total).

	Detalle
Cubre	Defectos de fabricación y de materiales, componentes eléctricos y estructura, con uso normal.
No cubre	Mal uso, golpes, caídas, sobrecarga, agua o clima, desgaste normal (llantas, cojines, cubiertas), modificaciones no autorizadas ni desastres naturales.
Cómo reclamar	Escríbanos por WhatsApp o envíe un reporte de garantía con su número de pedido, fotos o video del problema y, si aplica, qué luz parpadea.



Garantía y soporte: escriba a Marla por WhatsApp

Con su número de pedido y fotos o video lo resolvemos más rápido. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualadf20211x



**Registre su compra
(+30 días de garantía)**

s.andafacil.com/garantiaext



**¿Algo dejó de funcionar?
Reporte de garantía**

s.andafacil.com/ticketegarantia



**¿Dudas de uso o ajustes?
Reporte de soporte**

s.andafacil.com/ticketesoporte



**Todo sobre garantía
y soporte**

s.andafacil.com/garantiasoporte

Devoluciones

¿Cambió de opinión? Tiene **7 días desde que recibe su pedido** para solicitar una devolución, con el producto en buen estado y, de ser posible, en su empaque original. El envío de regreso suele ir por cuenta del cliente, salvo que le indiquemos otra cosa.



**Solicitar una
devolución**

s.andafacil.com/devolucion



**Garantía extendida
TotalCare**

s.andafacil.com/andafaciltotalcare

Al escribirnos, incluya su número de pedido, el SKU, el número de serie (etiqueta en el chasis o bajo el asiento), una descripción breve y fotos o video.



ANDAFACIL

IMPORTADO A MÉXICO POR: EUREKA MOMENTS FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: EMF230825V83

Calle Baja California No. Ext. 279, Int. 303, Col. Hipódromo, Cuauhtémoc, CP 06100, Ciudad de México, México

www.andafacil.com · contacto@andafacil.com · WhatsApp +52 1 55 9990 2396

¡Gracias por su compra!

¿Le está sirviendo su andadera? Cuéntenos su experiencia: su opinión ayuda a otras familias a decidir.



Visite la página o escanee el código QR
www.andafacil.com/review



¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp

Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualadf20211x



Movilidad sin límites