



Manual de usuario

Le explicamos cómo armar, ajustar, usar y cuidar su andadera, paso a paso.

TU NUEVO PRODUCTO

**Andafacil® Andadera para
Rehabilitación Niño**

SKU: AF-NP-2024-X1



Lea este manual antes del primer uso y consérvelo.

Movilidad sin límites

Le damos la bienvenida



¡Hola! Soy **Don Andy**, de la familia ANDAFACIL. Lo acompaño en este manual: cuando vea mi cara, es un consejo mío para que disfrute su andadera.

Gracias por elegir ANDAFACIL. Este manual le explica, paso a paso, cómo armar, ajustar, usar y cuidar su andadera. Léalo con calma antes del primer uso y téngalo a la mano. Si alguien le ayuda, compártale también este manual.

75 kg

capacidad máxima

9.5 kg

peso de la andadera

80–120

cm de estatura

30–43

cm de ancho de pecho

¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp



Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafnp2024x1



Contenido

Revise la caja	3	Primeros pasos	4
Su seguridad primero	5	Conozca su andadera	6
Armado	7	Cómo usarla	9
Cuidado y mantenimiento	10	Especificaciones	11
Garantía, devoluciones y soporte	12		

1

Revise la caja

Antes de armar, revise que venga todo:

- ☐ Marco inferior y soporte superior de la andadera
- ☐ Ruedas para caminar y ruedas antivuelco
- ☐ Tubo de equilibrio
- ☐ Tubo protector del pecho con rodillos acolchados
- ☐ Cojín protector del asiento con correas (arnés)
- ☐ Poste para suero
- ☐ Este manual



CONSEJO DE DON ANDY

Si falta algo o llegó dañado, avísenos dentro de los primeros 7 días por WhatsApp o con un reporte de soporte.

Las fotos de este manual pueden variar un poco respecto a su andadera por mejoras del producto.

Tres tipos de avisos en este manual



ADVERTENCIA

Puede causar una lesión o un daño grave.



ATENCIÓN

Cuida su producto y que funcione bien.



CONSEJO DE DON ANDY

Le ayuda a aprovechar mejor su producto.

2

Primeros pasos

Lo esencial para empezar. Los detalles de cada paso vienen en los capítulos siguientes.



1 Revise las piezas

Saque todo de la caja y revise que ninguna pieza esté dañada o falte.

2

2 Ármela

Siga los pasos del capítulo «Armado». Si puede, hágalo entre dos personas.

3

3 Ajústela a la estatura

Ajuste la altura y el soporte de pecho con ayuda de un familiar o de una enfermera.

4

4 Ponga el seguro de las ruedas

Antes de subir o bajar al niño, bloquee las ruedas y hágalo con calma.



Véalo en video: 1 minuto

Escanee el código con la cámara de su celular y vea a Alex explicar lo esencial de su andadera.

s.andafacil.com/videoafnp2024x1



Lea estas indicaciones antes de usar la andadera por primera vez. Compártalas con todas las personas que van a acompañar al niño.



ADVERTENCIA

La andadera soporta hasta 75 kg. No exceda este peso y no la use para cargar objetos pesados.

- Antes de usarla, revise que la andadera esté completa y sin daños. Si nota algo raro, no la use y escríbanos.
- Revise que todas las ruedas y tornillos estén bien apretados antes de cada uso.
- La primera vez, y siempre que el niño la use, esté a su lado acompañándolo.
- Fíjese en lo que hay alrededor: escalones, alfombras, juguetes en el piso.
- No permita que nadie se pare o se suba al marco de la andadera.
- No recargue el cuerpo de lado sobre la andadera: el peso se va hacia un lado y se puede voltear.

Al sentarse

- Ponga la andadera sobre piso firme antes de sentar al niño.
- No mueva la andadera cuando el niño esté a punto de sentarse. Manténgala quieta.
- Ayude a que se siente despacio y con control, sin dejarse caer.
- El respaldo es solo un apoyo para la espalda: no aguanta todo el peso del cuerpo. Evite que se incline hacia atrás estando sentado.



ADVERTENCIA

Si el niño se deja caer en el asiento o se inclina hacia atrás estando sentado, puede caerse.



ATENCIÓN

No meta las manos en los dobleces y uniones del marco: se pueden prensar los dedos.



ATENCIÓN

No use ácidos, cloro ni otros químicos fuertes para limpiarla: dañan el marco y las piezas.

4

Conozca su andadera

Esta andadera ayuda a niños con lesiones o parálisis que afectan su movilidad a caminar erguidos. Los rodillos acolchados de pecho y cadera le quitan presión a la columna, y el cojín con arnés le permite descansar sin salir de la andadera.



Partes principales

1 Almohadillas de espuma para el cuerpo

2 Agarre de esponja

3 Cojín protector del asiento

4 Poste para suero

De qué está hecha

- Marco de aleación de aluminio.

- Empuñaduras de PVC.
- Asiento de plástico con cojín protector y arnés de entrepierna.
- Seis ruedas giratorias, cada una con su seguro.

5 Armado

La andadera llega en piezas y hay que armarla antes de usarla. Arme todo antes de acercar al niño. Si alguna pieza no embona, no la fuerce: escribanos y le ayudamos.

1

Arme la base

Saque el marco de soporte inferior y conecte sus piezas.



2

Ruedas para caminar

Coloque las ruedas para caminar en la base.



3

Ruedas antivuelco


Coloque las ruedas antivuelco.



4

Tubo de equilibrio

Instale el tubo de equilibrio.

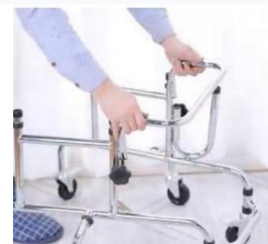

5

Tubo protector del pecho

Conecte el tubo protector del pecho con sus rodillos acolchados.



6

Una los soportes

Conecte el soporte superior con el soporte inferior.



7

Hebilla fija

Instale la hebilla fija y apriétela.



8

Correas del soporte


Coloque las correas del soporte (el arnés).



9

Revise todo

Así se ve la andadera armada. Revise que tornillos, hebillas y ruedas estén firmes.

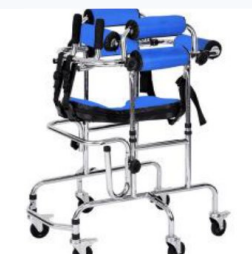

Ajústela a la estatura del niño

La andadera es para niños de 80 a 120 cm de estatura. La altura se ajusta de 70 a 90 cm y el ancho del soporte de pecho de 30 a 43 cm.

- Ajuste la altura y el soporte de pecho con ayuda de un familiar o de una enfermera especializada.
- Después de ajustar, revise que todas las piezas queden intactas y bien apretadas.



CONSEJO DE DON ANDY

Ajuste la andadera con el niño de pie dentro de ella: así queda a su medida.

Para subir o bajar al niño

1

Ponga el seguro de las ruedas

Bloquee las ruedas con la andadera sobre piso firme y plano.

2

Colóquelo con calma

Acomode al niño entre los rodillos y abroche el arnés.

3

Quite el seguro para caminar

Libere las ruedas solo cuando el niño esté bien sujeto y usted a su lado.

Para caminar

- Camine junto al niño en piso firme y plano, sin prisa.
- Evite que recargue el cuerpo de lado.

- Para descansar, ponga el seguro de las ruedas y ayúdele a sentarse despacio.
- Celebre cada paso: practicar un poco cada día, siempre acompañado, ayuda a ganar confianza.

7

Cuidado y mantenimiento

Limpieza

Limpie la andadera con un paño húmedo o una esponja, agua tibia y jabón. Si lo necesita, puede usar un limpiador antibacteriano de uso doméstico.



ATENCIÓN

No deje restos de limpiador en las empuñaduras ni en el asiento: se ponen resbalosos. No use fibras ni raspadores, porque dañan la pintura.

Revisiones

Cuándo	Qué revisar
Cada semana	Que el marco y las ruedas no tengan tornillos, tuercas ni perillas flojos.
De vez en cuando	El desgaste de las empuñaduras, que los tornillos del marco estén firmes y que el asiento no tenga grietas.
Una vez al año	Revisión completa, limpieza y lubricación de las piezas que se mueven.



ADVERTENCIA

Si alguna pieza está floja o no se siente segura, deje de usar la andadera y escríbanos por WhatsApp antes de volver a usarla.

Característica	Valor
Tipo	Andadera de rehabilitación infantil con arnés
Capacidad máxima	75 kg
Peso de la andadera	9.5 kg
Estatura recomendada	80 – 120 cm
Altura total	70 – 90 cm (ajustable)
Largo × ancho	75 × 75 cm
Soporte de pecho	30 – 43 cm de ancho (ajustable) · 43 cm de profundidad
Marco	Aleación de aluminio
Ruedas	6 ruedas giratorias con seguro individual
Soportes	Rodillos acolchados de pecho y cadera
Asiento	Cojín protector con arnés de entrepierna
Empuñaduras	PVC ergonómico
Accesorios	Poste para suero integrado
Color	Plateado con azul

Garantía, devoluciones y soporte

Bajo uso y mantenimiento normales, ANDAFACIL le ofrece **90 días de garantía** desde la fecha de compra contra **defectos de fabricación**. Conserve su factura o comprobante: lo necesitaremos para cualquier revisión.

Si registra su compra dentro de los 3 días después de recibirla, suma **30 días más** (120 días en total).

	Detalle
Cubre	Defectos de fabricación y de materiales, componentes eléctricos y estructura, con uso normal.
No cubre	Mal uso, golpes, caídas, sobrecarga, agua o clima, desgaste normal (llantas, cojines, cubiertas), modificaciones no autorizadas ni desastres naturales.
Cómo reclamar	Escríbanos por WhatsApp o envíe un reporte de garantía con su número de pedido, fotos o video del problema y, si aplica, qué luz parpadea.



Garantía y soporte: escriba a Marla por WhatsApp

Con su número de pedido y fotos o video lo resolvemos más rápido. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafnp2024x1



**Registre su compra
(+30 días de garantía)**

s.andafacil.com/garantiaext



**¿Algo dejó de funcionar?
Reporte de garantía**

s.andafacil.com/ticketegarantia



**¿Dudas de uso o ajustes?
Reporte de soporte**

s.andafacil.com/ticketesoporte



**Todo sobre garantía
y soporte**

s.andafacil.com/garantiasoporte

Devoluciones

¿Cambió de opinión? Tiene **7 días desde que recibe su pedido** para solicitar una devolución, con el producto en buen estado y, de ser posible, en su empaque original. El envío de regreso suele ir por cuenta del cliente, salvo que le indiquemos otra cosa.



**Solicitar una
devolución**

s.andafacil.com/devolucion



**Garantía extendida
TotalCare**

s.andafacil.com/andafaciltotalcare

Al escribirnos, incluya su número de pedido, el SKU, el número de serie (etiqueta en el chasis o bajo el asiento), una descripción breve y fotos o video.



ANDAFACIL

IMPORTADO A MÉXICO POR: EUREKA MOMENTS FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: EMF230825V83

Calle Baja California No. Ext. 279, Int. 303, Col. Hipódromo, Cuauhtémoc, CP 06100, Ciudad de México, México

www.andafacil.com · contacto@andafacil.com · WhatsApp +52 1 55 9990 2396

¡Gracias por su compra!

¿Le está sirviendo su andadera? Cuéntenos su experiencia: su opinión ayuda a otras familias a decidir.



Visite la página o escanee el código QR
www.andafacil.com/review



¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp

Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafnp2024x1



Movilidad sin límites