



Manual de usuario

Le explicamos cómo abrir, manejar, cargar y cuidar su silla, paso a paso.

TU NUEVO PRODUCTO

**Robooter E60 GT – Silla Eléctrica
Todo Terreno**

SKU: AF-RE60GT



Lea este manual antes del primer uso y consérvelo.

Movilidad sin límites

Le damos la bienvenida



¡Hola! Soy **Don Andy**, de la familia ANDAFACIL. Lo acompaño en este manual: cuando vea mi cara, es un consejo mío para que disfrute su silla.

Gracias por elegir ANDAFACIL. Este manual le explica, paso a paso, cómo abrir, manejar, cargar y cuidar su silla. Léalo con calma antes del primer uso y téngalo a la mano. Si alguien le ayuda, compártale también este manual.

150 kg

capacidad

25 km

por carga

8–10 km/h

velocidad

12"

llantas todo terreno

¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp



Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafre60gt



Contenido

Revise la caja	3	Primeros pasos	4
Su seguridad primero	5	Conozca su silla	8
Abrir y plegar	10	Cómo manejarla	12
Ajustes	16	Batería y carga	17
Viajar con su silla	20	Cuidado y mantenimiento	21
Avisos y solución de problemas	22	Especificaciones	24
Garantía, devoluciones y soporte	26		

1

Revise la caja

Antes de armar, revise que venga todo:

- ☐ Silla de ruedas eléctrica Robooter E60 GT con batería
- ☐ Juego de herramientas y accesorios: llave hexagonal, llave de tuercas y tornillos
- ☐ Cargador
- ☐ Este manual



CONSEJO DE DON ANDY

Si falta algo o llegó dañado, avísenos dentro de los primeros 7 días por WhatsApp o con un reporte de soporte.

Las fotos de este manual pueden variar un poco respecto a su silla por mejoras del producto.

Tres tipos de avisos en este manual



ADVERTENCIA

Puede causar una lesión o un daño grave.



ATENCIÓN

Cuida su producto y que funcione bien.




CONSEJO DE DON ANDY

Le ayuda a aprovechar mejor su producto.

2 Primeros pasos

Lo esencial para empezar. Los detalles de cada paso vienen en los capítulos siguientes.

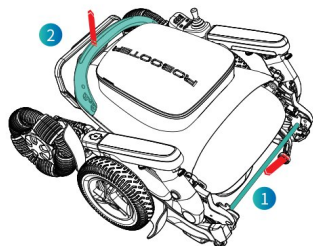

1 Ábrala

Presione el interruptor de plegado y jale el descansabrazos hacia arriba.

2

2 Cargue la batería

Con el cargador incluido, en el puerto bajo el control. Carguela completa antes de salir.

3

3 Súbase y abróchese

Con la silla apagada, súbase de lado y abroche el cinturón.



4 Encienda y desbloquee

Un toque la prende, otro la desbloquea. Empiece en marcha 1; al soltar la palanca, frena.



Véalo en video: 1 minuto

Escanee el código con la cámara de su celular y vea a Alex explicar lo esencial de su silla.

s.andafacil.com/videoafre60gtv3



Lea estas indicaciones antes de usar la silla por primera vez. Si un familiar o cuidador le ayuda, compártaselas también. La Robooter E60 GT es para una sola persona de hasta 150 kg.



ADVERTENCIA

Una sola persona, máximo 150 kg. No lleve pasajeros, no se pare sobre la silla y no la use como asiento dentro de un vehículo en movimiento.

Antes de la primera salida

- Batería cargada y con sus dos seguros cerrados.
- Silla completamente abierta.
- Tornillos, conectores y piezas desmontables bien puestos y apretados.
- El control responde: encendido, luz, claxon y palanca.
- Cinturón de seguridad abrochado.
- Practique en un lugar plano y firme, sin obstáculos ni gente alrededor, hasta dominar avanzar, frenar y dar vuelta.

Al manejar

- Siéntese bien antes de usar cualquier función, con los pies sobre los reposapiés.
- Circule por banquetas y zonas peatonales, despacio. Nunca por carriles de autos.
- Al entrar a un lugar o dar vuelta, vaya despacio: en lugares difíciles use la velocidad más baja.
- Evite el zigzag, las vueltas bruscas y la reversa rápida.
- No maneje la silla con la app del celular: la app solo sirve para acercar la silla y hacer ajustes.
- La velocidad cambia según la presión de las llantas, el piso y la carga de la batería.

Pendientes, obstáculos y piso

- No suba ni baje pendientes de más de 9° (la silla está probada con 150 kg en pendientes de hasta 9°).
- No retroceda en pendientes de más de 9°. En reversa en una pendiente, vaya muy despacio.
- En pendiente, al soltar la palanca la silla puede rodar un poco antes de que el freno actúe. Tenga cuidado.
- El fabricante pide no intentar cruzar obstáculos ni zanjas de 4 cm o más.
- No maneje sobre agua, aceite, hielo u otras superficies resbalosas.
- Nunca use la silla en escaleras eléctricas.

Frenado y paro de emergencia

Para frenar, siéntese bien, sujétese firme y suelte la palanca: la silla se detiene en segundos. El freno electromagnético no es instantáneo; actúa cuando la rueda ya giró un poco.



ADVERTENCIA

En una emergencia o si la silla se mueve sola, presione el botón de encendido para detenerla. Úselo solo en emergencias: hacerlo seguido puede dañar el motor.

Lluvia y clima

- La silla pasó la prueba de clima ISO 7176-9: le da tiempo de llegar a un lugar techado si empieza a llover.
- No la use durante tormentas eléctricas, no la deje bajo lluvia fuerte ni mucho tiempo en lugares húmedos.
- No la lave con autolavado ni con agua a presión.
- Úsela entre -10 °C y 50 °C.



ATENCIÓN

Esta silla no es adecuada para personas que, de forma temporal o permanente, pierden la atención o el juicio. No la preste a menores de edad ni a personas que no puedan manejarla con seguridad.


Otros cuidados

- No maneje si se siente mal, si su vista está muy disminuida o si tomó alcohol o medicamentos que afecten su juicio.
- No se suba sin que la silla esté frenada (apagada).
- No desarme el motor ni el control, y no corte ni modifique los cables. Las piezas no originales o las modificaciones anulan la garantía.
- Use solo la batería y el cargador originales.
- Aléjese de transmisores de radio potentes.

4


Conozca su silla

Su Robooter E60 GT es una silla de ruedas eléctrica plegable con motores sin escobillas, llantas de 12" y ruedas delanteras omnidireccionales. Se maneja con la palanca del control y tiene un modo manual para que alguien la empuje.

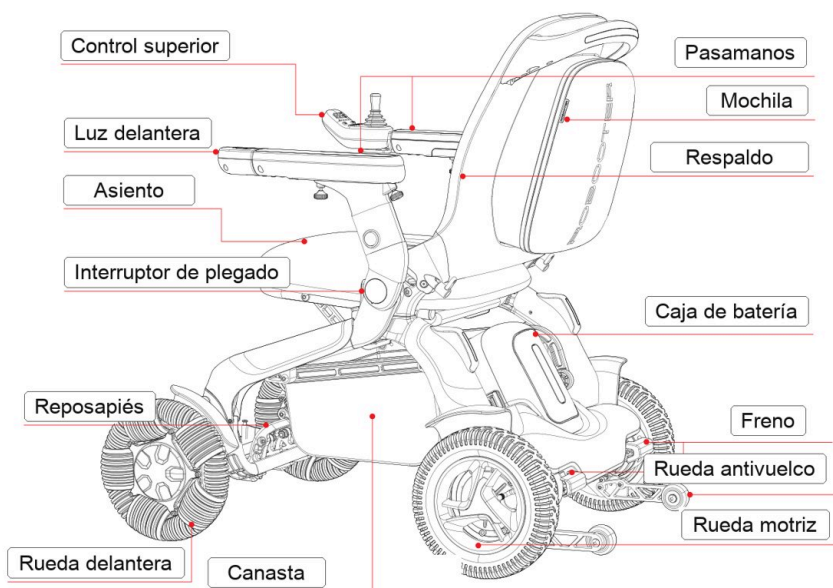

Partes principales de la Robooter E60 GT

El control

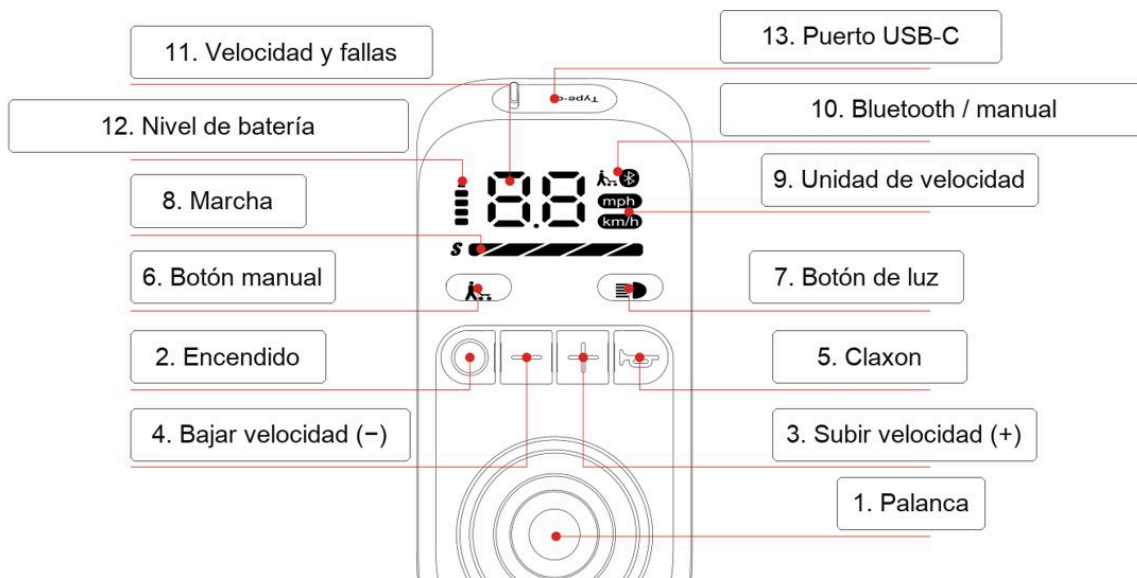

Botones y pantalla del control

N.º	Parte	Para qué sirve
1	Palanca	Muévala hacia donde quiere ir: controla la dirección y la velocidad. Al soltarla, frena.
2	Encendido	Toque corto: enciende. Mantenga 3 segundos: apaga. Al encender queda bloqueada: otro toque corto la desbloquea (y otro la vuelve a bloquear).
3 y 4	Subir / bajar velocidad	5 marchas. La 1 es la más lenta.
5	Claxon	Suena una vez con cada toque.
6	Botón manual	Activa o cancela el modo manual. Mantenido 3 segundos: modo principiante.
7	Botón de luz	Enciende y apaga la luz delantera. Mantenido 3 segundos: modo mejorado.
8	Marcha	La marcha en que va.
9	Unidad	km/h o mph: mantenga «+» y «-» juntos 3 segundos para cambiar.
10	Bluetooth / manual	Se encienden con el Bluetooth conectado o el modo manual activo.
11	Velocidad y fallas	Muestra la velocidad. Si hay una falla, muestra su código.
12	Nivel de batería	5 barras: la carga que le queda.
13	Puerto USB-C	Para cargar su celular (salida 3.6 a 12 V, 2.9 A).
14 y 15	Luz y puerto de carga	Debajo del control: la luz delantera y el puerto donde se conecta el cargador.

Luz del descansabrazos

Toque el interruptor táctil que está debajo del descansabrazos, del lado del control, para encender o apagar la luz del descansabrazos.




CONSEJO DE DON ANDY

Si no usa la silla un rato, se apaga sola para ahorrar batería. Solo vuelva a encenderla.

5 Abrir y plegar

La E60 GT se abre y se pliega a mano. Plegada mide 85.5 × 64 × 52.5 cm. Es pesada: hágalo entre dos personas si puede.

Para abrirla

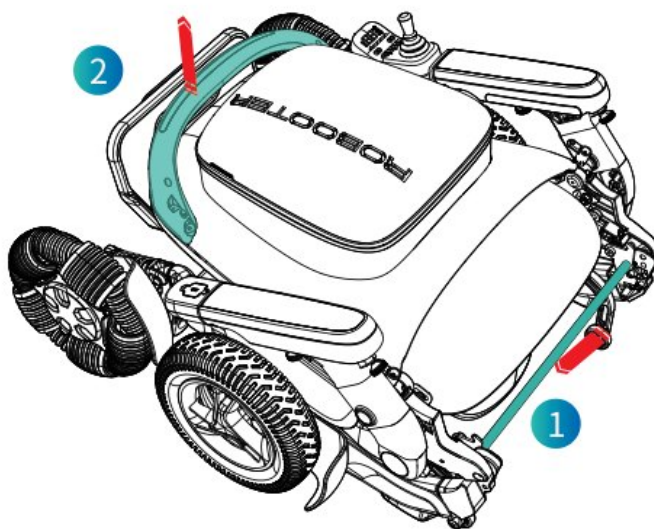

Interruptor de plegado (1) y descansabrazos (2)

1

Presione el interruptor de plegado


Con una mano (posición 1).

2

Jale el descansabrazos hacia arriba

Con la otra mano (posición 2), hasta que la silla quede abierta por completo.

Para plegarla

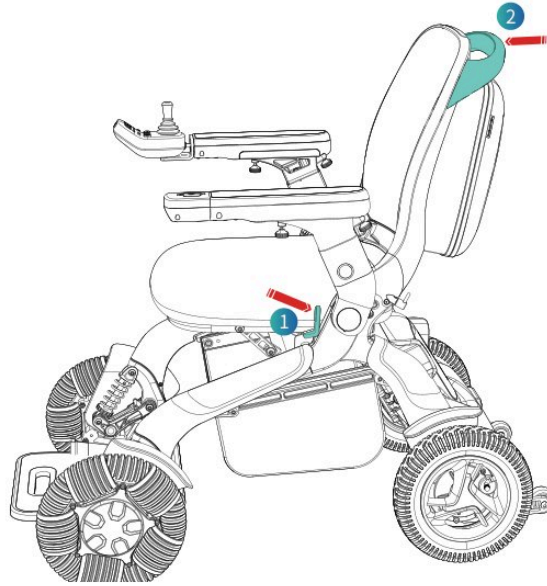

Interruptor de plegado (1) y descansabrazos (2)

1

Vacíe la canasta

Saque lo que lleve en la canasta para que no se dañe.

2

Presione el interruptor de plegado

Con una mano (posición 1).

3


Jale el descansabrazos hacia arriba

Con la otra mano (posición 2), hasta que la silla quede plegada por completo.



ATENCIÓN

Al plegar, el respaldo no se traba en su primera posición: use la segunda o una mayor. En la segunda posición la silla cabe en su caja.

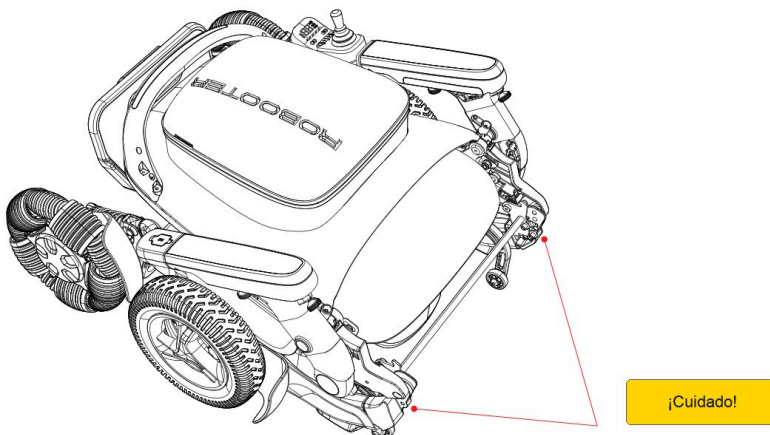

Puntos donde se pueden atrapar los dedos



ADVERTENCIA

Al abrir o plegar, no toque las zonas marcadas: se pueden atrapar los dedos.

6

Cómo manejarla

Para subirse (de lado)

1

Apague la silla

Revise que esté apagada: así queda frenada.

2

Levante el descansabrazos

Del lado por donde se va a pasar.

3

Levante el reposapiés

Sujételo de su manija.

4

Siéntese

Bien atrás en el asiento.

5

Acomode y abróchese

Gire el descansabrazos hacia adelante, baje el reposapiés y abroche el cinturón de seguridad.

Para manejar

1

Encienda

Con la palanca al centro, dé un toque corto al botón de encendido.

2

Desbloquee

Al encender, la silla queda bloqueada. Otro toque corto la desbloquea.

3

Elija la velocidad

Con «-» y «+» cambia entre 5 marchas. Para empezar, use la 1.

4

Avance

Empuje la palanca con suavidad hacia donde quiere ir. Hacia atrás, retrocede despacio.

5

Frene

Suelte la palanca: la silla se detiene.

6

Apague

Al terminar, o antes de bajarse, mantenga el botón de encendido 3 segundos.

Modos de manejo

Modo	Cómo se activa	Para qué
Principiante	Mantenga el botón manual 3 segundos (igual para salir)	Solo marchas 1 y 2: ideal para aprender.
Normal	Es el modo de siempre	Hasta 8 km/h.
Mejorado	Mantenga el botón de luz 3 segundos (igual para regresar)	Más velocidad, hasta 10 km/h, y más fuerza para salir de un lugar difícil. Solo por poco tiempo.
Manual	Un toque al botón manual (otro toque lo cancela)	Rueda libre: alguien puede empujar la silla sin motor.



ATENCIÓN

Use el modo mejorado solo un momento, por ejemplo para salir de un paso difícil, y regrese al modo normal en cuanto termine. Active el modo manual solo en piso plano.

Control crucero

Con la silla desbloqueada, mantenga «+» (el ícono se pone verde). Si en 5 segundos mueve la palanca hacia adelante, la silla avanza sola a la velocidad máxima de la marcha actual. Para dar vuelta, mueva la palanca a los lados. Para salir, jale la palanca hacia atrás.



ADVERTENCIA

En control crucero la silla NO se detiene al soltar la palanca. Para frenar, jale la palanca hacia atrás. Úselo solo en espacios abiertos y despejados.

Avisos de voz

La silla le habla: avisa al bloquear y desbloquear, al entrar y salir del modo principiante y del modo de rueda libre, al cargar, cuando la batería baja de 20 % («Batería baja, cargue por favor») y cuando detecta una falla («Protección de manejo», «Protección de la máquina» o «Protección de la palanca»).

La app Robooter (opcional)

No la necesita para manejar, pero con ella puede ver la batería, cambiar la marcha, activar el modo mejorado, acercar la silla con el control remoto, ajustar el crucero, la memoria de marcha, el encendido remoto, los avisos de voz (volumen alto, medio o bajo) y actualizar el sistema.

1

Descárguela

Busque «Robooter» en Google Play (Android) o en la App Store (iPhone).

2

Encienda la silla

Y desbloquéela desde el control.

3

Conéctese

En la app toque buscar dispositivos, permita el Bluetooth y la ubicación, y elija su silla (por ejemplo «BBR-...»). Para identificarla, con la silla bloqueada presione a la vez el claxon y el botón de luz: la pantalla muestra los dos últimos dígitos de su nombre.

!

ADVERTENCIA

Nunca maneje con la app con alguien sentado en la silla. El control remoto de la app es solo para acercar la silla vacía.




CONSEJO DE DON ANDY

Si usted acompaña: las primeras veces active el modo principiante y practiquen juntos en un lugar plano y amplio.

Según la versión de su silla, el respaldo y los descansabrazos pueden ser fijos o ajustables.

Apague la silla antes de hacer cualquier ajuste.


Ancho de los descansabrazos

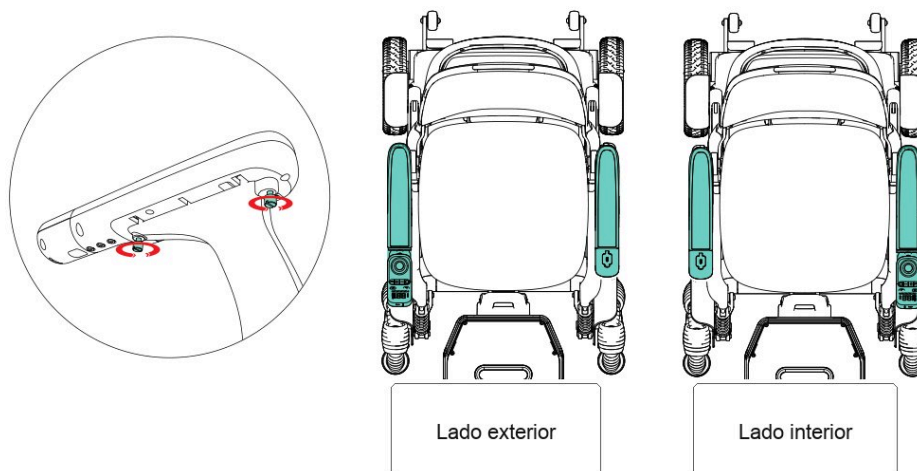

Perillas debajo del descansabrazos: lado exterior e interior

Afloje las dos perillas que están debajo del descansabrazos, muévelo a la posición que le acomode y vuelva a apretarlas.

Inclinación del respaldo

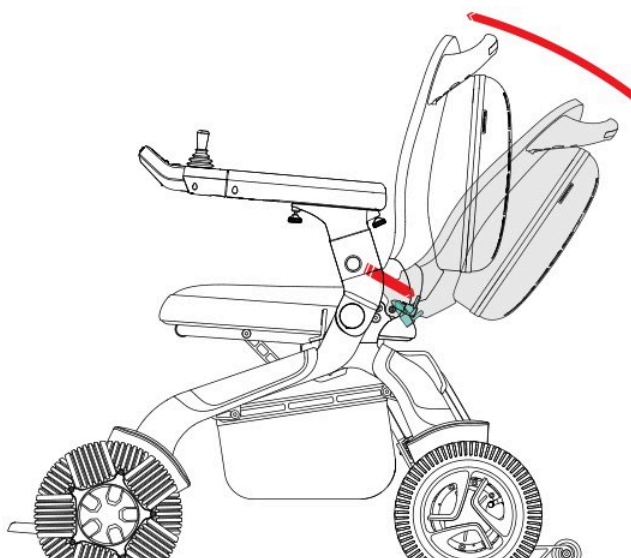

Jale las manijas de pasador hacia atrás para inclinar el respaldo

Jale hacia atrás, en vertical, las dos manijas de pasador, lleve el respaldo a la posición deseada y vuelva a trabar las manijas.

El control del lado izquierdo o más adelante

El control se puede pasar al otro descansabrazos o recorrer una posición. Necesita la llave hexagonal incluida:

1

Apague la silla

Siempre antes de mover el control.

2

Quite los tornillos

Con la llave hexagonal, retire los tres tornillos Allen debajo del control.

3

Cambie o recorra el control

Para cambiarlo de lado, abra el arnés que une los controles, intercámbielos, vuelva a conectar el arnés y meta cada uno en su ranura. Para recorrerlo, muévelo una posición hacia afuera.

4

Apriete los tornillos


Con la llave hexagonal.

8

Batería y carga

Su silla usa una batería de litio desmontable de 20 Ah: recorre hasta 25 km por carga. La distancia real depende del peso de quien la usa, del terreno (pasto, grava), de las pendientes, de la temperatura y de la edad de la batería.

Quitar la batería

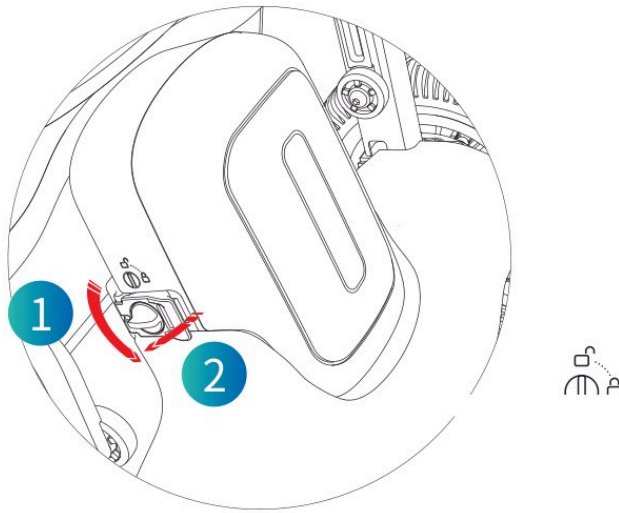

Gire la perilla a la posición de desbloqueo y abra el seguro

Abra el seguro izquierdo

1

Gire a mano la perilla izquierda del compartimento hasta la posición de desbloqueo (vertical) y abra el seguro.

Abra el seguro derecho


2

Haga lo mismo con la perilla y el seguro del lado derecho.

Saque la batería

3

Retírela en la dirección que indica la flecha.

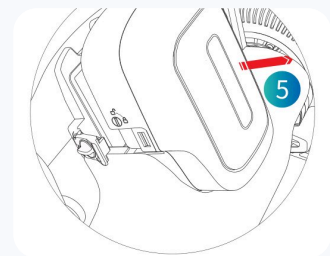

Poner la batería

Colóquela


1

Meta la batería en su ranura, en la dirección indicada.



Cierre los seguros

2

Cierre el seguro derecho y gire su perilla a la posición de bloqueo (horizontal); luego haga lo mismo del lado izquierdo.

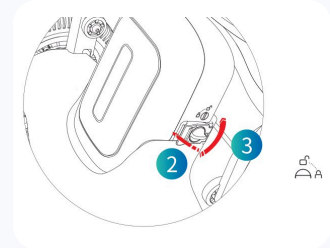

Cómo cargarla

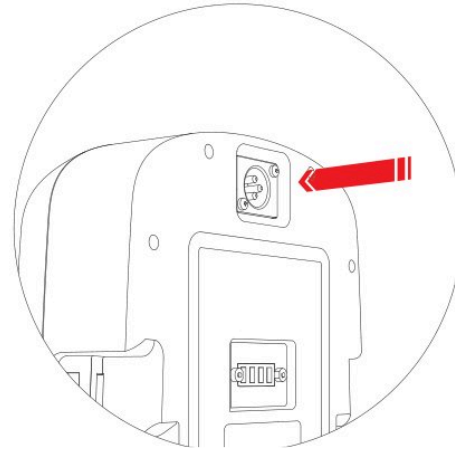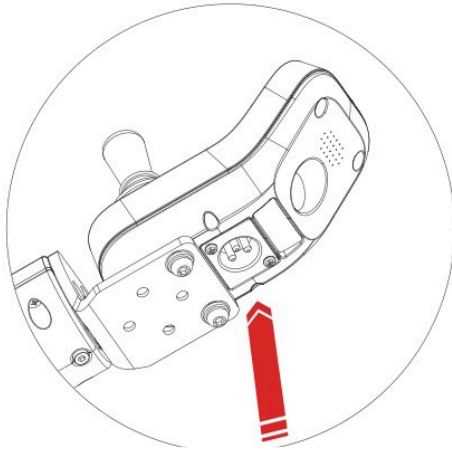

Cargar en el control (izquierda) o con la batería fuera (derecha)

- En la silla: conecte el cargador al puerto de carga que está debajo del control.
- Fuera de la silla: quite la batería y conecte el cargador directo a su puerto de carga.
- Mientras carga, las 5 barras se encienden una tras otra y la palanca no responde: la silla no se puede manejar mientras se carga.
- Al desconectar el cargador, la silla avisa «Carga completa».
- Cargue la batería por completo antes del primer paseo.



ADVERTENCIA

Use solo el cargador incluido (cargador de litio, entrada 100 a 240 V, salida 29.4 V · 4 A) y solo baterías originales. Nunca use baterías de plomo-ácido ni de otras marcas.



CONSEJO DE DON ANDY

Si no va a usar la silla por un tiempo, guárdela con la batería llena y apagada. Si pasa más de un mes guardada, cárguela por completo antes de seguir guardándola o de usarla.

9 Viajar con su silla

Plegada, su silla mide 85.5 × 64 × 52.5 cm. Sin batería, la pieza más pesada pesa 34 kg: para subirla a la cajuela, quite primero la batería y pida ayuda.

1

Apáguela y quite la batería

Así pesa menos y la batería viaja aparte.

2

Pliéguela

Siga los pasos de «Abrir y plegar».

3

Acomódela

En la cajuela, bien sujeta y sin peso encima.

!

ADVERTENCIA

No use la silla como asiento dentro de un vehículo en movimiento: la persona debe pasarse al asiento del auto.

¿Y en avión?

Esta silla no está pensada para viajar en avión: su batería de litio de 20 Ah o más supera los 300 Wh que suelen aceptar las aerolíneas. Si necesita viajar en avión, pregúntenos por un modelo de viaje.

Para transportarla o guardarla: de -20°C a 60°C , humedad hasta 95 %, en un lugar ventilado. No la deje mucho tiempo al sol ni cerca de fuentes de calor.



CONSEJO DE DON ANDY

Para viajes en carretera, lleve el cargador y salga con la batería cargada.

10

Cuidado y mantenimiento

Quien usa la silla, o quien le cuida, se encarga de limpiarla y revisarla. El fabricante recomienda una revisión general cada 6 meses.



ADVERTENCIA

Apague la silla antes de limpiarla o revisarla.

- Limpie la silla y el control con una toalla limpia. No use agua a presión.
- Cada semana o cada mes, según lo que la use: revise que tornillos y tuercas no estén flojos, sueltos ni oxidados.
- Revise que las partes que se pliegan no se atoren ni estén sueltas.
- Revise el desgaste de las llantas y su presión (220 a 240 kPa).
- Si se mojó con la lluvia o la humedad, séquela lo mejor posible para que no se oxide.
- En días de calor, no la deje al sol.

La vida útil de la silla es de 5 años a partir de la entrega; la fecha de fabricación está en la etiqueta del producto. Pasado ese tiempo, no la use. Al final de su vida útil, llévela a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos; no la tire con la basura de la casa.

11

Avisos y solución de problemas

Si la silla detecta una falla, la pantalla muestra un código y la silla puede dar un aviso de voz. Anote el código: nos ayuda a resolverlo más rápido.

Código	Qué significa	Qué hacer
24	La palanca no estaba al centro al encender	Suelte la palanca, apague y vuelva a encender
40 / 41	El freno del motor izquierdo (40) o derecho (41) está liberado	Regrese la palanca del freno de ese motor a su lugar para cerrar el freno
80	Voltaje bajo: el motor no puede andar	Cargue la batería. Si sigue, escríbanos
94 / 95 / 96	Motor derecho, izquierdo o ambos atorados	Revise que nada atore las ruedas. Si sigue, escríbanos
E1	Falla de botón	Escríbanos
20 / 21 / 22 / 23	Falla de conexión de la palanca	Escríbanos
E6	Falla de comunicación CAN: la palanca no controla la silla	Escríbanos
81 / 82	Falla del sensor del motor derecho (81) o izquierdo (82)	Escríbanos
84 / 85 / 86 / 87	Cortocircuito en el control de un motor	Escríbanos
88	Falla de precarga	Escríbanos
90	Voltaje alto al encender: la silla queda bloqueada	Escríbanos
91 / 92 / 93	Motor izquierdo, derecho o ambos desconectados	Escríbanos

Si algo no funciona

Lo que pasa	Qué revisar
No enciende	Que la batería esté cargada y con los dos seguros cerrados. Pruebe cargándola.
Enciende pero no avanza	Que la haya desbloqueado (toque corto al encendido), que el cargador esté desconectado y que no esté en modo manual.
Solo anda despacio	Puede estar en modo principiante: mantenga el botón manual 3 segundos para salir.
Se apagó sola	Pasó un rato sin uso o la batería se agotó. Enciéndala o cárguela.
Recorre mucho menos que antes	Presión de las llantas y carga completa. Si sigue, escríbanos: la batería puede necesitar revisión.
Ruidos raros o se mueve sola	Apáguela de inmediato y escríbanos.



ATENCIÓN

No desarme la silla. Escríbanos por WhatsApp con su número de pedido, el código de la pantalla y una foto o video de lo que pasa.

Característica	Valor
Tipo	Silla de ruedas eléctrica plegable · clase B
Modelo del fabricante	Robooter serie E60 · BBR-E60-03 / -04 / -07 / -08 (llantas de 12")
Capacidad máxima	150 kg · una sola persona
Peso	36.8 kg con batería · 34 kg sin batería
Batería	Litio de 20 Ah (2.8 kg), desmontable
Autonomía	Hasta 25 km por carga
Cargador	Litio · entrada 100 a 240 V, 50/60 Hz, 2.5 A · salida 29.4 V · 4 A
Motores	Sin escobillas, con reductor · freno electromagnético
Velocidad máxima	8 km/h modo normal · 10 km/h modo mejorado · 5 marchas
Pendiente máxima al manejar	9° (probada con 150 kg)
Estabilidad estática	15° de frente · 9° de lado
Obstáculo	Prueba del fabricante: 8 cm · en el día a día no cruce obstáculos ni zanjas de 4 cm o más
Distancia de frenado	1.02 m desde la velocidad máxima
Abierta (largo × ancho × alto)	105.2 × 64 × 95.6 cm
Plegada (largo × ancho × alto)	85.5 × 64 × 52.5 cm
Asiento	42 cm de ancho × 43 cm de fondo · 51 cm al piso · inclinación 4.5°
Respaldo	46 cm de alto · fijo a 18° o reclinable de 8° a 38°, según versión

Característica	Valor
Separación entre descansabrazos	48 cm fija, o ajustable de 45.5 a 51.5 cm, según versión
Reposapiés al asiento	41.5 cm
Radio de giro	85 cm
Llantas	12" delanteras (omnidireccionales) y traseras · 220 a 240 kPa
Control	Pantalla · 5 marchas · luz · claxon · crucero · modo principiante · modo mejorado · modo manual · USB-C · Bluetooth y app Robooter
Uso	De -10 °C a 50 °C · humedad 20 a 95 %
Transporte y almacenamiento	De -20 °C a 60 °C · humedad hasta 95 %
Vida útil	5 años desde la entrega
Fabricante	Shanghai Bangbang Robotics Co., Ltd. (Robooter)

Su Robooter tiene la **garantía del fabricante**, que ANDAFACIL atiende en México, contra **defectos de fabricación** con uso y mantenimiento normales, desde la fecha de compra. Conserve su factura o comprobante.

Parte	Garantía
Marco y estructura	12 meses (fisuras o desprendimientos de soldadura, fracturas)
Partes eléctricas y mecánicas principales	12 meses (motor, cargador y cable, controles, plegado, suspensión, chasis, respaldo, reposabrazos)
Batería	6 meses (voltaje anormal, no carga, capacidad menor al 60 % con uso normal)
Accesorios y partes secundarias	18 meses (ruedas omnidireccionales, rines, luces, joystick, freno, guardas, correas, clips, partes blandas)
Consumibles	6 meses (llantas, fundas de reposabrazos, cojines, salpicaderas, cinturón, botones)
Sin garantía	Cableado, contactos, partes decorativas exteriores, regalos y desgaste normal

Detalle	
Cubre	Defectos de fabricación y de materiales, componentes eléctricos y estructura, con uso normal.
No cubre	Mal uso, golpes, caídas, sobrecarga, agua o clima, desgaste normal (llantas, cojines, cubiertas), modificaciones no autorizadas ni desastres naturales.
Cómo reclamar	Escribanos por WhatsApp o envíe un reporte de garantía con su número de pedido, fotos o video del problema y, si aplica, qué luz parpadea.



Garantía y soporte: escriba a Marla por WhatsApp

Con su número de pedido y fotos o video lo resolvemos más rápido. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafre60gt



**Registre su compra
(+30 días de garantía)**

s.andafacil.com/garantiaext



**¿Algo dejó de funcionar?
Reporte de garantía**

s.andafacil.com/ticketegarantia



**¿Dudas de uso o ajustes?
Reporte de soporte**

s.andafacil.com/ticketesoporte



**Todo sobre garantía
y soporte**

s.andafacil.com/garantiasoporte

Devoluciones

¿Cambió de opinión? Tiene **7 días desde que recibe su pedido** para solicitar una devolución, con el producto en buen estado y, de ser posible, en su empaque original. El envío de regreso suele ir por cuenta del cliente, salvo que le indiquemos otra cosa.



**Solicitar una
devolución**

s.andafacil.com/devolucion



**Garantía extendida
TotalCare**

s.andafacil.com/andafaciltotalcare

Al escribirnos, incluya su número de pedido, el SKU, el número de serie (etiqueta en el chasis o bajo el asiento), una descripción breve y fotos o video.



ANDAFACIL

IMPORTADO A MÉXICO POR: EUREKA MOMENTS FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: EMF230825V83

Calle Baja California No. Ext. 279, Int. 303, Col. Hipódromo, Cuauhtémoc, CP 06100, Ciudad de México, México

www.andafacil.com · contacto@andafacil.com · WhatsApp +52 1 55 9990 2396

¡Gracias por su compra!

¿Le está sirviendo su silla? Cuéntenos su experiencia: su opinión ayuda a otras familias a decidir.



Visite la página o escanee el código QR
www.andafacil.com/review



¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp

Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafre60gt



Movilidad sin límites