



Manual de usuario

Le explicamos cómo armar, ajustar, usar y cuidar su andadera, paso a paso.

TU NUEVO PRODUCTO

Andafacil® RehabPro Andadera Vertical

SKU: AF-RPAV-X1



Lea este manual antes del primer uso y consérvelo.

Movilidad sin límites

Le damos la bienvenida



¡Hola! Soy **Don Andy**, de la familia ANDAFACIL. Lo acompaño en este manual: cuando vea mi cara, es un consejo mío para que disfrute su andadera.

Gracias por elegir ANDAFACIL. Este manual le explica, paso a paso, cómo armar, ajustar, usar y cuidar su andadera. Léalo con calma antes del primer uso y téngalo a la mano. Si alguien le ayuda, compártale también este manual.

100 kg

capacidad máxima

100–200

cm de estatura

58–130

cm de altura del marco

31–34 kg

peso de la andadera

¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp



Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafpavx1



Contenido

Revise la caja	3	Primeros pasos	4
Su seguridad primero	5	Conozca su andadera	6
Armado	7	Ajustes y uso	12
Plegar y guardar	13	Cuidado y mantenimiento	14
Especificaciones	15	Garantía, devoluciones y soporte	16

1

Revise la caja

Antes de armar, revise que venga todo:

- | | |
|--|---|
| ☐ Marco de la andadera (plegado) | ☐ 6 tornillos de perilla |
| ☐ 2 ruedas traseras con frenos | ☐ Charola de apoyo |
| ☐ 2 ruedas delanteras universales | ☐ Este manual |
| ☐ Reposapiés (soporte de piernas) | |



CONSEJO DE DON ANDY

Si falta algo o llegó dañado, avísenos dentro de los primeros 7 días por WhatsApp o con un reporte de soporte.

Las fotos de este manual pueden variar un poco respecto a su andadera por mejoras del producto.

Tres tipos de avisos en este manual



ADVERTENCIA

Puede causar una lesión o un daño grave.



ATENCIÓN

Cuida su producto y que funcione bien.



CONSEJO DE DON ANDY

Le ayuda a aprovechar mejor su producto.

2

Primeros pasos

Lo esencial para empezar. Los detalles de cada paso vienen en los capítulos siguientes.



1 Revise las piezas

Marco, 2 ruedas traseras con freno, 2 ruedas delanteras, reposapiés y 6 tornillos de perilla.

2

2 Ármela

Siga el capítulo «Armado»: ruedas, manubrio, freno, soporte lumbar y reposapiés. Necesita una llave.



3 Ajuste la altura

Presione los dos interruptores de los pistones, suba o baje, y suéltelos para fijar.

4

4 Siempre acompañado

Úsela solo en piso plano y con otra persona a su lado.



Véalo en video: 1 minuto

Escanee el código con la cámara de su celular y vea a Alex explicar lo esencial de su andadera.

s.andafacil.com/videoafrpavx1v2



Lea estas indicaciones antes de usar la andadera por primera vez. Compártalas con la persona que le va a acompañar.

**ADVERTENCIA**

Durante la rehabilitación, use la andadera siempre con supervisión y con otra persona a su lado.

**ADVERTENCIA**

La andadera es para una persona de hasta 100 kg. No exceda este peso.

- Úsela solo en piso plano.
- No la use en pendientes ni en el baño.
- Antes de usarla, revise que los tornillos y las ruedas no estén flojos y que la andadera no esté deformada ni agrietada.
- Las cuatro ruedas deben tocar el piso de forma estable.
- Si nota algo raro, no la use y escribanos.

**ADVERTENCIA**

Fíjese en los obstáculos del piso: si algo se atora en las ruedas, la andadera se puede voltear.

**ATENCIÓN**

No deje la andadera al sol directo ni en lugares húmedos: guárdela en un lugar seco y ventilado.

4

Conozca su andadera

Su RehabPro le ayuda a practicar pararse, caminar y empujar, con apoyo en el pecho, la cintura y los brazos. La altura se ajusta sin escalones con dos pistones de gas.



Partes principales. Su andadera es azul con negro; el fabricante la ilustra en otro color.

Ruedas y frenos

- Dos ruedas delanteras universales con seguro para bloquearlas.
- Dos ruedas traseras con freno de mano doble por cable.
- Asiento tipo sillín de espuma de PU suave, resistente y fácil de limpiar.

5 Armado

Su andadera llega plegada, con las ruedas y algunas piezas aparte. Necesita una llave. Si puede, pida ayuda a otra persona: la andadera pesa entre 31 y 34 kg.



Lo que viene en la caja.

1. Ruedas delanteras

1

Presione el freno de la rueda

Presione el interruptor del freno de la rueda.



2

Enrosque la rueda

Alinéela con el orificio y gire la rueda en el sentido de las agujas del reloj.



3

Apriete

Apriete y fije con una llave.

**2. Ruedas traseras**

1

Elija el largo

El ancho de adelante hacia atrás se ajusta en tres niveles.



2

Alinee los orificios

Pase una llave por el orificio del tornillo y gírela a izquierda y derecha hasta alinear los orificios de adentro y de afuera.



3

Fije con la perilla

Apriete y fije con un tornillo de perilla.

**3. Manubrio**

1

Saque las hebillas


Sujete la hebilla con dos dedos y sáquela, de los dos lados.



Conecte el agarre

- 2 Retire el manubrio, gire el agarre hacia arriba y conéctelo al manubrio, parejo de los lados izquierdo y derecho.

Retira el manubrio, gira el agarre hacia arriba y conéctalo al manubrio.
(Nota: Conéctalo en paralelo desde los lados izquierdo y derecho.)

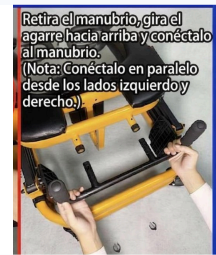

Fije

- 3 Alinee los orificios y presione las hebillas de los dos lados para fijarlo.



Alinea con las posiciones de los orificios y presiona las hebillas de ambos lados (izquierdo y derecho) para fijarlo.

4. Freno de mano

Quite el tornillo

- 1 Con una llave, quite el tornillo del freno de estacionamiento.

Use una llave para quitar el tornillo del freno de estacionamiento.



Coloque el freno

- 2 Instale el freno de mano debajo del agarre.

Instale el freno de mano debajo del mango.



Acomode el cable

- 3 Fije el cable del freno con el velcro.



Fije el cable del freno con Velcro.

5. Soporte lumbar

1

Elija la altura

El soporte lumbar tiene tres alturas.



2

Pase la perilla

Pase el tornillo de perilla a través del marco.



3

Apriete

Alinéelo con el orificio del tornillo y apriételo para fijarlo.



6. Correa de la cintura

1

Retraer o extender


El soporte de la cintura se puede cerrar (retraer) o abrir (extender).



2

Ajuste el ancho

El ancho izquierdo y derecho del soporte lumbar se ajusta y se fija apretando el tornillo.

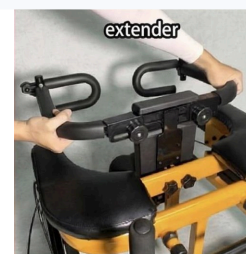

Apriete o afloje

3

En el sentido de las agujas del reloj aprieta; al revés, afloja.



7. Reposapiés

Acople el reposapiés

1

Únalo a las barras de soporte izquierda y derecha y apriételo con los tornillos de perilla.



Elija la altura

2

Hay dos alturas de enganche. Levante el interruptor del pasador.



Fije

3

Empuje la varilla de atrás a la posición que quiere y suelte el interruptor para fijarla.



CONSEJO DE DON ANDY

Al terminar, revise que todos los tornillos de perilla estén bien apretados antes del primer uso.

6 Ajustes y uso

La andadera se ajusta a cada cuerpo. Haga los ajustes con la andadera detenida y con la ayuda de su acompañante.

Altura general

1

Presione los interruptores de los pistones de gas izquierdo y derecho, suba o baje, y suéltelos para fijar. El asiento queda de 28 a 92 cm del piso.



Largo de la base

2

Retire los tornillos de perilla de los dos lados, empuje o jale las varillas en una de sus tres posiciones y fíjelas con las perillas. La base mide de 80 a 100 cm de adelante hacia atrás.



Altura del soporte lumbar

3

Afloje las dos perillas frente a la almohadilla de pecho, elija una de las tres alturas y apriételas. Queda de 26 a 34 cm sobre el asiento.



Ancho del soporte lumbar

4

Afloje las perillas de los lados izquierdo y derecho, ajuste el ancho y apriételas.



Frenos

- Para detenerse, use los dos frenos de mano.
- Para dejar la andadera fija, ponga el seguro de las ruedas delanteras.

Al usarla

- Siempre con otra persona a su lado.
- Solo en piso plano, sin pendientes.
- Fíjese que nada se atore en las ruedas.




CONSEJO DE DON ANDY

Usted marca el ritmo: practique un poco cada día, acompañado y sin prisa.

7 Plegar y guardar

Su andadera es plegable. Plegada mide 80 × 72 × 48 cm y, según el fabricante, cabe en la cajuela de la mayoría de los autos.

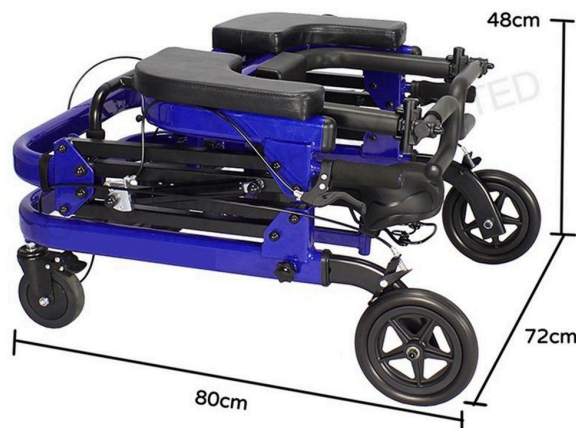

Plegada: 80 × 72 × 48 cm.

- Cuando no la use, guárdela en un lugar seco y ventilado, sin sol directo ni humedad.
- Ponga aceite lubricante en las ruedas con regularidad.
- Antes de cada uso, revise que tornillos y ruedas estén firmes y que la andadera no tenga grietas ni deformaciones.
- El asiento y los acolchados de espuma de PU se pueden limpiar.

**ADVERTENCIA**

Si alguna pieza está floja, deformada o agrietada, deje de usar la andadera y escríbanos por WhatsApp antes de volver a usarla.

Característica	Valor
Tipo	Andadera vertical para practicar pararse y caminar
Capacidad máxima	100 kg
Peso de la andadera	31 – 34 kg
Estatura recomendada	1.00 – 2.00 m
Altura del marco	58 – 130 cm (ajuste continuo)
Altura del asiento	28 – 92 cm
Soporte lumbar	38 – 46 cm interior · 72 cm exterior
Base de ruedas	80 – 100 cm de adelante hacia atrás (3 posiciones) · 72 cm de ancho
Plegada (L × An × Al)	80 × 72 × 48 cm
Llantas delanteras	12.7 cm (5") · PU con seguro
Llantas traseras	20.3 cm (8") · PU silenciosas
Frenos	Dos frenos de mano y seguro en las ruedas delanteras
Ajuste de altura	Dos pistones de gas, sin escalones
Marco	Acero al carbono (tubo 30 × 60 mm, 1.2 mm)
Color	Azul con negro

Bajo uso y mantenimiento normales, ANDAFACIL le ofrece **90 días de garantía** desde la fecha de compra contra **defectos de fabricación**. Conserve su factura o comprobante: lo necesitaremos para cualquier revisión.

Si registra su compra dentro de los 3 días después de recibirla, suma **30 días más** (120 días en total).

	Detalle
Cubre	Defectos de fabricación y de materiales, componentes eléctricos y estructura, con uso normal.
No cubre	Mal uso, golpes, caídas, sobrecarga, agua o clima, desgaste normal (llantas, cojines, cubiertas), modificaciones no autorizadas ni desastres naturales.
Cómo reclamar	Escríbanos por WhatsApp o envíe un reporte de garantía con su número de pedido, fotos o video del problema y, si aplica, qué luz parpadea.



Garantía y soporte: escriba a Marla por WhatsApp

Con su número de pedido y fotos o video lo resolvemos más rápido. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafpavx1



**Registre su compra
(+30 días de garantía)**

s.andafacil.com/garantiaext



**¿Algo dejó de funcionar?
Reporte de garantía**

s.andafacil.com/ticketegarantia



**¿Dudas de uso o ajustes?
Reporte de soporte**

s.andafacil.com/ticketesoporte



**Todo sobre garantía
y soporte**

s.andafacil.com/garantiasoporte

Devoluciones

¿Cambió de opinión? Tiene **7 días desde que recibe su pedido** para solicitar una devolución, con el producto en buen estado y, de ser posible, en su empaque original. El envío de regreso suele ir por cuenta del cliente, salvo que le indiquemos otra cosa.



**Solicitar una
devolución**

s.andafacil.com/devolucion



**Garantía extendida
TotalCare**

s.andafacil.com/andafaciltotalcare

Al escribirnos, incluya su número de pedido, el SKU, el número de serie (etiqueta en el chasis o bajo el asiento), una descripción breve y fotos o video.



ANDAFACIL

IMPORTADO A MÉXICO POR: EUREKA MOMENTS FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: EMF230825V83

Calle Baja California No. Ext. 279, Int. 303, Col. Hipódromo, Cuauhtémoc, CP 06100, Ciudad de México, México

www.andafacil.com · contacto@andafacil.com · WhatsApp +52 1 55 9990 2396

¡Gracias por su compra!

¿Le está sirviendo su andadera? Cuéntenos su experiencia: su opinión ayuda a otras familias a decidir.



Visite la página o escanee el código QR
www.andafacil.com/review



¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp

Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafpavx1



Movilidad sin límites