



Manual de usuario

Le explicamos cómo armar, usar y cuidar su silla, paso a paso.

TU NUEVO PRODUCTO

**Andafacil® Strong XL – Silla de
Ruedas Bariátrica**

SKU: AF-SXL-X1



Lea este manual antes del primer uso y consérvelo.

Movilidad sin límites

Le damos la bienvenida



¡Hola! Soy **Don Andy**, de la familia ANDAFACIL. Lo acompaño en este manual: cuando vea mi cara, es un consejo mío para que disfrute su silla.

Gracias por elegir ANDAFACIL. Este manual le explica, paso a paso, cómo armar, usar y cuidar su silla. Léalo con calma antes del primer uso y téngalo a la mano. Si alguien le ayuda, compártale también este manual.

150 kg

capacidad

56 cm

ancho del asiento

19 kg

peso de la silla

61 cm

llantas macizas

¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp



Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafsxlx1



Contenido

Revise la caja	3	Primeros pasos	4
Su seguridad primero	5	Conozca su silla	6
Armado	7	Cómo usarla	8
Plegar, guardar y viajar	9	Especificaciones	10
Garantía, devoluciones y soporte	11		

1

Revise la caja

Antes de armar, revise que venga todo:

- | | |
|---|---|
| ☐ Silla de ruedas plegada | ☐ Cojín adicional (con velcro) |
| ☐ 2 reposapiés desmontables | ☐ Cinturón de seguridad |
| ☐ Cojín de apoyo para las pantorrillas | ☐ Este manual |



CONSEJO DE DON ANDY

Si falta algo o llegó dañado, avísenos dentro de los primeros 7 días por WhatsApp o con un reporte de soporte.

Las fotos de este manual pueden variar un poco respecto a su silla por mejoras del producto.

Tres tipos de avisos en este manual



ADVERTENCIA

Puede causar una lesión o un daño grave.



ATENCIÓN

Cuida su producto y que funcione bien.



CONSEJO DE DON ANDY

Le ayuda a aprovechar mejor su producto.

2

Primeros pasos

Lo esencial para empezar. Los detalles de cada paso vienen en los capítulos siguientes.



1 Despléguela

Jale los descansabrazos hacia los lados hasta que la silla abra por completo.



2 Presione el asiento

Con fuerza, de los dos lados, hasta que quede extendido.



3 Suba los descansabrazos

Hasta que encajen en su lugar.



4 Coloque los reposapiés

Alinéelos con los orificios, insértelos y encájelos.



Véalo en video: 1 minuto

Escanee el código con la cámara de su celular y vea a Alex explicar lo esencial de su silla.

s.andafacil.com/videoafsx1x1



3

Su seguridad primero

Lea estas indicaciones antes de usar la silla por primera vez. Si alguien más la va a empujar, compártaselas también.

**ADVERTENCIA**

La silla soporta hasta 150 kg. Es para una sola persona: no la use para cargar objetos.

- Antes de cada uso, revise los frenos, las ruedas y que los reposapiés estén bien ajustados.
- Use el cinturón de seguridad para ir bien sentado.
- Ponga los frenos de estacionamiento antes de sentarse, levantarse o pasarse a la cama o al sillón.
- Revise que los descansabrazos y los reposapiés queden encajados en su lugar antes de usarla.

**ADVERTENCIA**

Al desplegar la silla y presionar el asiento, no meta las manos en las uniones del asiento: se pueden prensar los dedos.

**CONSEJO DE DON ANDY**

Si la silla es para un familiar, confirme con esa persona el ancho del asiento (56 cm) y que pueda pasarse con facilidad a la cama o al sillón.



Su Strong XL, con los reposapiés desmontables

- Estructura de acero reforzada, con doble refuerzo en X bajo el asiento.
- Asiento extra ancho de 56 cm y respaldo acolchados, con cinturón de seguridad.
- Descansabrazos abatibles: se levantan para pasarse de lado.
- Reposapiés desmontables, con cojín de apoyo para las pantorrillas.
- Llantas macizas sin aire: traseras de 61 cm con aros para impulsarse y delanteras de 20 cm.
- Frenos de estacionamiento y frenos de mano en las manijas, para quien acompaña.
- Bolsa trasera.



CONSEJO DE DON ANDY

Sus llantas son macizas, de PU y nylon: no se ponchan y no necesitan aire.

Saque todos los accesorios de la caja antes de empezar. Para el cojín de las pantorrillas necesitará un desarmador. Si puede, pida ayuda a otra persona: la silla pesa 19 kg.

1

Despliegue la silla

Jale los descansabrazos de los dos lados hacia afuera y revise que la silla quede abierta por completo.



2

Presione el asiento

Presione con fuerza de los dos lados del asiento para que quede totalmente extendido.



3

Suba los descansabrazos


Levántelos de los dos lados hasta que encajen en su lugar.



4

Coloque el cojín de las pantorrillas

Atorníllelo en su soporte con un desarmador.

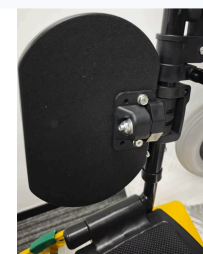

5

Coloque los reposapiés

Alinee cada reposapiés con los orificios, insértelo y encájelo en su lugar. Hágalo de los dos lados.



6

Revise que quedaron firmes

Cada reposapiés debe quedar trabado en su seguro.



7

Ponga el cojín adicional

Fíjelo con el velcro para terminar la instalación.



6

Cómo usarla

Los frenos

- Frenos de estacionamiento: póngalos siempre antes de sentarse, levantarse o detenerse.
- Frenos de mano en las manijas: los usa quien empuja para ir más despacio o detener la silla.
- Para avanzar solo, impúlsese con los aros de las llantas traseras.

Traslados más fáciles

1

Frene la silla

Ponga los frenos de estacionamiento.

2

Levante el descansabrazos

Del lado hacia donde se va a pasar: a la cama, al sillón o al auto.

3

Quite los reposapiés

Son desmontables: así se acerca más y no estorban.

4

Al terminar

Baje el descansabrazos, vuelva a colocar los reposapiés hasta que encajen y abróchese el cinturón.

Ajuste del reposapiés

1

Use la palanca (flecha roja)

Con ella se ajusta el ángulo al que se eleva el reposapiés. Después, revise que quede firme antes de apoyar las piernas.



7

Plegar, guardar y viajar

La silla es plegable. Plegada mide aproximadamente 82 x 92 x 28 cm y pesa 19 kg, así que se guarda en un clóset o se lleva en la cajuela. Como los reposapiés son desmontables, puede quitarlos para que ocupe menos espacio. Si tiene dudas para plegarla, escríbanos por WhatsApp y le explicamos.

Característica	Valor
Tipo	Silla de ruedas manual bariátrica plegable
Capacidad máxima	150 kg · una sola persona
Peso de la silla	19 kg
Medidas (largo × ancho × alto)	105 × 75 × 92 cm
Plegada	82 × 92 × 28 cm
Asiento	56 cm de ancho · 42 cm de fondo · 55 cm al piso
Altura de descansabrazos al piso	72 cm
Llantas traseras	61 cm (24") · macizas de PU/nylon, sin aire
Llantas delanteras	20.3 cm (8") · macizas
Descansabrazos	Abatibles
Reposapiés	Desmontables · con cojín de apoyo para pantorrillas
Frenos	De estacionamiento y de mano en las manijas
Estructura	Acero reforzado
Color	Negro

Garantía, devoluciones y soporte

Bajo uso y mantenimiento normales, ANDAFACIL le ofrece **90 días de garantía** desde la fecha de compra contra **defectos de fabricación**. Conserve su factura o comprobante: lo necesitaremos para cualquier revisión.

Si registra su compra dentro de los 3 días después de recibirla, suma **30 días más** (120 días en total).

	Detalle
Cubre	Defectos de fabricación y de materiales, componentes eléctricos y estructura, con uso normal.
No cubre	Mal uso, golpes, caídas, sobrecarga, agua o clima, desgaste normal (llantas, cojines, cubiertas), modificaciones no autorizadas ni desastres naturales.
Cómo reclamar	Escríbanos por WhatsApp o envíe un reporte de garantía con su número de pedido, fotos o video del problema y, si aplica, qué luz parpadea.



Garantía y soporte: escriba a Marla por WhatsApp

Con su número de pedido y fotos o video lo resolvemos más rápido. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafsx1x1



**Registre su compra
(+30 días de garantía)**

s.andafacil.com/garantiaext



**¿Algo dejó de funcionar?
Reporte de garantía**

s.andafacil.com/ticketegarantia



**¿Dudas de uso o ajustes?
Reporte de soporte**

s.andafacil.com/ticketesoporte



**Todo sobre garantía
y soporte**

s.andafacil.com/garantiasoporte

Devoluciones

¿Cambió de opinión? Tiene **7 días desde que recibe su pedido** para solicitar una devolución, con el producto en buen estado y, de ser posible, en su empaque original. El envío de regreso suele ir por cuenta del cliente, salvo que le indiquemos otra cosa.



**Solicitar una
devolución**

s.andafacil.com/devolucion



**Garantía extendida
TotalCare**

s.andafacil.com/andafaciltotalcare

Al escribirnos, incluya su número de pedido, el SKU, el número de serie (etiqueta en el chasis o bajo el asiento), una descripción breve y fotos o video.



ANDAFACIL

IMPORTADO A MÉXICO POR: EUREKA MOMENTS FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: EMF230825V83

Calle Baja California No. Ext. 279, Int. 303, Col. Hipódromo, Cuauhtémoc, CP 06100, Ciudad de México, México

www.andafacil.com · contacto@andafacil.com · WhatsApp +52 1 55 9990 2396

¡Gracias por su compra!

¿Le está sirviendo su silla? Cuéntenos su experiencia: su opinión ayuda a otras familias a decidir.



Visite la página o escanee el código QR
www.andafacil.com/review



¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp

Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafsx1



Movilidad sin límites