



ANDAFACIL

Manual de usuario

Andafacil® Andadera Bariátrica Extra Resistente

4 ruedas · asiento · colores rojo y azul



SKUs: AF4R25-ER-R · AF4R25-ER-B

Capacidad máxima: 136 kg · Lea el manual antes del primer uso.

ENGLISH (NORTH AMERICA)

Andafacil® Extra-Sturdy Walker with Seat
AF4R25-ER-R & AF4R25-ER-B

WARNINGS

Before carrying out any operation, visually check the integrity of the device. Where the product presents anomalies, immediately contact the dealer from whom it was purchased. We assumes no responsibility for the misuse of the device.

DESCRIPTION WALKER

The Walker features a compact folding design, aluminum stable frame and fully adjustable handrails designed to help users have more outdoor movement for exercise and leisure purposes.

MATERIAL COMPONENTS

Frame: Aluminum
Wheels: Solid tyre
Handrail: Non-slip textured handrails
Seat: Black leather seat cushion

PREPARING FOR USE

The choice of the type of aid and the necessary settings for use must be carried out by medical and technical staff qualified, depending on the pathology and user terms and conditioning.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. In order to ensure your safety when using the walker, you must comply with the following safety information and all instructions.
2. Check that all wheels are tight before use.
3. Check whether the height adjustment button is secure.
4. Make sure your walker is in place. Be aware of your surroundings when using a walker.
5. The purpose of the backrest is to provide back support when sitting down. The backrest is not designed to support the whole body weight. Avoid leaning while sitting, as this may cause you to fall.
6. The brakes must be in a locked position before sitting in the seat.
7. Brakes are used to prevent wheels from rolling. However, if someone pushes it, it may not prevent the walker from moving.
8. DO NOT push your walker while sitting. Walker did it on purpose.
9. DO NOT use a walker to go backwards, down slopes, climb stairs, curb, or cross large obstacles. There may be a serious risk of falling or injury.
10. DO NOT use seats to transport people or large objects.
11. DO NOT sit in your seat when the walker is on an incline.
12. DO NOT push the walker when the brake is on.
13. DO NOT put your hands on the folding of the walker to avoid getting caught.
14. DO NOT allow yourself to fall on the seat of the walker, but always sit slowly in the seat in a controlled manner.

COMPONENT



1. Hand grips
2. Hand brake lock
3. Screw
4. Seat
5. Rear wheel
6. Padded backrest
7. Brake cable
8. Storage bag
9. Universal wheel

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Walker width	21.06in
Walker length	30.9in
Seat height	19.68in
Seat width	10.24in
Seat length	19.48in
Adjusted max height	34.65in
Adjusted min height	30.71in
Max. User's weight	300lbs
Weight	18lbs
Front wheel	6in
Rear-wheel	6in

The walker requires assembly before use. Please follow the instructions below:




Unfold the main frame



.Insert the rear wheels into the main frame(noted that the wheels mustbe facing outward)




Insert scew to the hole and install the gasket

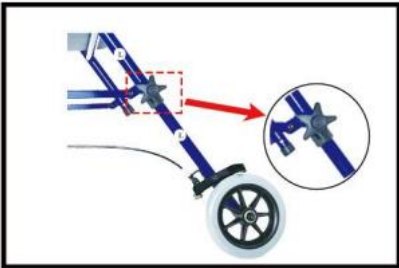

Use rotating nut to screw it tight



This part shall be facing outward,insert the front wheels to main frame

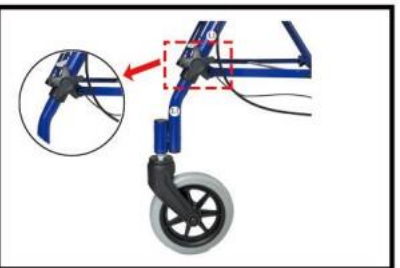

.Screw it tight



.Insert the adjustable handle into main frame (note that the brake lines correspond tothe left and right)



.Screw it tight



Using the cable clip to fix the cable properly



Place the back into the main frame




Press button and insert into the frame



.Completion

HOW TO ADJUST THE HEIGHT?

Turn the screw and take it out, adjust it to the right height, and lock the hole position.

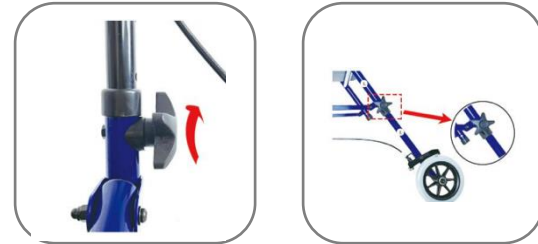

FOLDING THE WALKER

To fold a walker, simply lift the crossbars on either side




1. Pull it up from the middle, then you can fold it

OPERATING THE HAND BRAKES

Hand brake: Hold the handbrake to slow or stop the Walker.

Fixed brakes: Pull the brakes outward until they "click" to lock the walker in position to lock the rear wheel.

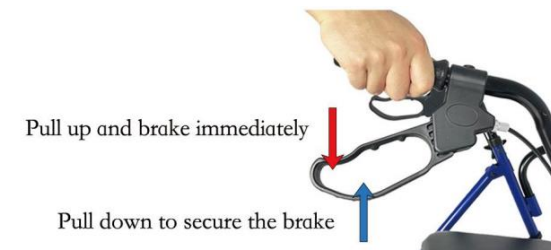

MAINTENANCE

Over a period of time the brake cables may stretch, and if no further adjustments can be made the cables should be replaced. Seek the help of your dealer when replacing brake cables.

The castors should be checked that they are secure each time before using the walker. Also, check the brakes operate correctly and the handles and hand knobs are secure. Should any part of the walker appear loose or insecure discontinue use until it is inspected by an authorized dealer.

The following shows the maintenance schedule:

WEEKLY

- Check brake for malfunction
- Check all wheels and castors for loose bolts and nuts and knobs

PERIODICALLY

- Check handgrips for wear
- Check frame bolts are secure
- Check front and rear axle bolts are secure
- Check tyres for wear or cracks

YEARLY

- Once a year take your walker to an authorised repairer for a full check, clean, service and lubrication of all moving parts

CLEANING

Your walker can be cleaned with a damp cloth or sponge and warm soapy water. Domestic anti-bacterial surface cleaners may be used if required. Care should be taken not to leave any cleaning residues on the handgrips or seat which may leave them slippery when used. Do not use scouring pads or scrapers as this may damage surface coatings.

WARNINGS!

1. Maximum working limit 300 LBS.
2. Don't stand on the product
3. Make sure both arms are adjusted to the same height.
4. Please consult a trained healthcare professional or an approved freelance healthcare distributor for height adjustment of this product.
5. Keep a safe distance between pedestrians and other pedestrians or objects.
6. Some parts may cause injury or damage when they come into contact with other objects.
7. Do not attempt to change the wheels or casters of your bike. If they are faulty or need to be replaced, contact an authorized repairman.
8. Make sure the walker is fully open (the folding bars on both sides are straight) before using it.
9. When folding, keep your fingers away from the folding bar.
10. Make sure the brakes are working properly before use



Thanks for your purchase. We hope you enjoy your Andafacil Walker.



Scan for Manuals&Videos
Buscar Manuales&VÍdeos



ANDAFACIL®
www.andafacil.com

ESPAÑOL (LATINOAMERICA)

Andafacil® Andadera con Asiento Extra Fuerte
AF4R25-ER-R & AF4R25-ER-B

ADVERTENCIAS

Antes de realizar cualquier operación, compruebe visualmente la integridad del dispositivo. En caso de que el producto presente anomalías, contactar inmediatamente con el distribuidor donde lo adquirió. No asumimos ninguna responsabilidad por el mal uso del dispositivo.

DESCRIPCIÓN ANDADOR

El Walker presenta un diseño plegable compacto, un marco estable de aluminio y pasamanos totalmente ajustables diseñados para ayudar a los usuarios a tener más movimiento al aire libre para hacer ejercicio y ocio.

MATERIAL COMPONENTES

Marco: Aluminio
Ruedas: Neumático macizo
Pasamanos: Pasamanos texturizados antideslizantes
Asiento: Cojín de cuero negro

PREPARANDO PARA USAR

La elección del tipo de ayuda y de las configuraciones necesarias para su uso debe ser realizada por personal médico y técnico cualificado, en función de la patología y condiciones del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para garantizar su seguridad al utilizar el andador, debe cumplir con la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.
2. Verifique que todas las ruedas estén apretadas antes de usar.
3. Compruebe si el botón de ajuste de altura está seguro.
4. Asegúrese de que su andador esté en su lugar. Sea consciente de su entorno cuando utilice un andador.
5. El propósito del respaldo es brindar apoyo a la espalda al sentarse. El respaldo no está diseñado para soportar todo el peso del cuerpo. Evite inclinarse mientras está sentado, ya que esto puede provocar una caída.
6. Los frenos deben estar en posición bloqueada antes de sentarse en el asiento.
7. Los frenos se utilizan para evitar que las ruedas rueden. Sin embargo, si alguien lo empuja, es posible que no impida que el andador se mueva.
8. N O empuje su andador mientras está sentado. Walker lo hizo a propósito.
9. NO _ utilice un andador para retroceder, bajar pendientes, subir escaleras, bordillos o cruzar obstáculos grandes. Puede haber un riesgo grave de caída o lesión.
10. NO _ Utilice asientos para transportar personas u objetos de gran tamaño.
11. NO _ siéntese en su asiento cuando el andador esté inclinado.
12. NO _ Empuje el andador cuando el freno esté puesto.
13. NO _ Pon tus manos en los pliegues del andador para evitar que te pillen.
14. NO _ Permítase caer sobre el asiento del andador, pero siéntese siempre lentamente en el asiento de manera controlada.

COMPONENTES



1. Empuñaduras
2. Bloqueo del freno de mano
3. Tornillo
4. Asiento
5. Rueda trasera
6. Respaldo acolchado
7. Cable de freno
8. Bolsa de almacenamiento
9. Rueda universal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho del andador	53.5 CM
Longitud del andador	76.4 CM
Altura del asiento	50 CM
Ancho del asiento	26 CM
Longitud del asiento	49.5 CM
Altura máxima ajustada	88 CM
Altura mínima ajustada	78 CM
Máx. peso del usuario	136.2 KG
Peso andadera	8.2 KG
Rueda delantera	15.2 CM
Rueda trasera	15.2 CM

MANUAL

El andador requiere montaje antes de su uso. Por favor, siga las siguientes instrucciones:




Unfold the main frame




.Insert the rear wheels into the main frame(noted that the wheels mustbe facing outward)




Insert scrow to the hole and install the gasket

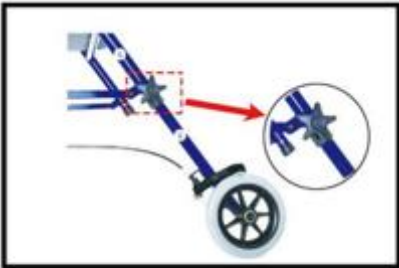

Use rotating nut to screw it tight

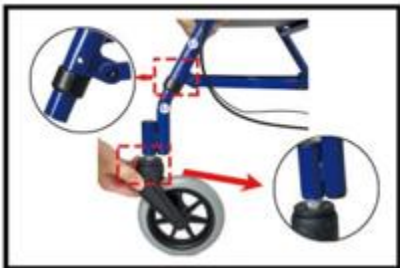

This part shall be facing outward,insert the front wheels to main frame

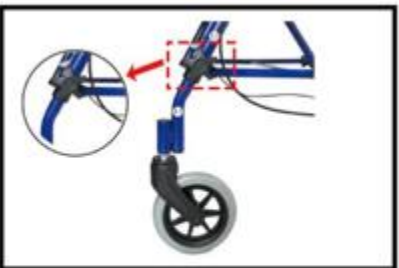

.Screw it tight



.Insert the adjustable handle into main frame (note that the brake lines correspond tothe left and right)



.Screw it tight



Using the cable clip to fix the cable properly



Place the back into the main frame




Press button and insert into the frame



.Completion

¿CÓMO AJUSTAR LA ALTURA?

Gire el tornillo y sáquelo, ajústelo a la altura correcta y bloquee la posición del orificio.

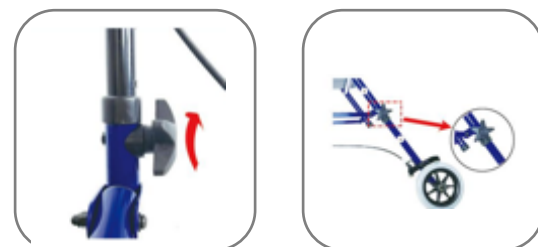

PLEGABLE EL ANDADOR

Para plegar un andador, simplemente levante las barras transversales a cada lado




1.Pull it up from the middle,then you can fold it

OPERANDO EL MANO FRENO

Freno de mano: Mantenga presionado el freno de mano para reducir la velocidad o detener el andador.

Frenos fijos: tire de los frenos hacia afuera hasta que hagan "clic" para bloquear el andador en posición para bloquear la rueda trasera.

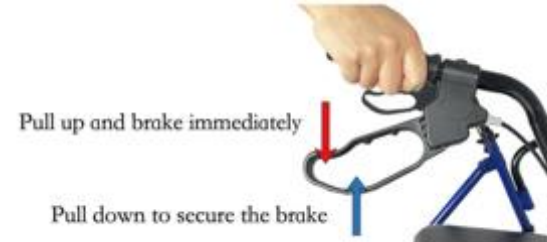

MANTENIMIENTO

Con el tiempo, los cables de freno pueden estirarse y, si no se pueden realizar más ajustes, se deben reemplazar.

Busque la ayuda de su proveedor a la hora de sustituir los cables de freno.

Se debe comprobar que las ruedas estén seguras cada vez antes de utilizar el andador.

Además, verifique que los frenos funcionen correctamente y que las manijas y perillas estén seguras.

Si alguna parte del andador parece floja o insegura, suspenda su uso hasta que sea inspeccionada por un distribuidor autorizado.

A continuación se muestra el cronograma de mantenimiento:

SEMANALMENTE

- Checar que los frenos funcionen de manera adecuada.
- Checar que los tornillos estén ajustados

PERIODICAMENTE

- Checar las llantas
- Checar que todas las piezas estén ajustadas.

MANUAL

ANUAL

- Una vez al año lleve su andador a un reparador autorizado para una revisión completa, limpieza, servicio y lubricación de todas las piezas móviles.

LIMPIEZA

Su andador se puede limpiar con un paño o esponja húmedo y agua tibia y jabón. Si es necesario, se pueden utilizar limpiadores de superficies antibacterianos domésticos. Se debe tener cuidado de no dejar residuos de limpieza en las empuñaduras o en el asiento, lo que podría dejarlos resbaladizos durante su uso. No utilice estropajos ni raspadores, ya que esto puede dañar los revestimientos de la superficie.

¡ADVERTENCIAS!

1. Límite máximo de trabajo 300 LBS.
2. No se pare sobre el producto
3. Asegúrese de que ambos brazos estén ajustados a misma altura.
4. Consulte a un profesional sanitario capacitado o a un distribuidor sanitario independiente aprobado para ajustar la altura de este producto.
5. Mantener una distancia de seguridad entre peaton otros peatones u objetos.
6. Algunas piezas pueden causar lesiones o daños cuando entran en contacto con otros objetos.
7. No intente cambiar las ruedas o ruedas de tu bicicleta Si están defectuosos o necesitan ser reemplazados, comuníquese con un técnico autorizado.
8. Asegúrese de que el andador esté completamente abierto (las barras plegables de ambos lados estén re antes de usarlo).
9. Al plegar, mantenga los dedos alejados de la barra de plegado.
10. Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de usarlos.



Gracias por su compra. Esperamos que disfrute de su andador Andafacil.



ANDAFACIL®

www.andafacil.com



Scan for Manuals&Videos
Buscar Manuales&Vídeos

Garantía, devoluciones y soporte

Garantía comercial

90 días por defectos de fabricación.

Extensión por registro

Registre el producto y obtenga 30 días adicionales.

Devoluciones

7 días naturales, sujeto a las condiciones publicadas por ANDAFACIL.

Soporte

Conserve su comprobante, número de pedido y fotografías del producto.

Uso seguro del asiento

1. Deténgase en una superficie firme y nivelada.
2. Active y confirme los dos frenos antes de sentarse.
3. No impulse la andadera mientras una persona esté sentada.
4. No exceda 136 kg ni use la andadera en escaleras.

Guía, soporte y versión actual del manual

<https://s.andafacil.com/af4r25er>

Garantía: <https://s.andafacil.com/garantiasoporte>

WhatsApp: +52 1 55 9303 0721

