



Manual de usuario

Le explicamos cómo abrir, usar, plegar y cuidar su bastón, paso a paso.

TU NUEVO PRODUCTO

Andafacil® EasyRest – Bastón Extra Fuerte Plegable con Asiento y Luz

SKU: AFBS-ER-X1



Lea este manual antes del primer uso y consérvelo.

Movilidad sin límites

Le damos la bienvenida



¡Hola! Soy **Don Andy**, de la familia ANDAFACIL. Lo acompaño en este manual: cuando vea mi cara, es un consejo mío para que disfrute su bastón.

Gracias por elegir ANDAFACIL. Este manual le explica, paso a paso, cómo abrir, usar, plegar y cuidar su bastón. Léalo con calma antes del primer uso y téngalo a la mano. Si alguien le ayuda, compártale también este manual.

100 kg

capacidad

1.1 kg

de peso

50 cm

asiento al piso

Luz LED

en el mango

¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp



Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafbserx1



Contenido

Revise la caja	3	Primeros pasos	4
Su seguridad primero	5	Conozca su EasyRest	6
Abrirlo y sentarse	7	Plegar, guardar y viajar	8
Cuidado	8	Especificaciones	9
Garantía, devoluciones y soporte	10		

1

Revise la caja

Antes de armar, revise que venga todo:

☐ Bastón EasyRest con asiento

☐ Este manual

☐ Funda con cierre



CONSEJO DE DON ANDY

Si falta algo o llegó dañado, avísenos dentro de los primeros 7 días por WhatsApp o con un reporte de soporte.

Las fotos de este manual pueden variar un poco respecto a su bastón por mejoras del producto.

Tres tipos de avisos en este manual



ADVERTENCIA

Puede causar una lesión o un daño grave.



ATENCIÓN

Cuida su producto y que funcione bien.



CONSEJO DE DON ANDY

Le ayuda a aprovechar mejor su producto.

2 Primeros pasos

Lo esencial para empezar. Los detalles de cada paso vienen en los capítulos siguientes.

1

1 Sujete el mango

Saque el bastón de su funda y tome el mango con firmeza.

2

2 Tire de la palanca

Hacia arriba: el bastón se despliega solo en asiento.

3

3 Recline el asiento

Por completo, antes de sentarse.

4

4 Siéntese de frente al mango

Sujételo con las manos. No lo deje a su espalda.



Véalo en video: 1 minuto

Escanee el código con la cámara de su celular y vea a Alex explicar lo esencial de su bastón.

s.andafacil.com/videoafbserx1



3

Su seguridad primero

Lea estas indicaciones antes de usarlo por primera vez.

**ADVERTENCIA**


Soporta hasta 100 kg. Recline el asiento por completo antes de sentarse.

**ADVERTENCIA**

Siéntese de frente al mango y sujételo. Si se sienta de espaldas al mango y no lo sujeta, es más fácil perder la estabilidad.

- Revise que las tres patas tengan sus puntas de hule antes de sentarse.
- Es un asiento para descansar un momento: no sustituye una silla médica.

Si tiene dudas sobre qué tipo de apoyo le conviene, consulte a su médico o terapeuta.

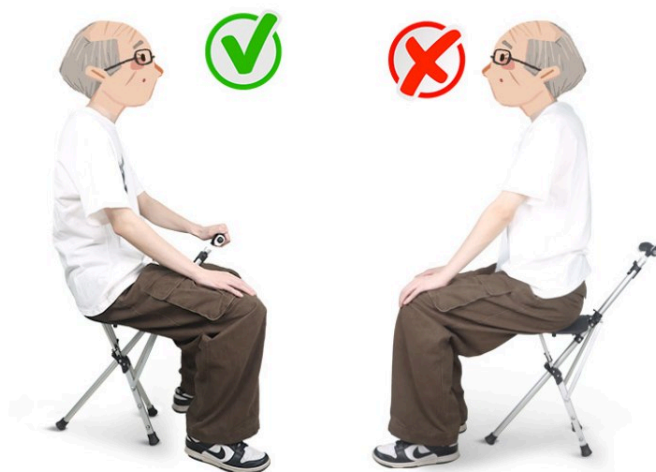

Correcto: de frente al mango, sujetándolo. Incorrecto: de espaldas al mango.



Como bastón (izquierda) y como asiento (derecha)

- Mango ergonómico con luz LED; el botón de la luz está en la punta del mango.
- Palanca de liberación: despliega el asiento.
- Asiento acolchado, a 50 cm del piso.
- Tres patas con puntas de hule antideslizantes.
- Funda con cierre para guardarlo limpio.

La luz LED

Ilumina el piso en entradas, estacionamientos o pasillos oscuros. Funciona con pilas AA, que no vienen incluidas.



CONSEJO DE DON ANDY

Tenga a la mano pilas AA de repuesto, sobre todo si sale de noche.


5

Abrirlo y sentarse

1

Sujete el mango

Saque el bastón de su funda y tome el mango con firmeza.

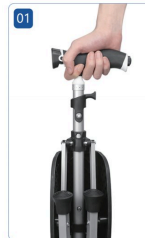

2

Tire de la palanca de liberación

Hacia arriba. El bastón se despliega solo hasta convertirse en asiento.



3

Recline el asiento por completo

Revise que las tres patas queden bien abiertas y firmes en el piso.



CONSEJO DE DON ANDY

Úselo en filas, paseos, consultas o eventos al aire libre: descanse un momento y siga su camino.

6 Plegar, guardar y viajar

Suba el bastidor

1

Sujete el mango con la mano izquierda. Ponga el pulgar derecho sobre la bola y el índice en el pestillo. Presione la bola y, al mismo tiempo, jale el bastidor plegable hacia arriba hasta el tope.



Junte las patas

2


Suelte la mano izquierda y úsela para plegar los dos tubos de las patas hacia adentro.



Cierre el asiento

3

Mantenga la mano izquierda sobre el tubo de la pata y, con la palma derecha, empuje hacia adentro la parte baja del asiento hasta oír el clic.

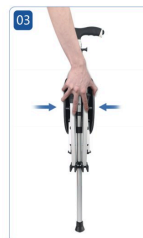

Plegado mide 92 cm y pesa 1.1 kg. Guárdelo en su funda para llevarlo en el auto o en la bolsa.

7 Cuidado

- Guárdelo en su funda con cierre para mantenerlo limpio entre usos.
- Si la luz no enciende, cambie las pilas AA.
- Si algo se siente flojo o el asiento no queda firme, deje de usarlo como asiento y escríbanos por WhatsApp.

Característica	Valor
Tipo	Bastón con asiento plegable 2 en 1
Estructura	Alta resistencia, diseño trípode estable
Capacidad máxima	100 kg
Peso del producto	1.1 kg
Ancho del asiento	30.2 cm
Altura del asiento al piso	50 cm
Altura plegado (como bastón)	92 cm
Asiento	Acolchado; reclinar por completo antes de usar
Luz LED	Integrada en el mango (pilas AA no incluidas)
Plegable	Sí; palanca de liberación lo despliega en asiento
Portátil	Sí
Empaque aprox.	64 × 16 × 13 cm · 1.2 kg

Garantía, devoluciones y soporte

Bajo uso y mantenimiento normales, ANDAFACIL le ofrece **90 días de garantía** desde la fecha de compra contra **defectos de fabricación**. Conserve su factura o comprobante: lo necesitaremos para cualquier revisión.

Si registra su compra dentro de los 3 días después de recibirla, suma **30 días más** (120 días en total).

	Detalle
Cubre	Defectos de fabricación y de materiales, componentes eléctricos y estructura, con uso normal.
No cubre	Mal uso, golpes, caídas, sobrecarga, agua o clima, desgaste normal (llantas, cojines, cubiertas), modificaciones no autorizadas ni desastres naturales.
Cómo reclamar	Escríbanos por WhatsApp o envíe un reporte de garantía con su número de pedido, fotos o video del problema y, si aplica, qué luz parpadea.



Garantía y soporte: escriba a Marla por WhatsApp

Con su número de pedido y fotos o video lo resolvemos más rápido. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafbserx1



**Registre su compra
(+30 días de garantía)**

s.andafacil.com/garantiaext



**¿Algo dejó de funcionar?
Reporte de garantía**

s.andafacil.com/ticketegarantia



**¿Dudas de uso o ajustes?
Reporte de soporte**

s.andafacil.com/ticketesoporte



**Todo sobre garantía
y soporte**

s.andafacil.com/garantiasoporte

Devoluciones

¿Cambió de opinión? Tiene **7 días desde que recibe su pedido** para solicitar una devolución, con el producto en buen estado y, de ser posible, en su empaque original. El envío de regreso suele ir por cuenta del cliente, salvo que le indiquemos otra cosa.



**Solicitar una
devolución**

s.andafacil.com/devolucion



**Garantía extendida
TotalCare**

s.andafacil.com/andafaciltotalcare

Al escribirnos, incluya su número de pedido, el SKU, el número de serie (etiqueta en el chasis o bajo el asiento), una descripción breve y fotos o video.



ANDAFACIL

IMPORTADO A MÉXICO POR: EUREKA MOMENTS FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: EMF230825V83

Calle Baja California No. Ext. 279, Int. 303, Col. Hipódromo, Cuauhtémoc, CP 06100, Ciudad de México, México

www.andafacil.com · contacto@andafacil.com · WhatsApp +52 1 55 9990 2396

¡Gracias por su compra!

¿Le está sirviendo su bastón? Cuéntenos su experiencia: su opinión ayuda a otras familias a decidir.



Visite la página o escanee el código QR
www.andafacil.com/review



¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp

Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafbserx1



Movilidad sin límites