



Manual de usuario

Le explicamos cómo abrir, usar y llevar su andadera, paso a paso.

TU NUEVO PRODUCTO

**Andafacil® EasyFold – Andadera
Ultra Ligera y Portátil**

SKU: AFEF-UL-X1



Lea este manual antes del primer uso y consérvelo.

Movilidad sin límites

Le damos la bienvenida



¡Hola! Soy **Don Andy**, de la familia ANDAFACIL. Lo acompaño en este manual: cuando vea mi cara, es un consejo mío para que disfrute su andadera.

Gracias por elegir ANDAFACIL. Este manual le explica, paso a paso, cómo abrir, usar y llevar su andadera. Léalo con calma antes del primer uso y téngalo a la mano. Si alguien le ayuda, compártale también este manual.

136 kg

capacidad

3 kg

peso

89–97.5

cm de altura

2

ruedas al frente

¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp



Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafefulx1



Contenido

Revise la caja	3	Primeros pasos	4
Su seguridad primero	5	Conozca su andadera	6
Cómo usarla	7	Especificaciones	8
Garantía, devoluciones y soporte	9		

1

Revise la caja

Antes de armar, revise que venga todo:

☐ Andadera EasyFold plegada

☐ Este manual



CONSEJO DE DON ANDY

Si falta algo o llegó dañado, avísenos dentro de los primeros 7 días por WhatsApp o con un reporte de soporte.

Las fotos de este manual pueden variar un poco respecto a su andadera por mejoras del producto.

Tres tipos de avisos en este manual



ADVERTENCIA

Puede causar una lesión o un daño grave.



ATENCIÓN

Cuida su producto y que funcione bien.



CONSEJO DE DON ANDY

Le ayuda a aprovechar mejor su producto.

2 Primeros pasos

Lo esencial para empezar. Los detalles de cada paso vienen en los capítulos siguientes.



1 Ábrala

Despliegue el marco en X por completo.



2 Revise los seguros

Que queden bien cerrados y firmes.

3

3 Ajuste la altura

A su estatura, para caminar derecho.

4

4 Piso firme

Úsela en casa o en la calle, siempre en piso firme.



Véalo en video: 1 minuto

Escanee el código con la cámara de su celular y vea a Alex explicar lo esencial de su andadera.

s.andafacil.com/videoafefulx1



Lea estas indicaciones antes de usar su andadera por primera vez. Si alguien le ayuda, compártaselas también.



ADVERTENCIA

Use la andadera solo cuando esté completamente abierta y con los seguros del marco bien cerrados. Si un seguro queda abierto, la andadera puede doblarse al apoyarse.

- No pase de la capacidad máxima: 136 kg.
- Úsela siempre en piso firme, en interiores o exteriores.
- Revise que las dos empuñaduras queden a la misma altura y firmes.
- Si nota algo dañado o flojo, no la use y escríbanos.
- Si tiene dudas sobre el uso de una andadera, consulte a su médico.



ATENCIÓN

Al plegarla y abrirla, mantenga los dedos lejos de las uniones del marco.

4

Conozca su andadera

Su EasyFold es de aluminio y pesa solo 3 kg: se levanta y se acomoda con una mano. Su marco cruzado en X se mantiene firme en cada paso y se dobla plano para guardarla o llevarla de viaje.



Andafacil® EasyFold

- Empuñaduras ergonómicas de espuma suave.
- Marco cruzado en X, con seguros de plegado.
- Dos ruedas delanteras giratorias de caucho macizo: le ayudan a avanzar con suavidad.
- Punteras traseras anchas y antiderrapantes: le dan estabilidad.
- Altura ajustable de 89 a 97.5 cm.



Las punteras traseras se apoyan en el piso y frenan la andadera con estabilidad cuando usted se detiene.

5

Cómo usarla

1


Ábrala

Despliegue el marco en X hasta que quede completamente abierto.

2

Cierre los seguros

Revise que los seguros del marco queden bien cerrados y firmes.

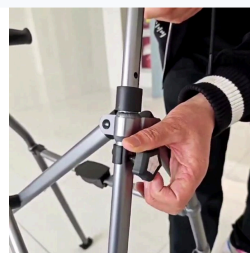

3

Ajuste la altura

Ajuste la altura a su estatura, para caminar derecho y sin tensión en la espalda. Deje los dos lados a la misma altura.

4

Camine

Con las dos manos en las empuñaduras. Las ruedas delanteras le ayudan a avanzar y las punteras traseras le dan estabilidad.



CONSEJO DE DON ANDY

Si no sabe qué altura le conviene, pida apoyo a su médico o fisioterapeuta. Y si tiene dudas para ajustarla, escríbanos por WhatsApp: le ayudamos.

Plegar, guardar y viajar

La EasyFold se dobla plana en segundos y sin herramientas: queda compacta para la cajuela, el clóset o la maleta.

6

Especificaciones

Característica	Valor
Tipo	Andadera ultra ligera plegable con dos ruedas delanteras
Capacidad máxima	136 kg
Peso	3 kg
Altura total	89 a 97.5 cm (ajustable)
Medidas (ancho × largo)	61 × 60 cm
Estructura	Marco cruzado en X con seguros de plegado
Ruedas delanteras	Dos ruedas giratorias de caucho macizo
Apoyos traseros	Punteras anchas antiderrapantes
Empuñaduras	Ergonómicas de espuma suave
Plegado	Se dobla plana para guardar o transportar
Uso recomendado	Interior y exterior, en piso firme
Armazón	Aluminio
Color	Gris titanio con negro

7

Garantía, devoluciones y soporte

Bajo uso y mantenimiento normales, ANDAFACIL le ofrece **90 días de garantía** desde la fecha de compra contra **defectos de fabricación**. Conserve su factura o comprobante: lo necesitaremos para cualquier revisión.

Si registra su compra dentro de los 3 días después de recibirla, suma **30 días más** (120 días en total).

	Detalle
Cubre	Defectos de fabricación y de materiales, componentes eléctricos y estructura, con uso normal.
No cubre	Mal uso, golpes, caídas, sobrecarga, agua o clima, desgaste normal (llantas, cojines, cubiertas), modificaciones no autorizadas ni desastres naturales.
Cómo reclamar	Escríbanos por WhatsApp o envíe un reporte de garantía con su número de pedido, fotos o video del problema y, si aplica, qué luz parpadea.



Garantía y soporte: escriba a Marla por WhatsApp

Con su número de pedido y fotos o video lo resolvemos más rápido. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafefulx1



**Registre su compra
(+30 días de garantía)**

s.andafacil.com/garantiaext



**¿Algo dejó de funcionar?
Reporte de garantía**

s.andafacil.com/ticketegarantia



**¿Dudas de uso o ajustes?
Reporte de soporte**

s.andafacil.com/ticketesoporte



**Todo sobre garantía
y soporte**

s.andafacil.com/garantiasoporte

Devoluciones

¿Cambió de opinión? Tiene **7 días desde que recibe su pedido** para solicitar una devolución, con el producto en buen estado y, de ser posible, en su empaque original. El envío de regreso suele ir por cuenta del cliente, salvo que le indiquemos otra cosa.



**Solicitar una
devolución**

s.andafacil.com/devolucion



**Garantía extendida
TotalCare**

s.andafacil.com/andafaciltotalcare

Al escribirnos, incluya su número de pedido, el SKU, el número de serie (etiqueta en el chasis o bajo el asiento), una descripción breve y fotos o video.



ANDAFACIL

IMPORTADO A MÉXICO POR: EUREKA MOMENTS FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: EMF230825V83

Calle Baja California No. Ext. 279, Int. 303, Col. Hipódromo, Cuauhtémoc, CP 06100, Ciudad de México, México

www.andafacil.com · contacto@andafacil.com · WhatsApp +52 1 55 9990 2396

¡Gracias por su compra!

¿Le está sirviendo su andadera? Cuéntenos su experiencia: su opinión ayuda a otras familias a decidir.



Visite la página o escanee el código QR
www.andafacil.com/review



¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp

Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafefulx1



Movilidad sin límites