



MANUAL DE USUARIO

Paiseec S3 – Scooter Eléctrico Todoterreno

Scooter eléctrico de 4 ruedas con llantas neumáticas, plegable, sistema de seguridad PAi y batería de litio removible

Modelo / SKU: AFSE-S3-P1



Lea este manual completo antes del primer uso y consérvelo para consultas futuras.

Distribuido en México por ANDAFACIL • www.andafacil.com

Gracias por su compra

Gracias por elegir el scooter eléctrico Paiseec S3, distribuido en México por ANDAFACIL. El S3 es un scooter de exterior diseñado principalmente para adultos mayores y personas con movilidad reducida. Este manual explica cómo desplegar, usar, cargar y mantener su scooter con seguridad. Léalo completo antes del primer uso y consérvelo. Las ilustraciones pueden variar ligeramente respecto al producto por mejoras del fabricante; en caso de duda, prevalece el producto real. Si algo no queda claro, escríbanos: estamos para ayudarle.

En este manual encontrará tres tipos de avisos:


ADVERTENCIA	Situaciones que pueden causar lesiones o daños graves si no se siguen las instrucciones.
ATENCION	Precauciones para evitar daños al producto o un funcionamiento incorrecto.
CONSEJO	Sugerencias para aprovechar mejor su producto.

Contenido

- 1. Conozca su scooter
- 2. Desplegar y plegar
- 3. Batería: retirar e instalar
- 4. Uso del scooter
- 5. Advertencias y condiciones del camino
- 6. Indicadores del tablero y volumen de voz
- 7. Batería y carga
- 8. Cuidado diario
- 9. Especificaciones
- 10. Fallas comunes y solución
- 11. Garantía, devoluciones y soporte
- 12. Lista de empaque

1. Conozca su scooter


1.1 Tablero

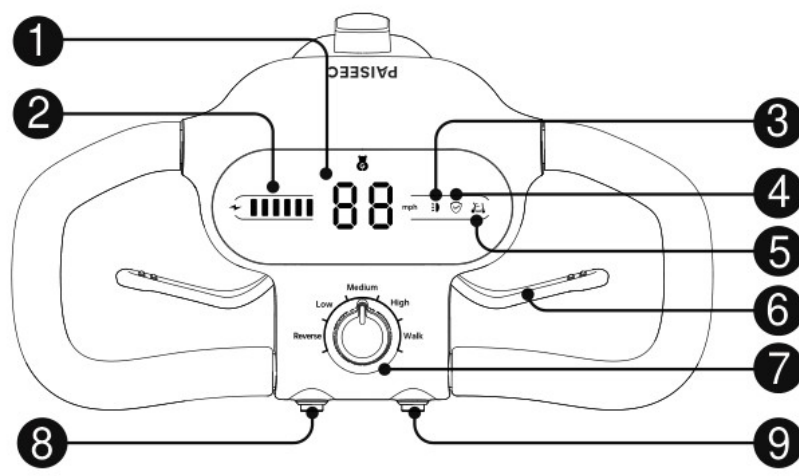

Tablero y mandos del manubrio


N.º	Elemento	N.º	Elemento
1	Pantalla de velocidad	6	Palanca de aceleración (izquierda y derecha)
2	Indicador de batería	7	Perilla de modo: Reversa / Baja / Media / Alta / Caminar
3	Indicador de faro	8	Botón de claxon
4	Indicador de seguridad PAi	9	Interruptor de luces
5	Estado de marcha		

1.2 Partes del scooter

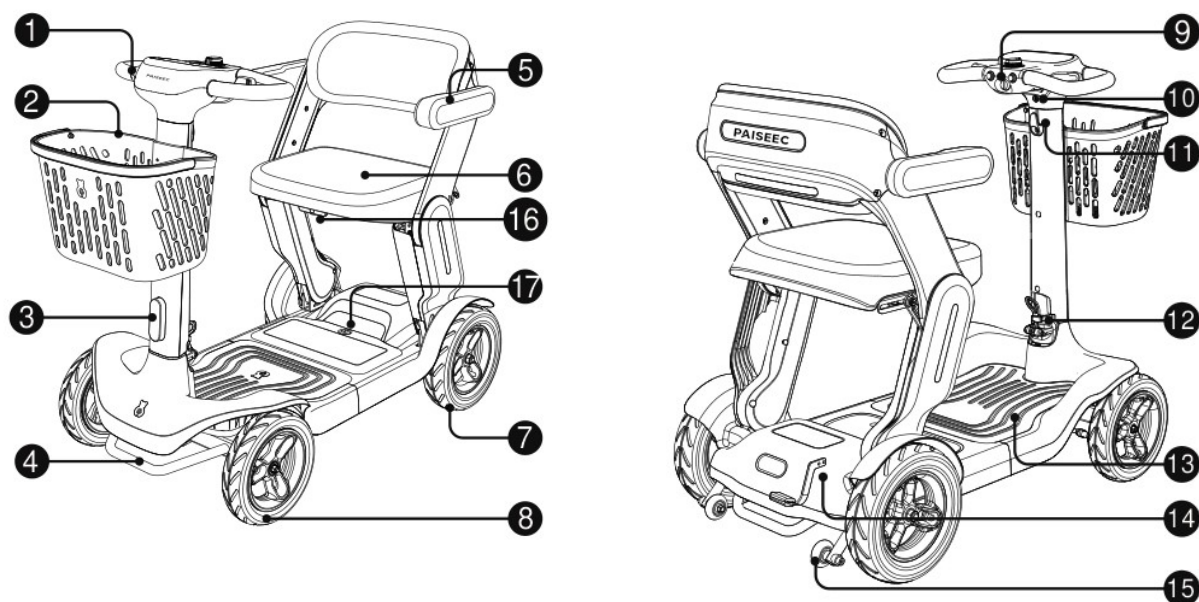

N.º	Parte	N.º	Parte
1	Manubrio de dirección	10	Puerto de carga
2	Canastilla	11	Gancho portaobjetos
3	Faro delantero	12	Mecanismo de plegado de la columna
4	Defensa delantera	13	Piso / reposapiés
5	Descansabrazos	14	Freno electromagnético
6	Asiento	15	Rueda antivuelco
7	Rueda trasera 10"	16	Palanca de plegado del asiento
8	Rueda delantera 9"	17	Poste del asiento
9	Llave de encendido		

1.3 Cargador

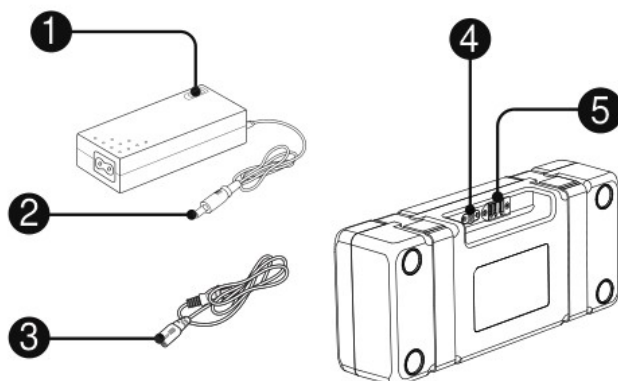

1 Indicador del cargador · 2 Conector · 3 Cable de alimentación · 4 Puerto de carga de la batería · 5 Conector de la batería


2. Desplegar y plegar

2.1 Desplegar el scooter

1. Levante la columna de dirección hasta la posición vertical y asegure el mecanismo de plegado: primero fije el mecanismo hacia arriba y después gire el seguro de plástico a la izquierda hasta que quede trabado.
2. Levante el asiento hasta escuchar un clic: indica que el asiento quedó completamente desplegado.
3. Coloque la canastilla al frente de la columna.



1. Levante la columna y asegure el mecanismo

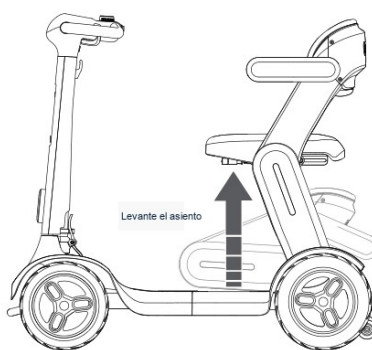

2. Levante el asiento hasta el clic



3. Instale la canastilla

2.2 Plegar el scooter


1. Retire la canastilla.
2. Baje el asiento: jale hacia adelante la palanca de plegado que está bajo el asiento, levante los descansabrazos y baje el asiento con suavidad.
3. Libere el mecanismo de plegado de la columna (gire el seguro de plástico a la derecha antes de jalar el mecanismo hacia abajo) y baje la columna.



1. Retire la canastilla



2. Baje el asiento

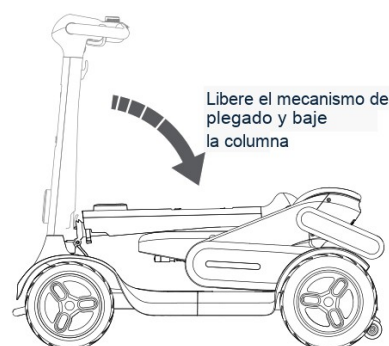

3. Libere el mecanismo y baje la columna

CONSEJO

Plegado, el S3 mide aproximadamente 99 × 55 × 43 cm y cabe en la cajuela de la mayoría de los autos. Retire la batería (3.8 kg) antes de levantarlo: el scooter sin batería pesa unos 28 kg.


3. Batería: retirar e instalar

3.1 Retirar la batería

Inserte la llave en la cerradura que está en la parte trasera del piso y gírela a la posición "Unlock" (abrir). Jale la llave para levantar la tapa de la batería. Tome el asa superior de la batería y júlela hacia arriba, en línea recta, para sacarla de su alojamiento. Extraiga siempre la batería en vertical para no dañar los conectores rápidos.


3.2 Instalar la batería

Alinee los conectores de la base de la batería con los del alojamiento y baje la batería en línea recta. Vuelva a colocar la tapa con la llave puesta y gire la llave a "Lock" (cerrar) para sellar el compartimento. Asegúrese de que la tapa quede bien cerrada; si no, acomódelo y gire la llave de nuevo.

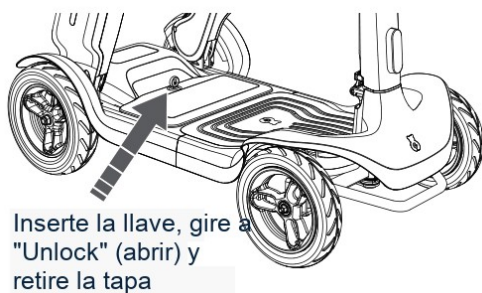


Inserte la llave, gire a "Unlock" (abrir) y retire la tapa

Llave en "Unlock" y retire la tapa

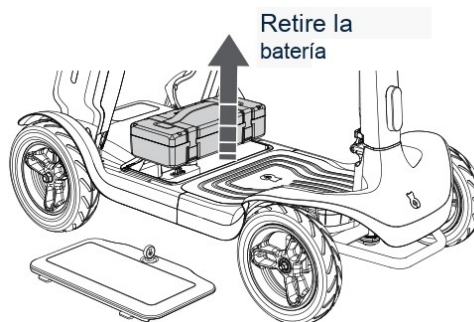

Saque la batería en vertical

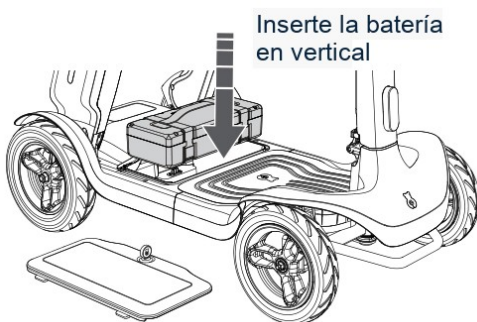

Inserte la batería en vertical



Coloque la tapa y gire la llave a "Lock" (cerrar)

Coloque la tapa y gire la llave a "Lock"

4. Uso del scooter

4.1 Revisión sin encender


- **Scooter en general:** todos los componentes plegables deben estar correctamente armados y asegurados, sin piezas faltantes, dañadas o flojas.
- **Freno electromagnético:** verifique que la palanca del freno se pueda bajar para liberar el freno (empujar a mano) y subir para volver a activarlo (el scooter ya no se puede empujar).
- **Ruedas:** revise la presión de las llantas; el dibujo debe tener al menos 0.5 mm de profundidad; sin objetos incrustados, grietas ni deformaciones; sin bamboleo al empujar o al conducir.

- **Asiento:** bien ajustado, con los pernos de los descansabrazos firmes y sin juego.

Si encuentra cualquier anomalía, no use el scooter y solicite revisión.

4.2 Revisión con el scooter encendido

Inserte la llave y gírela a la derecha para encender el scooter; el tablero se ilumina.

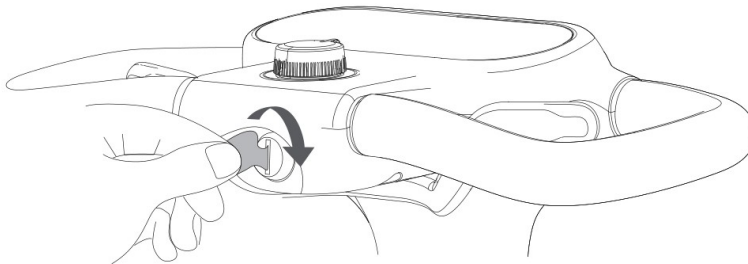


Gire la llave a la derecha para encender


1. Revise que el nivel de batería y los demás indicadores del tablero se muestren normalmente.
2. Confirme que la batería tenga carga suficiente: las 6 barras del lado izquierdo indican el nivel; si enciende la luz roja del extremo derecho, la carga es baja. Cargue a tiempo para no quedarse sin energía a media ruta.
3. Pruebe que el faro encienda y apague con normalidad.
4. Pruebe el claxon: debe sonar con claridad.
5. Gire la perilla de modo y confirme que los avisos de voz suenen al cambiar de modo.
6. La palanca de aceleración no debe estar floja y debe operar con normalidad.
7. Escuche que las llantas giren sin ruidos extraños.
8. Confirme que el freno electromagnético esté en la posición cerrada (activado).

4.3 Avanzar


1. Coloque la perilla de modo en "Baja" (Low).
2. Sostenga la palanca de aceleración (la izquierda o la derecha) para avanzar.
3. Ajuste la velocidad según lo necesite: Baja = 3 km/h · Media = 6 km/h · Alta = 10 km/h. Mientras aprende a manejarlo, practique en modo Baja.

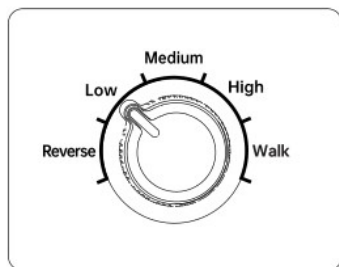

Perilla en "Baja"

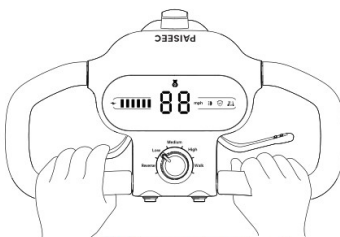

Palanca izquierda

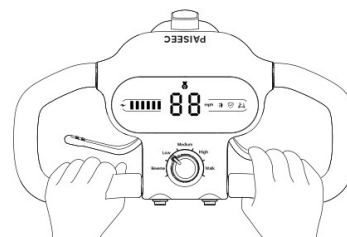


Palanca derecha

Palanca derecha


4.4 Reversa

1. Coloque la perilla de modo en "Reversa" (Reverse).


2. Sostenga la palanca de aceleración (izquierda o derecha) para retroceder.
3. La velocidad en reversa es de 2 km/h. Mire hacia atrás: atención a personas y obstáculos.

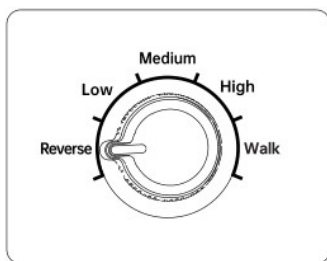

Perilla en "Reversa"

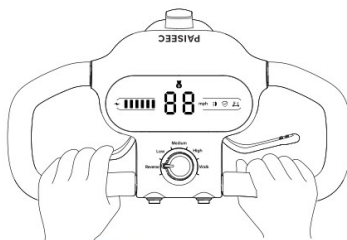

Palanca izquierda

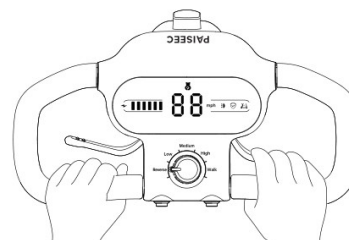


Palanca derecha

Palanca derecha


4.5 Frenar

1. Frenado normal: suelte la palanca de aceleración y el scooter se detiene (tanto en avance como en reversa).
2. Frenado de emergencia: gire la llave completamente a la izquierda; se activa la parada de emergencia y la distancia de frenado se reduce aún más.

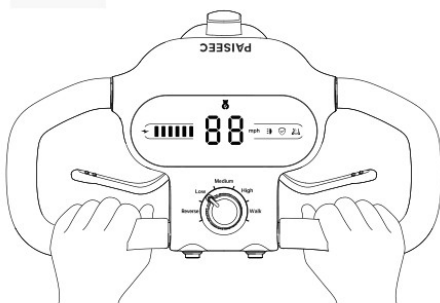


Modo avance

Modo avance: suelte la palanca para frenar

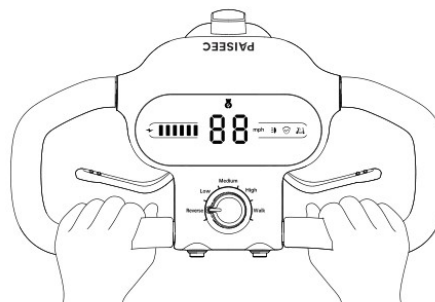

Modo reversa

Modo reversa: suelte la palanca para frenar

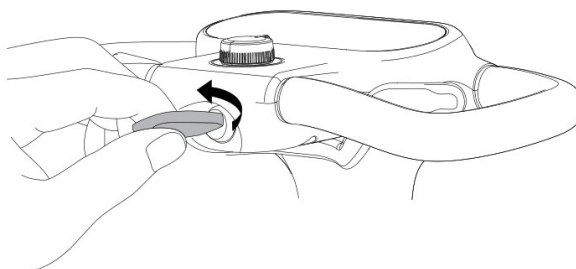


Frenado de emergencia: llave completamente a la izquierda

El scooter también asiste el frenado automáticamente al cambiar la perilla de modo de Reversa a Baja, de Baja a Reversa, de Alta a Caminar y de Caminar a Alta.

4.6 Dar vuelta

1. Para dar vuelta, gire el manubrio hacia la izquierda o la derecha.
2. Reduzca la velocidad y gire despacio. Recomendamos practicar varias vueltas antes de salir a la calle.
3. Si gira demasiado rápido, el indicador de seguridad se enciende y el sistema PAi reduce la velocidad automáticamente para evitar un vuelco.
4. No gire bruscamente el manubrio a alta velocidad: puede volcar.

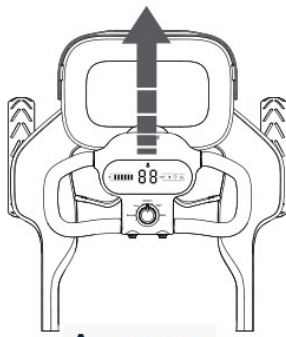


Avanzar

Avanzar



Vuelta a la izquierda

Vuelta a la izquierda

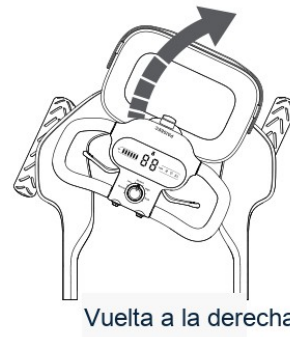


Vuelta a la derecha

Vuelta a la derecha

4.7 Modo Caminar

1. Coloque la perilla de modo en "Caminar" (Walk).
2. Camine junto al scooter sosteniendo la palanca de aceleración (izquierda o derecha) y dirija con el manubrio.
3. Al soltar la palanca, el scooter frena y se detiene.

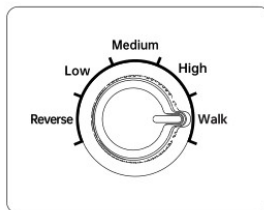

Perilla en "Caminar"

5. Advertencias y condiciones del camino

5.1 Condiciones del camino

1. No suba escalones mayores a 5 cm.
2. No transite por pendientes mayores a 8°.
3. No cruce pendientes de lado con inclinación mayor a 5°.
4. No intente cruzar zanjas o huecos de más de 10 cm de ancho.
5. No conduzca sobre superficies blandas como arena, lodo, nieve o hielo.



Escalón máx. 5 cm



Pendiente máx. 8°



Inclinación lateral máx. 5°




Hueco máx. 10 cm



Sin arena, lodo, nieve ni hielo

5.2 Liberar el freno electromagnético

Si ocurre una falla durante el trayecto que impida conducir o empujar el scooter, puede liberar manualmente el freno electromagnético para moverlo empujándolo: baje la palanca del freno que está en la parte inferior.

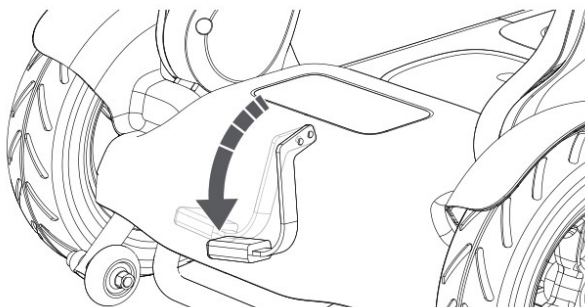

Palanca de liberación del freno electromagnético

ADVERTENCIA

Libere el freno electromagnético solo cuando sea indispensable. Hacerlo sin necesidad es peligroso: el scooter puede rodar solo.

5.3 Advertencias de seguridad

Por su seguridad y la de los demás, lea y respete estas advertencias y la reglamentación local.

1. Observe con atención el entorno y el estado del camino. En zonas concurridas, cerca de paredes, obstáculos, pasillos angostos, superficies irregulares o pendientes, conduzca despacio.
2. Acérquese de frente y a baja velocidad a banquetas, escalones, rampas y obstáculos.
3. No toque las ruedas ni permita que otras personas las toquen mientras el scooter se mueve: riesgo de lesión.
4. No libere el freno electromagnético a propósito: el scooter podría moverse y causar un accidente.
5. Suba y baje del scooter solo en piso plano y nivelado.


6. Tenga especial cuidado en pendientes: use el modo Baja al subir; en bajada la distancia de frenado aumenta, así que suelte la palanca con anticipación. El scooter reduce la velocidad de forma automática al bajar.
7. No preste el scooter a personas que no sepan operarlo.
8. Prohibido el uso a menores de 16 años.
9. Se recomienda usar casco, lentes y otro equipo de protección.
10. En piso mojado la distancia de frenado aumenta: reduzca la velocidad o evite salir. Encienda el faro al conducir de noche.
11. Está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol.

ADVERTENCIA

- El peso del conductor no debe exceder 120 kg.
- La canastilla soporta como máximo 4 kg.

6. Indicadores del tablero y volumen de voz

6.1 Indicadores

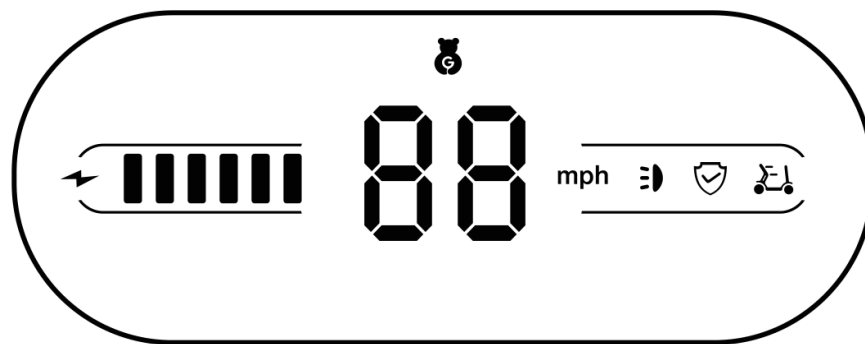

Tablero del Paiseec S3


Indicador	Significado
Faro	Apagado: faro apagado · Blanco: faro encendido
Seguridad PAi	Apagado: sistema PAi inactivo · Blanco: el sistema PAi está detectando las condiciones del camino y optimizando la marcha
Estado de marcha	Blanco: marcha normal · Rojo: no es posible conducir (vea abajo)
Velocidad	Velocidad actual
Batería	Nivel de carga restante
Carga	Encendido mientras carga

El indicador de estado se pone en rojo, por ejemplo, cuando: (a) nadie está sentado y la perilla está en Baja/Media/Alta (sensor de asiento del S3); (b) la perilla está en Caminar en una pendiente pronunciada; (c) se movió la palanca de aceleración al encender: suelte la palanca y reinicie el scooter; (d) la perilla quedó entre dos posiciones: colóquela correctamente y el rojo se apaga.


6.2 Ajustar el volumen de los avisos de voz

El volumen viene alto de fábrica. Para bajarlo o silenciarlo, siga estos pasos en orden; cada ciclo completo cambia el volumen a 50 %, después a silencio y después de vuelta a 100 %.


1. Encienda el scooter con la llave.
2. Gire la perilla de modo a "Caminar".
3. Presione el botón de luces: el faro se enciende.
4. Mantenga presionado el botón de claxon 8 segundos hasta escuchar: "Volumen ajustado al 50 %. Conduzca con precaución".

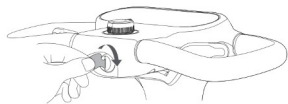


1. Encienda

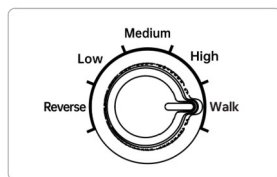

2. Perilla en Caminar

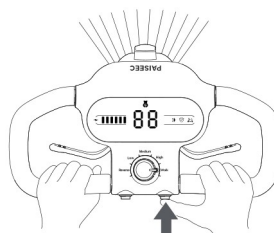

3. Botón de luces

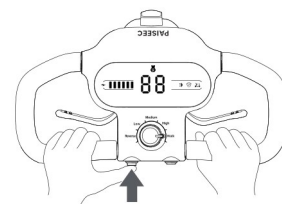


4. Claxon 8 s

NOTA


El volumen del claxon no cambia con este ajuste, para que siempre suene cuando lo necesite.

7. Batería y carga

7.1 Cómo cargar

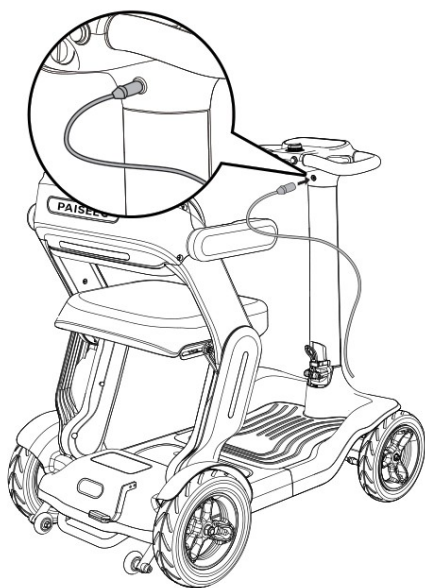


Carga con la batería en el scooter

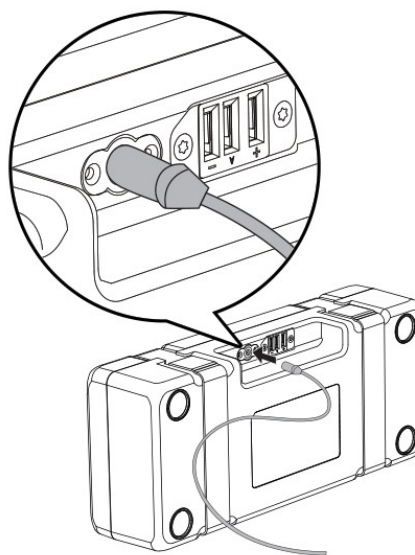

Puerto de carga bajo el frente del scooter

1. Apague el scooter y conecte el cargador original Paiseec al puerto de carga.

2. Conecte el cargador a un tomacorriente (100–240 V) y al puerto de carga que está bajo el frente del scooter.
3. Carga: el indicador del cargador se enciende en rojo fijo y el indicador de carga del tablero también se ilumina.
4. Duración: de 8 a 13 horas según la batería (7–9 h para 12 Ah; 11–13 h para 20 Ah, desde descarga total).
5. Fin de la carga: el cargador se apaga solo; el indicador queda en verde fijo.
6. Desconecte primero el cargador del scooter y después del tomacorriente.

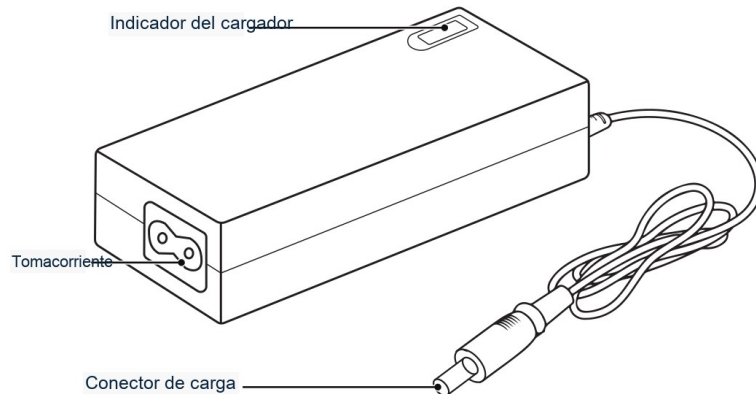

Cargador del S3: rojo = cargando · verde = carga completa o en espera

7.2 Precauciones de carga y mantenimiento de la batería

ATENCIÓN

- Use únicamente el cargador original Paiseec.
- No desarme la batería ni el cargador: riesgo de incendio o explosión y pérdida de la garantía.
- Cargue entre 0 °C y 40 °C. Evite el calor extremo (sobrecalentamiento), el frío bajo cero (sobrecarga) y la humedad (cortocircuito).
- Cargue en un espacio ventilado y amplio (al menos el doble del área del scooter), sin gases inflamables.
- Use un tomacorriente de 100–240 V / 50–60 Hz. Desconecte el cargador al terminar; dejarlo conectado por tiempo prolongado degrada la batería.
- No toque la batería ni el cargador durante la carga ni justo después: se calientan.
- No toque ni moje los conectores ni los acerque a metales u objetos extraños.
- No use extensiones eléctricas ni jale el cable con fuerza. No cargue con las manos mojadas.
- No cargue con el freno liberado: el scooter podría moverse.

Almacenamiento

- Mantenga scooter y batería lejos de fuentes de calor y del agua; nunca sumerja la batería.

- Mantenga batería y cargador secos y protéjalos de golpes y caídas. Si la batería tiene daño externo o funciona de forma anormal, deje de usarla y contáctenos.
- Cierre la tapa del puerto de carga cuando no lo use. Revise periódicamente el cargador y la batería; reemplácelos si presentan daño o desgaste.
- Si no usará el scooter en 30 días, cárguelo al 80 % (cinco barras) y guárdelo en un lugar fresco y seco. En almacenamiento prolongado, cargue al menos 4 horas cada 30 días para conservar mínimo 50 % (tres barras).
- Cargue al 100 % cada 3 meses para prolongar la vida de la batería.
- Si después de un recorrido queda una sola barra, cargue dentro de los siguientes 7 días.

ADVERTENCIA

Una batería que no se recarga a tiempo puede sufrir daño irreversible por descarga profunda. La falla de batería por descarga profunda no está cubierta por la garantía.

8. Cuidado diario

1. El controlador es un componente crítico: no lo abra, repare ni modifique. Límpielo con un paño seco y suave. No use el scooter en ambientes de temperatura o humedad excesivas.
2. No abra ni modifique el motor: lo dañaría y anularía la garantía. Evite sobrecargas o bloqueos prolongados del motor. Limpie con regularidad la superficie del motor y sus cables. No moje el motor: cruzar agua de más de 5 cm de profundidad puede entrar al motor y dañarlo de forma permanente.
3. No use gasolina ni otros químicos para limpiar la carrocería; use un paño húmedo bien exprimido. Realice inspecciones y mantenimiento periódicos.
4. Antes de cada salida revise el nivel de carga y los frenos. Verifique periódicamente el apriete de los tornillos de la palanca y que la palanca regrese al centro. Mantenga seco el sistema eléctrico. Revise el estado de la batería y limpie su conector si es necesario. Si no usa el scooter por un periodo largo, cárguelo una vez al mes. Revise el aislamiento de los cables, la calidad de las conexiones y que las llantas no bamboleen.

Ante cualquier anomalía, solicite una revisión completa a soporte ANDAFACIL.

9. Especificaciones

Característica	Valor
Velocidad máxima	10 km/h (Baja 3 · Media 6 · Alta 10 · Reversa 2 km/h)
Pendiente máxima	8° (con 120 kg: 6 km/h · con 100 kg: 8 km/h · con 75 kg: 10 km/h en pendiente de 8°)
Ángulo máximo de estacionamiento	15°
Altura máxima de obstáculo	5 cm con escalón · 7.6 cm sin escalón
Batería	Litio 37 V 12 Ah (estándar) · opcional 37 V 8 Ah apta para avión
Cargador	42 V 1.5 A · entrada 100–240 V 50/60 Hz
Tiempo de carga	8 – 10 h (12 Ah)
Batería removible	Sí, con llave
Dimensiones armado (L × An × Al)	109 × 55 × 88 cm con canastilla · 99 × 55 × 88 cm sin canastilla
Dimensiones plegado	99 × 55 × 43 cm (sin canastilla)
Peso	32 kg con batería (≈28 kg sin batería; batería 3.8 kg)
Ruedas delanteras / traseras	9" / 10" neumáticas
Altura al piso	7 cm
Asiento	40 × 35 cm
Sistema	Seguridad inteligente "PAi" (control de velocidad en curvas y bajadas, sensor de asiento, recuperación de energía)
Motor	250 W brushless
Frenos	Doble sistema: electromagnético y electrónico
Desbloqueo	Llave mecánica
Capacidad máxima	120 kg (canastilla: 4 kg)
Temperatura de operación	–15 °C a 40 °C

Velocidad y autonomía varían con el pavimento, la humedad, la pendiente, el nivel de batería y la carga. Valores del fabricante.

Fallas comunes y solución

Si la falla persiste después de estas revisiones, contacte a soporte ANDAFACIL. No desarme el equipo.

N.º	Falla	Causa probable	Solución
1	No enciende al girar la llave	① Voltaje de batería muy bajo ② Falla de la llave de encendido	① Cargue la batería por completo ② Contacte a soporte para reemplazar el componente
2	La palanca de aceleración no responde	① Voltaje de batería muy bajo ② Freno electromagnético no cerrado ③ Perilla de modo mal posicionada ④ Sensor de asiento sin activar	① Cargue la batería ② Active el freno electromagnético ③ Coloque bien la perilla de modo ④ Siéntese correctamente; si persiste, contacte a soporte
3	Poca autonomía después de cargar	① Carga insuficiente o	① Cargue por completo o

		cargador dañado ② Batería envejecida o dañada	cambie el cargador ② Solicite revisión de la batería
4	El cargador no carga	① Conector flojo o mal insertado ② Falla del suministro eléctrico ③ Falla de la batería	① Asegure el conector ② Revise el tomacorriente ③ Solicite revisión de la batería
5	Se apaga durante la marcha	① Protección del controlador activada ② Protección térmica de la batería	① Apague y vuelva a encender ② Continúe cuando el motor se enfríe
6	Otras fallas	No cubiertas por esta guía	Contacte a soporte ANDAFACIL. No desarme el scooter.

Garantía, devoluciones y soporte

Garantía ANDAFACIL

Bajo condiciones normales de uso y mantenimiento, **ANDAFACIL** ofrece **90 días de garantía** a partir de la fecha de compra contra **defectos de fabricación**. Conserve su factura o comprobante de compra: lo necesitaremos para cualquier revisión. Si registra su compra en <https://s.andafacil.com/garantiaext> dentro de los 3 días después de recibir el producto, suma **30 días gratis** (quedan 120 días en total).

Cobertura / Plazo	Detalle
Cobertura	Defectos / daños de fábrica (materiales o mano de obra) bajo uso normal y con comprobante de compra.
No cubre	Daños causados por el usuario; mal manejo o uso indebido; clima (por ejemplo producto mojado o exposición a lluvia); golpes, caídas o accidentes; desgaste normal de partes de uso; modificaciones o reparaciones no autorizadas; desastres naturales.
Plazo	90 días base + 30 días con registro gratuito (120 en total)
Cómo reclamar	Abra un ticket de garantía con su número de pedido, SKU, fotos o video del problema y el código de falla (si aplica).

Además de la garantía ANDAFACIL, PAISEEC (fabricante) respalda los componentes principales por los plazos siguientes. Cualquier reclamación en México se gestiona a través de ANDAFACIL; no contacte a la fábrica directamente.

Componente	Plazo del fabricante	Qué cubre
Scooter completo	1 año	Daños no causados por fuerza externa o el usuario
Chasis	1 año	Soldaduras abiertas, grietas, deformación o fractura
Motor	1 año	Desprendimiento de imanes, bobina quemada
Caja de engranes	1 año	Carcasa agrietada, fuga de aceite
Batería de litio	18 meses	Carcasa agrietada, fuga, capacidad menor al 60 %
Cargador	1 año	No carga o no funciona
Controlador	1 año	El scooter no funciona con normalidad
Tablero	1 año	Falla o no muestra información
Llantas	6 meses	Grietas, fractura o reventón natural

Resumen de garantía y soporte

<https://s.andafacil.com/garantiasoporte>



Registro gratuito (+30 días)

<https://s.andafacil.com/garantiaext>



Garantía extendida — Andafacil TotalCare

Si está interesado en comprar un paquete de garantía extendida, visite:

Andafacil TotalCare

<https://s.andafacil.com/andafaciltotalcare>



Devoluciones

¿Cambió de opinión? Tiene **7 días desde que recibe el pedido** para solicitar una devolución (producto en buen estado y, de ser posible, en su empaque original). El envío de retorno suele ir por cuenta del cliente, salvo que indiquemos lo contrario.

Solicitar devolución

<https://s.andafacil.com/devolucion>



Soporte

Dudas de uso, ajustes o refacciones:

Ticket de soporte

<https://s.andafacil.com/ticketesoporte>



Solicitar garantía:

Ticket de garantía

<https://s.andafacil.com/ticketegarantia>



Al escribirnos incluya: número de pedido, SKU, número de serie (etiqueta bajo el asiento o en el chasis), una descripción breve, fotos o video y, si aplica, el código o número de pitidos de la falla.

Importador y distribuidor en México



ANDAFACIL

IMPORTADO A MÉXICO POR: EUREKA MOMENTS FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: EMF230825V83

Calle Baja California No. Ext. 279, Int. 303, Col. Hipódromo, Cuauhtémoc, CP 06100, Ciudad de México, México

www.andafacil.com · contacto@andafacil.com · WhatsApp +52 1 55 9990 2396

Fabricante: Paiseec Technology Limited · Shenzhen, China · www.paiseec.com

Lista de empaque

- 1 scooter Paiseec S3
- 1 canastilla
- 2 llaves
- 1 cargador 42 V 1.5 A
- Guía rápida de instalación y uso
- Manual de usuario
- Certificado de conformidad

Si falta algún artículo o llegó dañado, abra un ticket de soporte dentro de los primeros 7 días.

¡Gracias por su compra!

Esperamos que disfrute su scooter Paiseec S3. Apóyanos con una calificación en nuestras plataformas y redes, y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar

www.andafacil.com/review



Muévete sin límites