



Manual de usuario

Le explicamos cómo armar, usar y cuidar su silla, paso a paso.

TU NUEVO PRODUCTO

Andafacil® Silla de Ruedas con Cómodo

SKU: AFSRC-2025-X1



Lea este manual antes del primer uso y consérvelo.

Movilidad sin límites

Le damos la bienvenida



¡Hola! Soy **Don Andy**, de la familia ANDAFACIL. Lo acompaño en este manual: cuando vea mi cara, es un consejo mío para que disfrute su silla.

Gracias por elegir ANDAFACIL. Este manual le explica, paso a paso, cómo armar, usar y cuidar su silla. Léalo con calma antes del primer uso y téngalo a la mano. Si alguien le ayuda, compártale también este manual.

90.7 kg

capacidad

13 kg

peso de la silla

47 cm

ancho del asiento

2 en 1

silla y cómodo

¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp



Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafsrc2025x1



Contenido

Revise la caja	3	Primeros pasos	4
Su seguridad primero	5	Conozca su silla	6
Armado	7	Cómo usarla	8
Plegar, guardar y viajar	10	Cuidado y mantenimiento	11
Especificaciones	12	Garantía, devoluciones y soporte	13

1

Revise la caja

Antes de armar, revise que venga todo:

☐ Silla de ruedas plegada

☐ Cubeta del cómodo

☐ Accesorio (asiento) extraíble

☐ Cojines de asiento y de respaldo

☐ Este manual



CONSEJO DE DON ANDY

Si falta algo o llegó dañado, avísenos dentro de los primeros 7 días por WhatsApp o con un reporte de soporte.

Las fotos de este manual pueden variar un poco respecto a su silla por mejoras del producto.

Tres tipos de avisos en este manual



ADVERTENCIA

Puede causar una lesión o un daño grave.



ATENCIÓN

Cuida su producto y que funcione bien.



CONSEJO DE DON ANDY

Le ayuda a aprovechar mejor su producto.

2

Primeros pasos

Lo esencial para empezar. Los detalles de cada paso vienen en los capítulos siguientes.




1 Ábrala

Jale el mango hacia afuera y presione el asiento hacia abajo, cuidando sus manos.



2 Ponga la cubeta y el asiento

Empuje la cubeta por debajo del asiento y coloque el accesorio del asiento encima.

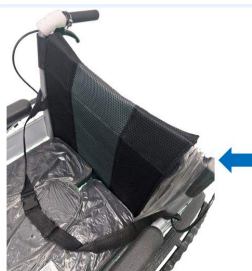

3 Fije los cojines

El cojín del respaldo y los del asiento se fijan con velcro.



4 Frenos antes de sentarse

Presione los dos frenos de estacionamiento y empuje la silla: no debe rodar.



Véalo en video: 1 minuto

Escanee el código con la cámara de su celular y vea a Alex explicar lo esencial de su silla.

s.andafacil.com/videoafsrc2025x1



Lea estas indicaciones antes de usar la silla por primera vez. Si alguien más la va a empujar, compártaselas también.



ADVERTENCIA

La silla es para una sola persona de hasta 90.7 kg. No la use para cargar objetos pesados y no se pare sobre ella.

- Antes de cada uso, revise que las ruedas estén firmes y que el freno de mano y los frenos de estacionamiento funcionen.
- La primera vez que arme o use la silla, hágalo acompañado.
- Ponga los dos frenos de estacionamiento antes de sentarse o levantarse, siempre sobre un piso firme.
- Siéntese despacio, sin dejarse caer. Quien ayuda no debe mover la silla mientras usted se sienta.
- No se pare ni pise los reposapiés al sentarse o al levantarse.
- Mantenga la espalda pegada al respaldo y el cuerpo centrado. No se incline hacia afuera de la silla: puede voltearse.
- El respaldo sirve para apoyar la espalda, no para cargar todo su peso. Evite echarse hacia atrás con fuerza.



ADVERTENCIA

Sin un acompañante, no use la silla para ir en reversa, bajar pendientes, subir escalones o banquetas, ni para cruzar obstáculos grandes: hay riesgo de caída. Nunca la use en pendientes de más de 8°.

- En una bajada no cambie de dirección: la silla pierde estabilidad.
- Si se detiene en una pendiente, revise que los frenos de estacionamiento estén puestos.
- Los frenos impiden que las ruedas giren, pero si alguien empuja la silla con fuerza, puede moverse.

- No empuje la silla con los frenos puestos.



ADVERTENCIA

Al abrir o plegar la silla, no meta las manos en las uniones del asiento: se pueden prensar los dedos.

Si es necesario, pida a su médico, terapeuta o enfermera que le ayude a ajustar la silla a su medida.

4

Conozca su silla



Partes principales

- | | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 Agarradera | 3 Freno de estacionamiento | 5 Llanta delantera de 18 cm (7") |
| 2 Freno de mano | 4 Llanta trasera de 61 cm (24") | 6 Cómodo (cubeta) |

Es silla de ruedas y cómodo en uno: la cubeta extraíble va debajo del asiento. Tiene marco de acero al carbono, llantas macizas que absorben los golpes, descansabrazos que no se resbalan, cojines de malla que dejan pasar el aire y reposapiés de altura ajustable.

5

Armado

Su silla llega plegada, con la cubeta, el accesorio del asiento y los cojines aparte. Siga estos pasos en un lugar amplio y, si puede, con ayuda.

1

Saque todo de la caja


La silla, la cubeta, el accesorio del asiento y los cojines. Quite las bolsas de plástico.



2

Abra la silla

Jale el mango hacia afuera y presione el asiento hacia abajo, con cuidado de no prensarse la mano.

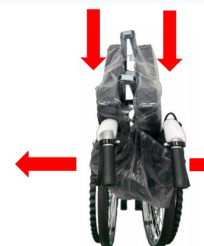

3

Revise que quedó abierta

El asiento debe quedar bien extendido y firme.



4

Coloque la cubeta

Empújela por debajo del asiento.



5

Coloque el accesorio del asiento


Sáquelo de su bolsa y póngalo sobre el asiento.



6

Fije los cojines

Pegue el cojín del respaldo con el velcro. Los cojines del asiento se fijan de la misma manera.

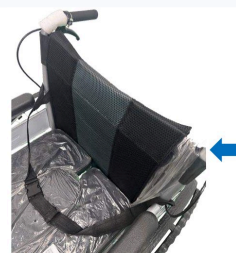

7

Lista

Antes de sentarse, revise que todo quedó firme y que los frenos funcionan.



6

Cómo usarla

Los frenos de estacionamiento

1

Póngalos

Presione los frenos de los dos lados: bloquean las llantas traseras.



2

Compruebe

Antes de sentarse, empuje la silla hacia adelante. Si no rueda, los frenos están bien puestos.

3

Quítelos para avanzar

Regrese las dos palancas antes de empujar la silla.

El freno de mano (para quien empuja)

1

Para ir más despacio o detenerse

Jale la palanca que está bajo la agarradera.



2

Al detenerse

Ponga también los frenos de estacionamiento, sobre todo antes de que la persona se siente o se levante.

Para sentarse y levantarse

- Coloque la silla sobre piso firme y ponga los dos frenos de estacionamiento.
- No se pare en los reposapiés.
- Siéntese despacio, con la espalda pegada al respaldo.
- Para levantarse, deje los frenos puestos hasta estar de pie.



CONSEJO DE DON ANDY

Si usted empuja la silla: vaya despacio, use el freno de mano en las bajadas y pida ayuda para subir banquetas o escalones.

El cómodo

La cubeta del cómodo va debajo del asiento y es extraíble. Antes de que la persona se siente o se levante, ponga siempre los dos frenos de estacionamiento.



CONSEJO DE DON ANDY

Pesa 13 kg: plegada se guarda en casa o en la cajuela sin ocupar mucho espacio.

1

Suba los reposapiés

Levante los dos pedales.

2

Retire los cojines

El del asiento y el del respaldo.

3

Saque la cubeta y el accesorio

Retire la cubeta y el accesorio del asiento.

4

Cierre la silla

Tome el asiento de los dos lados y jálalo hacia arriba: la silla se pliega.



ADVERTENCIA

Al plegarla, no ponga las manos en las uniones del asiento.

Revisiones

- Cada semana: revise que los frenos funcionen y que las ruedas no tengan tornillos, tuercas o perillas flojas.
- De vez en cuando: revise que las agarraderas no estén gastadas, que los tornillos del marco y de los ejes estén firmes (si alguno está flojo, apriételo a tiempo) y que las llantas no tengan desgaste ni grietas.
- Una vez al año: lleve su silla a una revisión completa con un técnico (limpieza, ajuste y lubricación de las partes que se mueven). Escribanos y le orientamos.
- Con el tiempo, los cables del freno se estiran. Si ya no se pueden ajustar, hay que cambiarlos.
- Si alguna parte se siente floja o insegura, deje de usar la silla y escribanos por WhatsApp con una foto.

Limpieza

Límpiala con un paño o esponja húmeda, agua tibia y jabón. Si hace falta, puede usar un limpiador antibacterial de uso doméstico. No deje restos de jabón en las agarraderas ni en el asiento (se ponen resbalosos) y no use fibras ni raspadores. Para desinfectarla, nunca use ácidos, álcalis ni otros químicos corrosivos.

Característica	Valor
Tipo	Silla de ruedas manual con cómodo (2 en 1)
Capacidad máxima	90.7 kg (200 lb) · una sola persona
Peso de la silla	13 kg
Medidas (ancho × largo × alto)	65 × 102 × 84 cm
Asiento	47 cm de ancho · 42 cm de fondo · 45 cm al piso
Altura del respaldo	42 cm
Llantas traseras	61 cm (24") · macizas, absorben los golpes
Llantas delanteras	18 cm (7")
Frenos	Freno de mano y frenos de estacionamiento
Armazón	Acero al carbono
Materiales	Descansabrazos texturizados antideslizantes · cojín de malla transpirable
Pendiente máxima	8°
Color	Armazón plateado · tapicería negra y gris

Bajo uso y mantenimiento normales, ANDAFACIL le ofrece **90 días de garantía** desde la fecha de compra contra **defectos de fabricación**. Conserve su factura o comprobante: lo necesitaremos para cualquier revisión.

Si registra su compra dentro de los 3 días después de recibirla, suma **30 días más** (120 días en total).

	Detalle
Cubre	Defectos de fabricación y de materiales, componentes eléctricos y estructura, con uso normal.
No cubre	Mal uso, golpes, caídas, sobrecarga, agua o clima, desgaste normal (llantas, cojines, cubiertas), modificaciones no autorizadas ni desastres naturales.
Cómo reclamar	Escríbanos por WhatsApp o envíe un reporte de garantía con su número de pedido, fotos o video del problema y, si aplica, qué luz parpadea.



Garantía y soporte: escriba a Marla por WhatsApp

Con su número de pedido y fotos o video lo resolvemos más rápido. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafsrc2025x1



**Registre su compra
(+30 días de garantía)**

s.andafacil.com/garantiaext



**¿Algo dejó de funcionar?
Reporte de garantía**

s.andafacil.com/ticketegarantia



**¿Dudas de uso o ajustes?
Reporte de soporte**

s.andafacil.com/ticketesoporte



**Todo sobre garantía
y soporte**

s.andafacil.com/garantiasoporte

Devoluciones

¿Cambió de opinión? Tiene **7 días desde que recibe su pedido** para solicitar una devolución, con el producto en buen estado y, de ser posible, en su empaque original. El envío de regreso suele ir por cuenta del cliente, salvo que le indiquemos otra cosa.



**Solicitar una
devolución**

s.andafacil.com/devolucion



**Garantía extendida
TotalCare**

s.andafacil.com/andafaciltotalcare

Al escribirnos, incluya su número de pedido, el SKU, el número de serie (etiqueta en el chasis o bajo el asiento), una descripción breve y fotos o video.



ANDAFACIL

IMPORTADO A MÉXICO POR: EUREKA MOMENTS FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: EMF230825V83

Calle Baja California No. Ext. 279, Int. 303, Col. Hipódromo, Cuauhtémoc, CP 06100, Ciudad de México, México

www.andafacil.com · contacto@andafacil.com · WhatsApp +52 1 55 9990 2396

¡Gracias por su compra!

¿Le está sirviendo su silla? Cuéntenos su experiencia: su opinión ayuda a otras familias a decidir.



Visite la página o escanee el código QR
www.andafacil.com/review



¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp

Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafsrc2025x1



Movilidad sin límites