



Manual de usuario

Le explicamos cómo abrir, usar, ponerse de pie y cuidar su silla, paso a paso.

TU NUEVO PRODUCTO

**Andafacil® StandUp Light Silla
Eléctrica Bipedestadora**

SKU: AFSUPL-X1



Lea este manual antes del primer uso y consérvelo.

Movilidad sin límites

Le damos la bienvenida



¡Hola! Soy **Don Andy**, de la familia ANDAFACIL. Lo acompaño en este manual: cuando vea mi cara, es un consejo mío para que disfrute su silla.

Gracias por elegir ANDAFACIL. Este manual le explica, paso a paso, cómo abrir, usar, ponerse de pie y cuidar su silla. Léalo con calma antes del primer uso y téngalo a la mano. Si alguien le ayuda, compártale también este manual.

120 kg

capacidad

35.5 kg

peso de la silla

62.5 cm

ruedas traseras

2

botones: de pie y
sentado

¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp



Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafsuplx1



Contenido

Revise la caja	3	Primeros pasos	4
Su seguridad primero	5	Conozca su silla	6
Abrir, plegar y ajustar	7	Cómo usarla	7
Cuidado y mantenimiento	8	Si algo no funciona	9
Especificaciones	10	Garantía, devoluciones y soporte	11

1

Revise la caja

Antes de armar, revise que venga todo:

- | | |
|--|--|
| ☐ Silla StandUp Light | ☐ Reposabrazos |
| ☐ Control de mano | ☐ Ruedas antivuelco |
| ☐ Cargador | ☐ Este manual |



CONSEJO DE DON ANDY

Si falta algo o llegó dañado, avísenos dentro de los primeros 7 días por WhatsApp o con un reporte de soporte.

Las fotos de este manual pueden variar un poco respecto a su silla por mejoras del producto.

Tres tipos de avisos en este manual



ADVERTENCIA

Puede causar una lesión o un daño grave.



ATENCIÓN

Cuida su producto y que funcione bien.



CONSEJO DE DON ANDY

Le ayuda a aprovechar mejor su producto.

2

Primeros pasos

Lo esencial para empezar. Los detalles de cada paso vienen en los capítulos siguientes.

1


1 Frenos puestos

En las dos ruedas traseras antes de sentarse o levantarse.

2

2 Bien sujeto

Pies en la plataforma, soportes de rodilla y arnés de pecho.

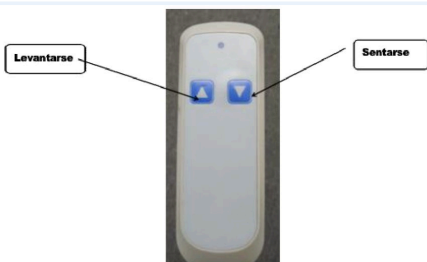

3 Botón «Levantarse»

El asiento y el respaldo suben poco a poco.

4

4 Botón «Sentarse»

Bajan despacio hasta quedar sentado.



Véalo en video: 1 minuto

Escanee el código con la cámara de su celular y vea a Alex explicar lo esencial de su silla.

s.andafacil.com/videoafsuplx1



Lea este manual antes de usar la silla por primera vez y consévelo junto a ella. Si alguien le ayuda o la va a usar, compártaselo también. Si la silla cambia de dueño, entregue también este manual.

**ADVERTENCIA**

La silla soporta hasta 120 kg. Úsela solo para lo que está hecha: desplazarse y ponerse de pie.

**ADVERTENCIA**

Ponga los frenos en las dos ruedas traseras grandes antes de sentarse o levantarse de la silla.

Al usarla

- Las primeras veces, úsela con supervisión de alguien que conozca la silla.
- No la use en pendientes pronunciadas ni a velocidades altas.
- Evite superficies irregulares, accidentadas o en mal estado.
- Los frenos solo sirven para mantener la silla quieta cuando está detenida. No los use para frenar mientras avanza.
- Nunca intente detener la silla con las manos mientras se mueve.
- No se pare sobre los reposapiés.
- No use la silla con una llanta pinchada o dañada.

**ATENCIÓN**

No deje la silla donde la puedan salpicar el agua o la humedad. Cualquier reparación debe hacerse con personal autorizado a través de ANDAFACIL.

4

Conozca su silla

Su StandUp Light es una silla de ruedas manual: usted la mueve con los aros de las ruedas traseras. Con un motor eléctrico y un control de mano, el asiento y el respaldo le ayudan a pasar de sentado a de pie.



Partes principales

- | | | |
|--|--------------------|-------------------|
| 1 Control de mano | 4 Rueda antivuelco | 7 Rueda trasera |
| 2 Caja de control | 5 Rueda delantera | 8 Rueda giratoria |
| 3 Motor de elevación
(función de pie) | 6 Reposabrazos | |

- Marco de aluminio de alta resistencia con piezas de acero.
- Respaldo con la curva de la espalda baja, para un buen apoyo.
- Plataforma reforzada para los pies, que ayuda a ponerse de pie.
- Soportes de rodilla acolchados y arnés de pecho para ir bien sujeto al estar de pie.
- Ruedas delanteras giratorias y ruedas traseras grandes con llanta sólida y aros para empujar.
- Frenos de mano para estacionar.

5

Abrir, plegar y ajustar

Abra la silla

1

Presione hacia abajo los rieles del asiento hasta que la silla abra. No ponga los dedos entre el riel del asiento y el panel lateral.

Ajuste el reposapiés

2

Con el perno del reposapiés, a la medida de sus piernas. Déjelo al menos a 5 cm del piso.

Para plegarla

3

Doble hacia arriba los reposapiés y levante el cojín del asiento.

Reposabrazos y reposapiés

- Para quitar un reposabrazos: oprima el seguro de abajo con el dedo y levante el reposabrazos.
- Para quitar un reposapiés: empuje el seguro de lámina de afuera de su soporte.

6

Cómo usarla

Desplazarse

- Usted puede moverse por sí mismo empujando los aros de las ruedas traseras.
- Para frenar las ruedas al estacionarse, empuje hacia adelante la manija del freno.
- Para subir un escalón, la persona que ayuda presiona hacia abajo el extremo del tubo trasero de la silla para levantar las ruedas de enfrente.
- En una pendiente, la persona que ayuda debe sujetar la silla con firmeza todo el tiempo.

Ponerse de pie y sentarse



CONSEJO DE DON ANDY

Póngase de pie y siéntese siempre con la silla frenada y en un lugar plano. Hágalo con calma: la silla sube y baja despacio.

1

Detenga y frene

En un lugar plano, ponga los frenos de las dos ruedas traseras.

2


Sujétese bien

Pies en la plataforma, soportes de rodilla en su lugar y arnés de pecho abrochado.

3

Póngase de pie

Oprima el botón «Levantarse» del control de mano. El asiento y el respaldo suben poco a poco hasta la posición de pie.

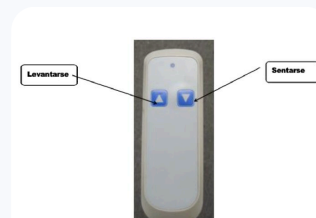

4

Siéntese

Oprima el botón «Sentarse». El asiento y el respaldo bajan despacio hasta la posición de sentado.

7

Cuidado y mantenimiento

Antes de cada uso

- Revise los tornillos de las ruedas delanteras, traseras y giratorias, de los frenos y de las demás piezas. Si alguno está flojo, apriételo.

- Ajuste el reposapiés a la medida de sus piernas, al menos a 5 cm del piso.

Limpieza

- Limpie la silla por fuera con un paño suave, apenas húmedo.
- Puede usar agua, agua con jabón neutro o alcohol isopropílico. Para manchas difíciles, un detergente neutro.
- No use productos abrasivos ni solventes: dañan la superficie y las etiquetas.
- Nunca sumerja la silla en agua.

Guardarla y transportarla

- Guárdela en un lugar limpio, seco y ventilado, sin gases corrosivos.
- Al transportarla, protéjala de golpes, de objetos pesados encima, del sol directo y de la lluvia.

8

Si algo no funciona

Lo que pasa	Qué hacer
Los frenos no detienen bien la silla	Revise la presión de las llantas. Si sigue igual, escríbanos.
Una llanta está ponchada o dañada	No use la silla. Escríbanos.
Una pieza está floja	Apriete el tornillo. Si no queda firme, escríbanos.
La silla no sube o no baja con el control	Revise que el cable del control de mano esté bien conectado. Si sigue igual, escríbanos.



ATENCIÓN

No desarme la silla. Escríbanos por WhatsApp o envíenos un reporte (capítulo de garantía) con una foto o video de lo que pasa.

Característica	Valor
Tipo	Silla de ruedas manual bipedestadora con elevación eléctrica
Capacidad máxima	120 kg
Peso	35.5 kg
Medidas (largo × ancho × alto)	107.5 × 66 × 103.5 cm
Asiento	44 cm ancho · 45 cm fondo · 54.5 cm de altura
Armazón	Aluminio de alta resistencia con piezas de acero
Llantas	Delanteras 20 cm (8") giratorias · traseras 62.5 cm (24.6") sólidas, con aros
Propulsión	Manual, con aros en las ruedas traseras
Función de pie	Actuador eléctrico de 6000 N con control de mano de 2 botones
Batería	Litio recargable · 2800 mAh · 200 a 300 subidas de pie por carga · cargador incluido
Frenos	Manuales de estacionamiento
Sujeción	Soportes de rodilla acolchados · arnés de pecho · plataforma para pies
Almacenamiento	De -25 °C a 70 °C · humedad de 10 % a 95 %

Bajo uso y mantenimiento normales, ANDAFACIL le ofrece **90 días de garantía** desde la fecha de compra contra **defectos de fabricación**. Conserve su factura o comprobante: lo necesitaremos para cualquier revisión.

Si registra su compra dentro de los 30 días después de recibirla, suma **30 días más** (120 días en total).

	Detalle
Cubre	Defectos de fabricación y de materiales, componentes eléctricos y estructura, con uso normal.
No cubre	Mal uso, golpes, caídas, sobrecarga, agua o clima, desgaste normal (llantas, cojines, cubiertas), modificaciones no autorizadas ni desastres naturales.
Cómo reclamar	Escríbanos por WhatsApp o envíe un reporte de garantía con su número de pedido, fotos o video del problema y, si aplica, qué luz parpadea.



Garantía y soporte: escriba a Marla por WhatsApp

Con su número de pedido y fotos o video lo resolvemos más rápido. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafsuplx1



**Registre su compra
(+30 días de garantía)**

s.andafacil.com/garantiaext



**¿Algo dejó de funcionar?
Reporte de garantía**

s.andafacil.com/ticketegarantia



**¿Dudas de uso o ajustes?
Reporte de soporte**

s.andafacil.com/ticketesoporte



**Todo sobre garantía
y soporte**

s.andafacil.com/garantiasoporte

Devoluciones

¿Cambió de opinión? Tiene **7 días desde que recibe su pedido** para solicitar una devolución, con el producto en buen estado y, de ser posible, en su empaque original. El envío de regreso suele ir por cuenta del cliente, salvo que le indiquemos otra cosa.



**Solicitar una
devolución**

s.andafacil.com/devolucion



**Garantía extendida
TotalCare**

s.andafacil.com/andafaciltotalcare

Al escribirnos, incluya su número de pedido, el SKU, el número de serie (etiqueta en el chasis o bajo el asiento), una descripción breve y fotos o video.



ANDAFACIL

IMPORTADO A MÉXICO POR: EUREKA MOMENTS FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: EMF230825V83

Calle Baja California No. Ext. 279, Int. 303, Col. Hipódromo, Cuauhtémoc, CP 06100, Ciudad de México, México

www.andafacil.com · contacto@andafacil.com · WhatsApp +52 1 55 9990 2396

¡Gracias por su compra!

¿Le está sirviendo su silla? Cuéntenos su experiencia: su opinión ayuda a otras familias a decidir.



Visite la página o escanee el código QR
www.andafacil.com/review



¿Tiene una pregunta? Escriba a Marla por WhatsApp

Nuestra asesora le responde en minutos. Escanee el código o escriba al:

WhatsApp 55 9990 2396

s.andafacil.com/wamanualafsuplx1



Movilidad sin límites